



TIP GUIDE

AIR SCALER

Create it 

**NSK**

チップの数だけ  
エアースケーラーの臨床の幅が  
広がります

初期う蝕除去 P12




スケーリング P04



ペリオ P06



補綴物 (Vチップ) P07-08

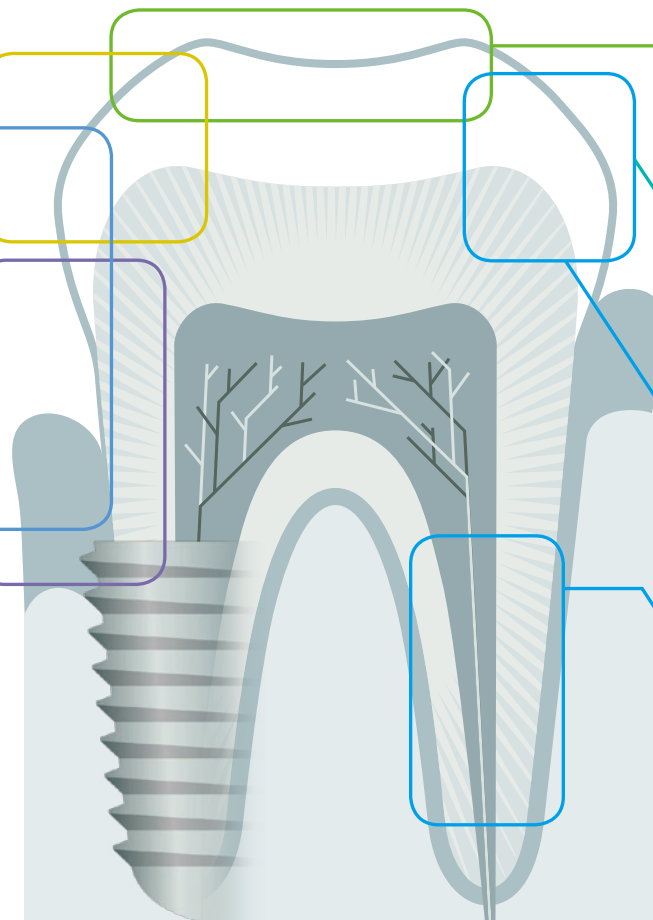

ソニックブラシ P10



形成 (最終仕上げ) P14-16




初期う蝕除去 (Vチップ) P19-20




エンド (Vチップ) P18



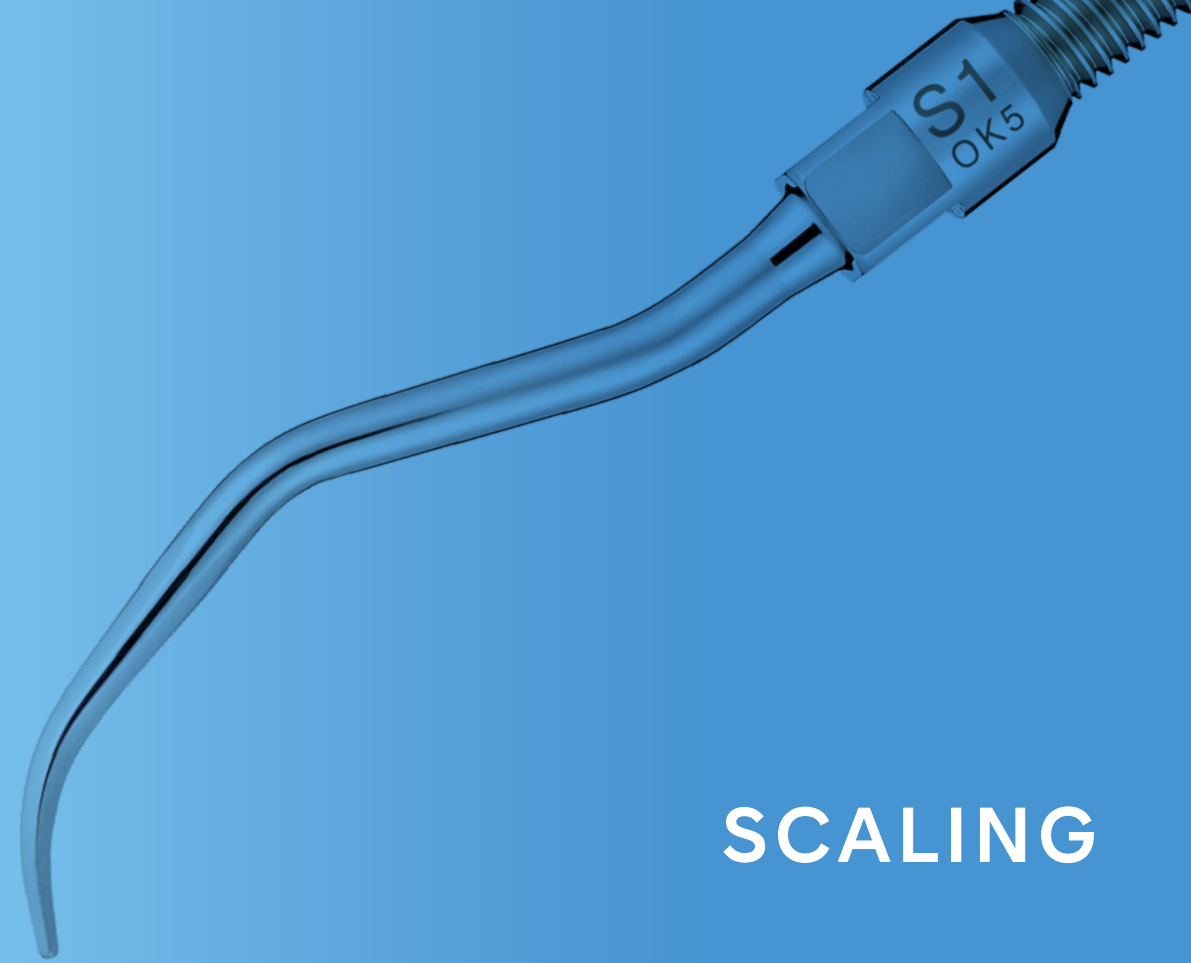



# SCALING

## SCALING スケーリング

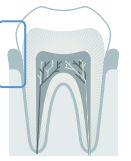

### 製品名 S1

歯肉縁上のスケーリングに適したユニバーサルタイプのチップです。活用範囲が広く全顎的に使用できます。

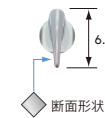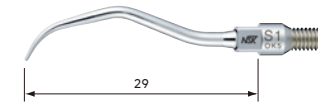



標準価格 ¥5,800

製品番号 Z252411

•ユニバーサルタイプ

### 製品名 S2

歯肉縁上のスケーリングに適したチップです。

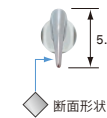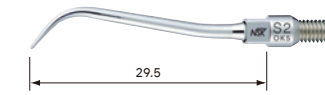



標準価格 ¥5,800

製品番号 Z252413

•シツクルタイプ

### 製品名 S3

歯肉縁上のスケーリングに適したチップです。チップ先端が細く、歯間部や歯肉辺縁への操作も行いやすい形態です。

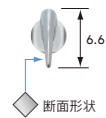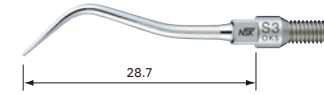

標準価格 ¥5,800

製品番号 Z252412


•ペリオタイプ







PERIO

# PERIO ペリオ

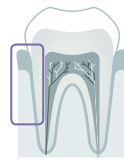

## 製品名 S10

歯肉線下のスクレーリングに適したチップです。

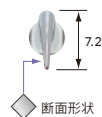
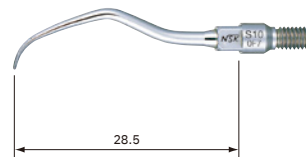


標準価格 **¥8,900** 製品番号 **Z252420**

•ユニバーサルタイプ(スリムライン)

## 製品名 S20

歯肉線下のスクレーリング、メンテナンスに適しています。細長い形状でポケット内へのアクセスがスムーズに行えるので全顎的に使用できるチップです。

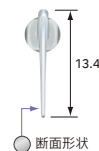
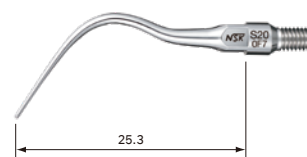


標準価格 **¥8,900** 製品番号 **Z252441**

•ストレートタイプ

## 製品名 S21R

歯肉線下のスクレーリング、メンテナンスに適しています。

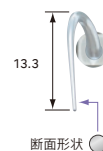
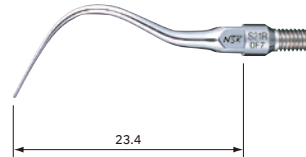


標準価格 **¥8,900** 製品番号 **Z252442**

•右湾曲タイプ

## 製品名 S21L

歯肉線下のスクレーリング、メンテナンスに適しています。緩やかに湾曲した形態で、臼歯部の隣接面へのアクセスが行いやすいチップです。

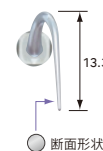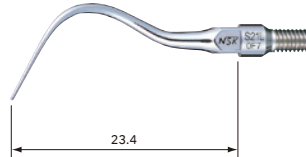

標準価格 **¥8,900** 製品番号 **Z252443**


•左湾曲タイプ



# PERIO

メンテナンス 補綴物 (Vチップ)

ナカニシのペリオコントロールチップはプラスチック素材を使用しているため、補綴・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができます。

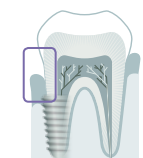

## 製品名 S35



標準価格 **¥5,600** 製品番号 **Z252015**

• Vチップホルダー • Eチップ用レンチ付属 ※プラスチックチップ別売



最後臼歯遠心部

## 製品名 V-P10-A

インプラントの上部構造やポーセレンなどの補綴物のメンテナンスに適したチップです。



標準価格 **¥3,000** 製品番号 **Y1002746**

• 3本入 ※S35ホルダー別売




前歯部の薄い歯肉



マージン部や歯冠隅角

## 製品名 V-P11R-A

複屈曲型のチップです。十分な長さがあるので隣在歯や豊隆部の影響を受けにくく、前歯部から小臼歯まで幅広く使用できる汎用性の高いチップです。

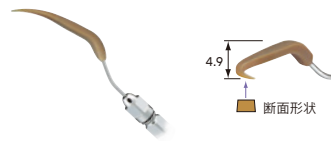

標準価格 **¥3,200** 製品番号 **Y1002747**

• 右湾曲 • 3本入 ※S35ホルダー別売



インプラント体から補綴への移行部

## 製品名 V-P11L-A

複屈曲型のチップです。十分な長さがあるので隣在歯や豊隆部の影響を受けにくく、前歯部から小臼歯まで幅広く使用できる汎用性の高いチップです。




標準価格 **¥3,200** 製品番号 **Y1002748**

• 左湾曲 • 3本入 ※S35ホルダー別売

## 製品名 V-P12-A

V-P10のロングタイプチップです。ブリッジの基底面や、到達しにくい床付きのインプラント上部構造など歯冠長の長い症例でも、容易にアクセスすることができます。

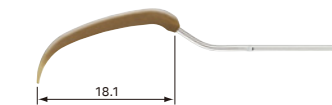

標準価格 **¥3,200** 製品番号 **Y1002749**

• 3本入 ※S35ホルダー別売


## 製品名 ペリオコントロールチップエアスケーラキット



標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Y1002754**

• S35ホルダー  
• V-P10-A、V-P11R-A、V-P11L-A、V-P12-A:各1本入  
• Eチップ用レンチ付属

断面形状: チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

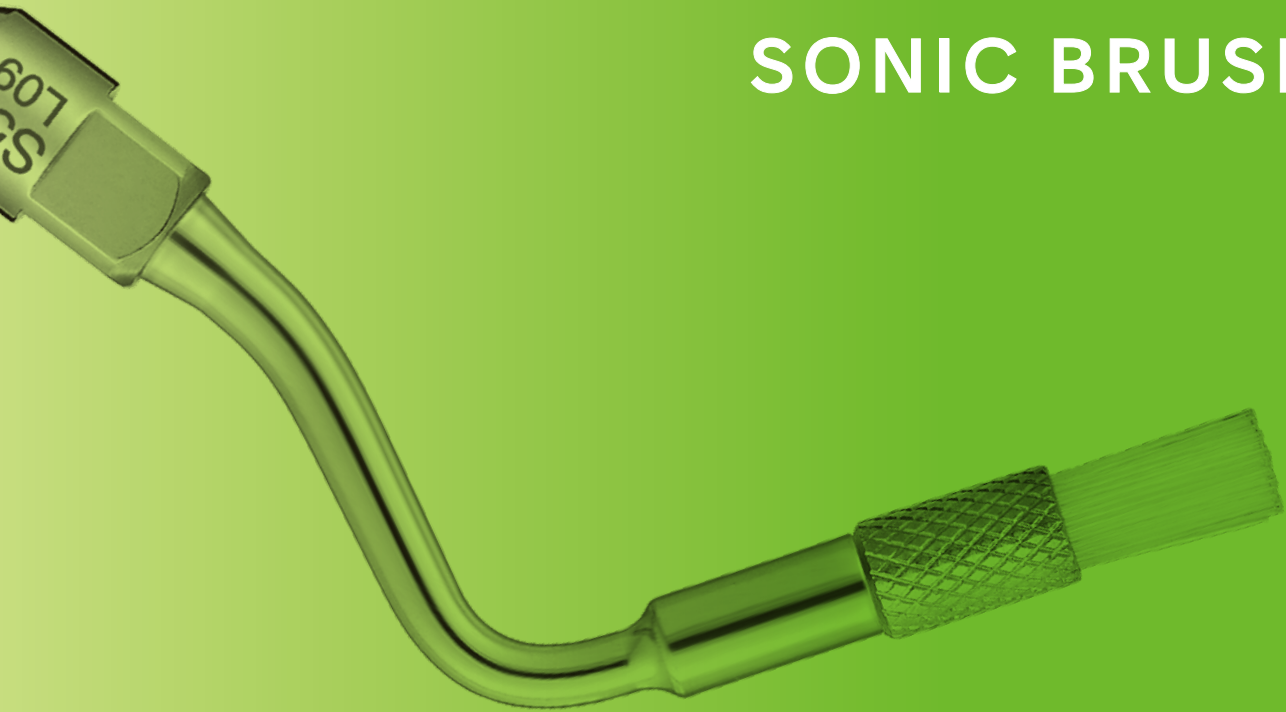

# SONIC BRUSH

## SONIC BRUSH ソニックブラシ

エア一圧による音波振動を利用してブラシが振動するため、歯質や補綴物を傷つけにくく、バイオフィルムなどの除去を行うことができます。また、振動により付着物を除去するため、粘膜の巻き込みリスクを軽減し、ソフトで効率的な清掃が行えます。



製品名 **S50**




標準価格 **¥16,700**

製品番号 **Z252450**

• ソニックブラシホルダー • Eチップ用レンチ付属 ※ブラシ別売

製品名 **S50-C1**

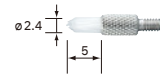


標準価格 **¥2,900**

製品番号 **Y900097**

• コニカルブラシ(小) • 5個入

製品名 **S50-C2**

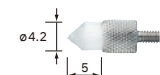


標準価格 **¥2,900**

製品番号 **Y900098**

• コニカルブラシ(大) • 5個入

製品名 **S50-F1**

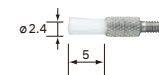


標準価格 **¥2,900**

製品番号 **Y900099**

• フラットブラシ(小) • 5個入

製品名 **S50-F2**

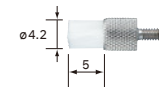

標準価格 **¥2,900**

製品番号 **Y900100**

• フラットブラシ(大) • 5個入

製品名 **S50 ソニックブラシセット**



標準価格 **¥28,000**

製品番号 **Y900096**

• ソニックブラシホルダー • S50-C1、S50-C2、S50-F1、S50-F2 : 各5個入 • Eチップ用レンチ付属



シーラント 接着前



矯正装置周囲



染出し後



補綴物マージン部付近




補綴物接着前の歯牙表面




アバットメント

# RESTORATIVE








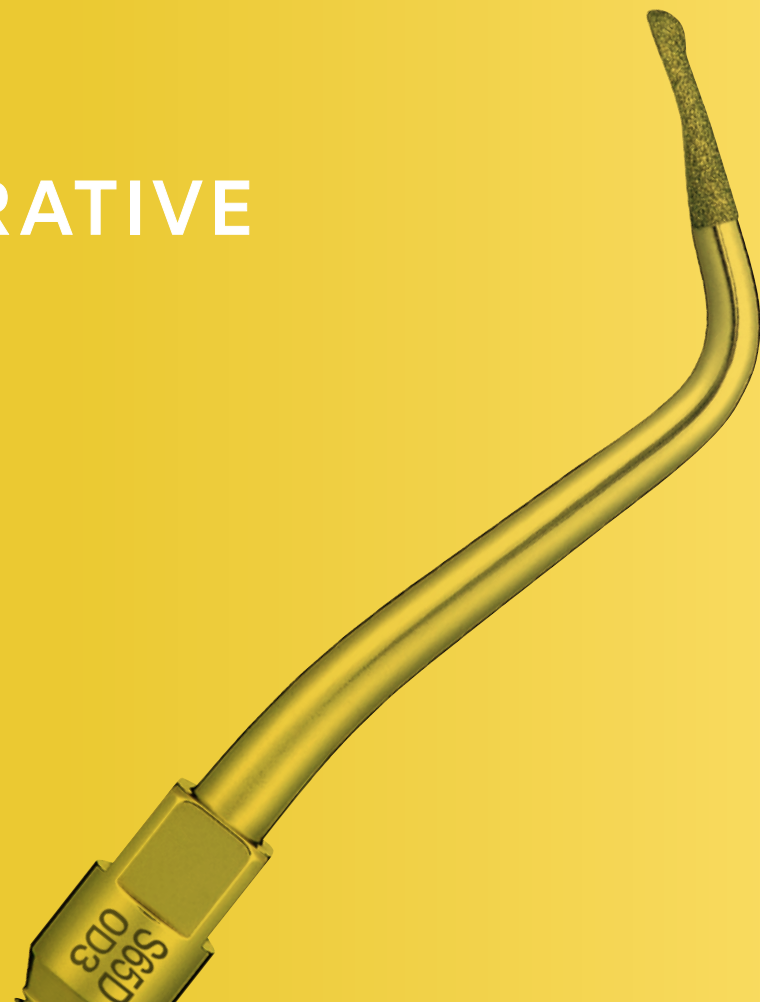


## RESTORATIVE 初期う蝕除去

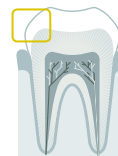

製品名 **S65D**      製品名 **S66D**      製品名 **S67D**      製品名 **S68D**

先端が半球形のチップは歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端部分の隅角部の調整に適しています。

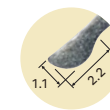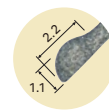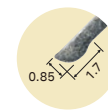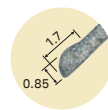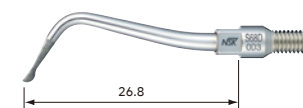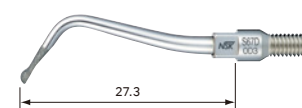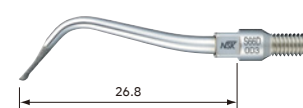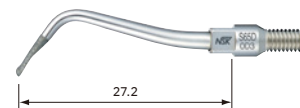

標準価格 **¥14,500**      製品番号 **Z252465**

•ダイヤモンドコーティング

標準価格 **¥14,500**      製品番号 **Z252466**

•ダイヤモンドコーティング

標準価格 **¥14,500**      製品番号 **Z252467**


•ダイヤモンドコーティング

標準価格 **¥14,500**      製品番号 **Z252468**

•ダイヤモンドコーティング



歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去


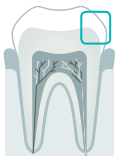


# RESTORATIVE 形成（最終仕上げ）

製品名 **S71D**

製品名 **S72D**

トルヘッドシェイプチップは、ラミネートベニアなど隣接面マージンの最終形成に適しています。  
削りすぎや象牙質露出の危険性が少なく、隣接面においてより保存的な形成が可能となります。

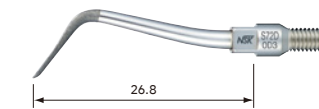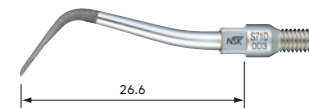

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z252471**

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z252472**

•ダイヤモンドコーティング

•ダイヤモンドコーティング



クラウンエッジの仕上げ・位置決め




ラミネートベニア形成隣接面  
フィニッシングライン仕上げ



隣接面マージンの最終形成

# RESTORATIVE

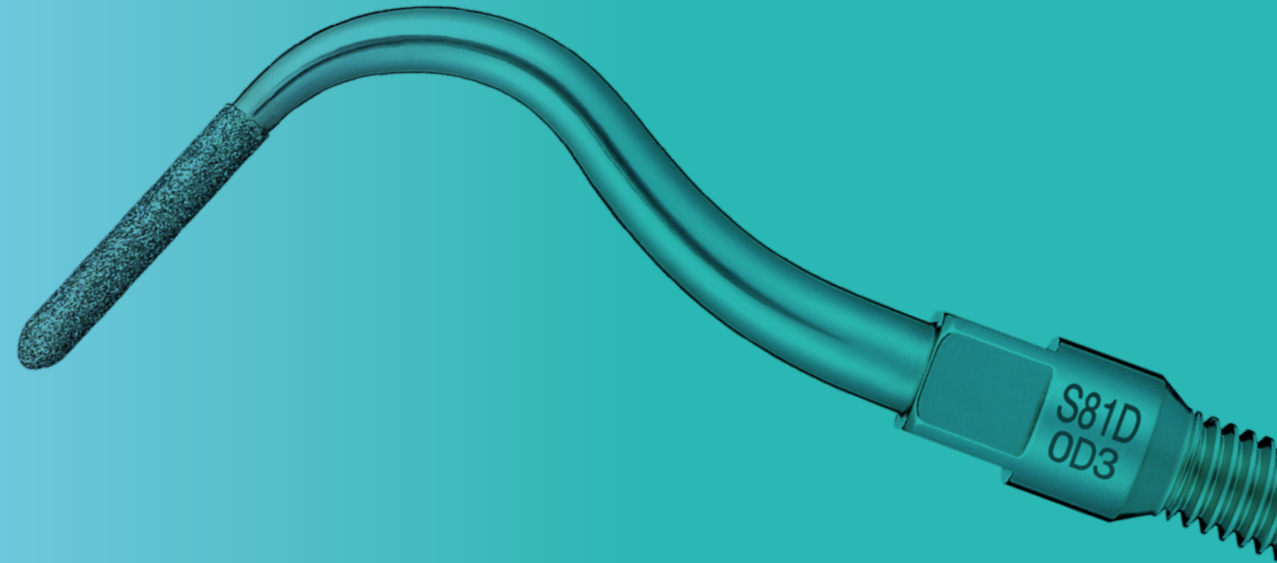



# RESTORATIVE

形成（最終仕上げ）









製品名 **S81D**

製品名 **S82D**

製品名 **S83D**

製品名 **S86D**

支台歯形成における概形成、軸面形成を回転切削器具で行った後の、フィニッシュラインの形成用として使用します。回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁など、フィニッシュラインを明確に仕上げることが可能です。

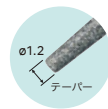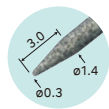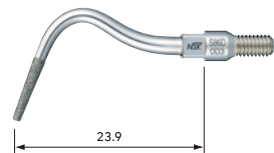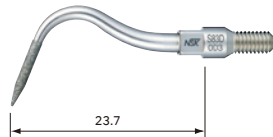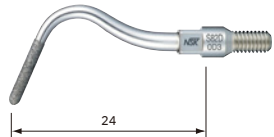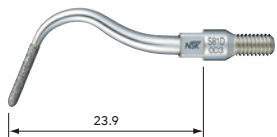

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z252469**

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z252462**

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z252461**

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z252460**

・ダイヤモンドコーティング

・ダイヤモンドコーティング

・ダイヤモンドコーティング

・ダイヤモンドコーティング



支台歯形成の最終仕上げ




J Shapeの除去



形成限界の明示




シーラント除去（再充填）

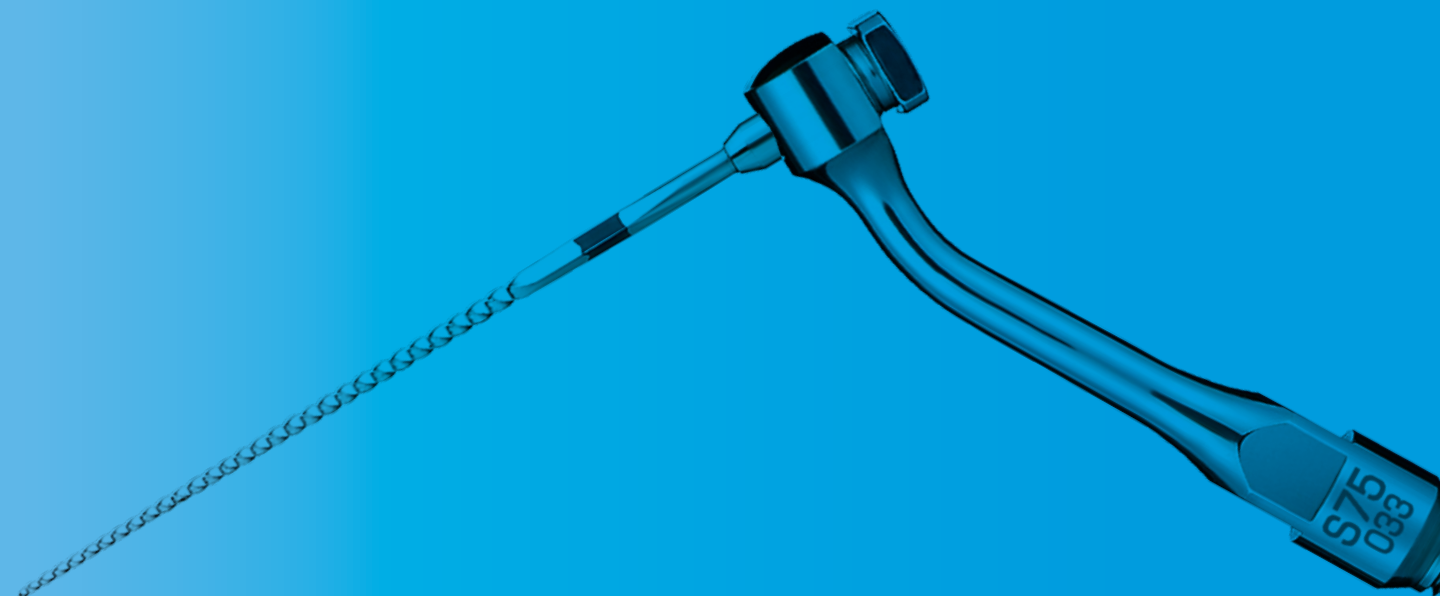


# V-TIP SYSTEM

## V-TIP SYSTEM

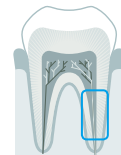

製品名 **S75**

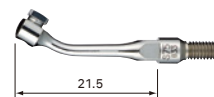


標準価格 **¥12,000**

製品番号 **Z252035**

• Vチップホルダー • 120° アングル • Eチップ用レンチ付属 ※先端チップ別売

## V-TIP SYSTEM (Endodontics) エンド用

製品名 **V-U15**

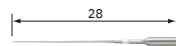

標準価格 **¥1,800**

製品番号 **Y900177**

• Vファイル23 mm #15 ISO15 • 根管洗浄用 • 6本入

製品名 **V-U35**




標準価格 **¥1,800**

製品番号 **Y900181**

• Vファイル23 mm #35 ISO35 • 根管洗浄用 • 6本入

製品名 **V-U20**

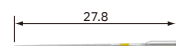


標準価格 **¥1,800**

製品番号 **Y900178**

• Vファイル23 mm #20 ISO20 • 根管洗浄用 • 6本入

製品名 **V-N50**

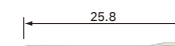


標準価格 **¥3,400**

製品番号 **Y900182**

• ニッケルチタン • 根管洗浄用26 mm • 3本入

製品名 **V-U25**

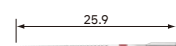


標準価格 **¥1,800**

製品番号 **Y900179**

• Vファイル21 mm #25 ISO25 • 根管洗浄用 • 6本入

製品名 **V-N51**

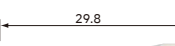


標準価格 **¥3,400**

製品番号 **Y900183**

• ニッケルチタン • 根管洗浄用30 mm • 3本入

製品名 **V-U30**

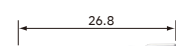

標準価格 **¥1,800**

製品番号 **Y900180**

• Vファイル22 mm #30 ISO30 • 根管洗浄用 • 6本入



# V-TIP SYSTEM (Restorative) 初期う蝕除去用

製品名 **V-G70**

標準価格 **¥3,700** 製品番号 **Y900118**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入

製品名 **V-G71**

標準価格 **¥3,700** 製品番号 **Y900119**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入

製品名 **V-G72**

標準価格 **¥3,700** 製品番号 **Y900120**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入



歯頭部う蝕除去

製品名 **V-G75**

標準価格 **¥3,700** 製品番号 **Y900121**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入

製品名 **V-G76**


標準価格 **¥3,700** 製品番号 **Y900122**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入



根面う蝕除去

# V-TIP SYSTEM (Restorative) 形態修正・研磨用

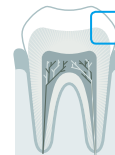

製品名 **V-G77** レギュラー

標準価格 **¥4,300** 製品番号 **Y900165**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入

製品名 **V-G78** ファイン

標準価格 **¥4,300** 製品番号 **Y900166**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入

製品名 **V-G79** スーパーファイン

標準価格 **¥4,300** 製品番号 **Y900167**

• ダイヤモンドコーティング • 3本入



う窩の開拡

