


エンドメイト TC2対応 コントラアングルヘッド



- 20 : 1 製品名 MP-F20R 製品番号 Y110044 標準価格 ¥33,500
- 16 : 1 製品名 MP-F16R 製品番号 Y110096 標準価格 ¥33,500
- 4 : 1 製品名 MP-F4R 製品番号 Y110047 標準価格 ¥30,500

• ミニヘッド • Ni-Tiファイル用(φ2.35) • プッシュボタン式チャック

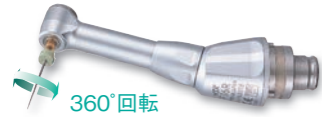

- 20 : 1 製品名 MPA-F20R 製品番号 Y110045 標準価格 ¥43,500
- 16 : 1 製品名 MPA-F16R 製品番号 Y110097 標準価格 ¥43,500
- 4 : 1 製品名 MPA-F4R 製品番号 Y110051 標準価格 ¥40,500

• 根管長測定器接続用(ロングシャンク用) • ミニヘッド
• Ni-Tiファイル用(φ2.35) • プッシュボタン式チャック



- 20 : 1 製品名 MPAS-F20R 製品番号 Y110046 標準価格 ¥43,500
- 16 : 1 製品名 MPAS-F16R 製品番号 Y110098 標準価格 ¥43,500
- 4 : 1 製品名 MPAS-F4R 製品番号 Y110052 標準価格 ¥40,500

• 根管長測定器接続用(ショートシャンク用) • ミニヘッド
• Ni-Tiファイル用(φ2.35) • プッシュボタン式チャック

エンドメイト TC2 標準セット

製品名 エンドメイト TC2 標準セット 製品番号 Y1001444 標準価格 ¥128,000
セット内容
• MP-F16R ヘッド • エンドメイト TC2 モーター • TC2用 充電器

エンドメイト TC2 サブセット(ヘッド無し)

製品名 エンドメイト TC2 サブセット 製品番号 Y1001445 標準価格 ¥94,500
セット内容
• エンドメイト TC2 モーター • TC2用 充電器

販売名: エンドメイト TC2 一般名: 歯科用電動式ハンドピース
認証番号: 222ALBZX00018000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

仕様

回転速度: 2,000 - 9,000 min⁻¹
充電時間: 1.5 時間
連続使用時間: 1.2 時間


電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。




根管長測定器接続用 ヘッド

MPA / MPASは根管長測定器に接続してご使用いただくためのエンドメイト TC2用ヘッドです。エンドメイト TC2と根管長測定器との併用により、治療の安全性を高めます。

- 選べる2つのヘッド
Ni-Tiファイルのシャンク長に応じて、2種類のヘッドから選択できます。

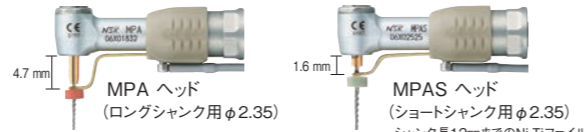

- 接続・解除の方法 (写真はMPAヘッド)

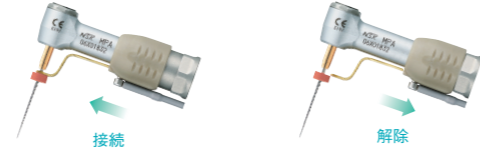

K3は、Sybron Dental Specialities Inc.の登録商標です。
エンドウェーブは、J.MORITA CORPORATIONの登録商標です。

上記のコントラアングルヘッド以外にも、別売りのヘッドとシャンクの組み合わせにより、ご使用のファイルにあわせた回転速度に対応できます。詳しくは、お取引の販売店にお尋ねください。



製品名 エンドメイト TC2 モーター 製品番号 E346 標準価格 ¥68,500

- 回転速度: 2,000~9,000 min⁻¹
- トルクコントロール機能 • オートリバース機能

製品名 TC2用 充電器 製品番号 Y1001446 標準価格 ¥26,000

- 電源: AC 100V 50/60 Hz




製品名 単4ニッケル水素電池セット 製品番号 Y900103 標準価格 ¥950

- 2本入り
※充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。



※写真はイメージです。

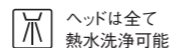

ヘッドは全て
熱水洗浄可能



ヘッドは全て135℃までの温度で
オートクレープ可能



CREATE IT.



エンドメイト TC2
ENDO-MATE TC2
エンド治療はもっと進化する

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向100
TEL: 0289(64)3380
FAX: 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03(5828)4180
FAX: 03(5828)0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪府北区菅根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F
TEL: 06(6315)7217
FAX: 06(6315)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日を除く)
9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

ENDO-MATE TC2

エンドメイトTC2は、ナカニシのマイクロモーター技術とマイコン技術を駆使し、

エンド治療におけるドクターのニーズに幅広く応えるために開発されました。

新たに追加したアラーム&オートリバース機能は、ファイル破折のリスクを大幅に軽減。

プログラム機能は、回転速度やトルク等の設定値を5パターンまでメモリー可能。


ドクターのニーズを具現化したエンドメイトTC2は、安全性と治療効率の両立を実現します。

安全性を追求した充実の機能

- アラームとオートリバース機能の組み合わせで安全な治療を実現します。
- 負荷が変化しても回転速度を一定に保つフィードバック回路を採用しました。
- 無負荷の状態が10分間続くと、誤作動防止のためのオートパワーオフ機能が作動します。

ファイル破折のリスクを大幅に軽減する充実のアラーム機能

設定したトルク値に対して、段階的に2種類のアラーム音で負荷の状況を的確に伝えます。ファイルに対する負荷の状況が手に取るようにわかるため、ファイル破折のリスクを大幅に減らし、治療の安全性を高めます。

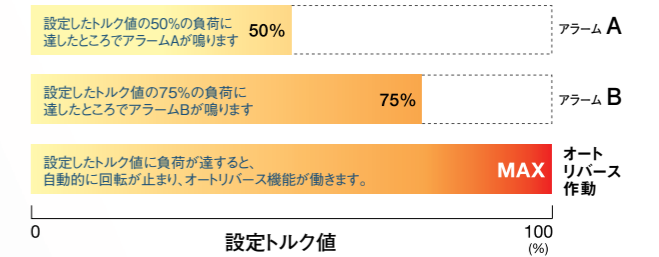


直感的でスピーディーな操作を実現したコントロールパネル

- 大きくフラットなON/OFFキーは操作性を向上させ、押し方によって2種類の回転操作が可能です。
- LCDパネルを採用することで、治療に必要な情報をわかり易く表示します。


- Ⓢ セレクトキー
回転速度、トルク、ギア比の設定
- Ⓟ プログラムキー
回転速度、トルク、ギア比、オートリバースモードをメモリー設定
- ⬆️ アップ/ダウンキー
設定値の調整
- Ⓜ️ パワーキー

広がる視野

- ミニヘッドとスリムなネックのコントラアングルを採用することで、広い視野を確保できます。

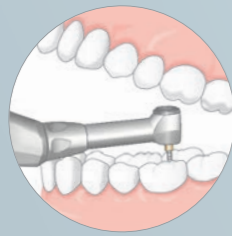

▲ 口腔内イメージ

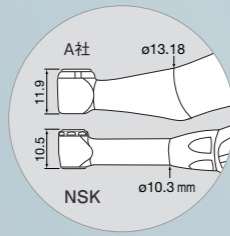


▲ サイズ比較

治療効率の向上

- 新たに追加したプログラム機能は、選択された回転速度、トルク、ギア比、オートリバースモードの組み合わせを5パターンまでメモリーすることが可能です。
- クイックジョイント式コントラアングルの採用でヘッドの交換が簡単にできます。
- 1.5時間の急速充電が可能です。

▼ プログラム設定パネル

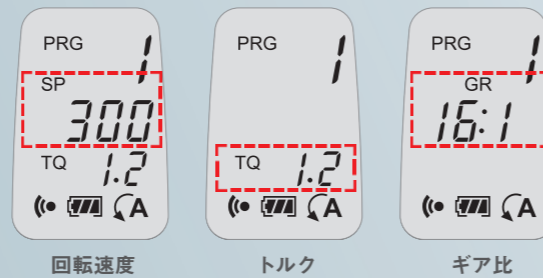

主要メーカーのNi-Tiファイルが使用可能

ヘッドとの組み合わせで広範囲な回転域とトルクをカバー

ギア比	トルク (Ncm)	回転速度 (min ⁻¹)
4 : 1	0.1~0.7	500~2,250
10 : 1	0.2~2.2	200~900
16 : 1	0.3~3.0	140~550
20 : 1	0.4~4.0	100~450

快適な操作感

- 人間工学に基づいたデザインと軽量コンパクト設計&コードレスで快適な操作感を実現しました。
- 6ポジション式ヘッドにより治療部位に応じてコントラアングルのヘッドの向きを変えられます。

先進の急速充電器

- 非接触給電技術を採用した先進の急速充電器は、電極部の腐食や錆などによる充電トラブルを防ぎます。

