

easy & effective



※パナスプレープラスは付属していません。

ハンドピースの日常のメンテナンスをより簡単、確実、効果的に。



缶を持たずにグリップからスプレー

直接缶を持つことなく、グリップを持ってワンタッチでスプレーできるため、日常のメンテナンスが楽になります。

グリップはハンドピースとワンタッチ着脱

グリップはフック式固定機構で安全かつ確実に、しかもワンタッチでハンドピースと接続できます。(適応規格 ISO3964のハンドピース対象)

ワンタッチで優れたスプレー効果

パナスプレープラスのスプレー効果をアップし、ボールベアリングへの優れた潤滑性・洗浄性でハンドピースを長持ちさせます。

使用出来る状態で保管・持ち運びが可能


缶ホルダーは固定式ではないので、使用できる状態で自由に持ち運ぶことができ、スペースをとらずにどこにでも置いておけます。

ノズルを3本まで保管

缶ホルダーにはノズルをセットしておけるので、ノズルの紛失やしまい忘れが解消され、いつでもすぐに使用できます。PAノズルが標準付属。

シンプルなデザイン

安定感があり、パナスプレープラスとカラーコーディネートされたシンプルで機能的なデザインです。

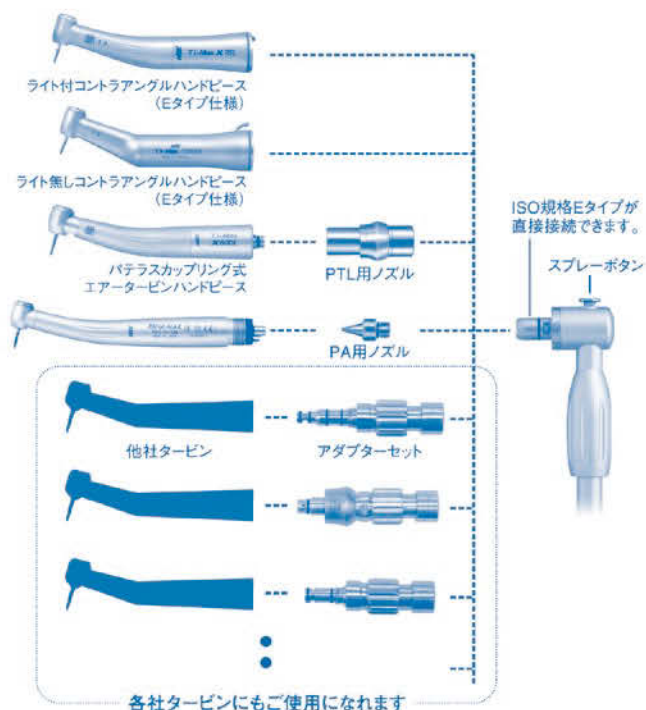

EZ SPRAY 標準セット



製品名	製品番号	標準価格
EZスプレー標準セット	Y900070	¥24,000


セット内容

- EZスプレーグリップ
- コイルチューブ
- グリップホルダー
- 缶ホルダー
- 切替バルブ
- PA用ノズル
- スプレーミスト吸収パック (1パック)

注意

「EZスプレー」はナカニシの「パナスプレープラス」専用です。それ以外のスプレー缶を装着すると、オイル漏れやオイルが噴霧されることがあります。パナスプレープラスは付属していません。

各社タービン装着用アダプターセット (各社用アダプター+EZ-M4アダプター)

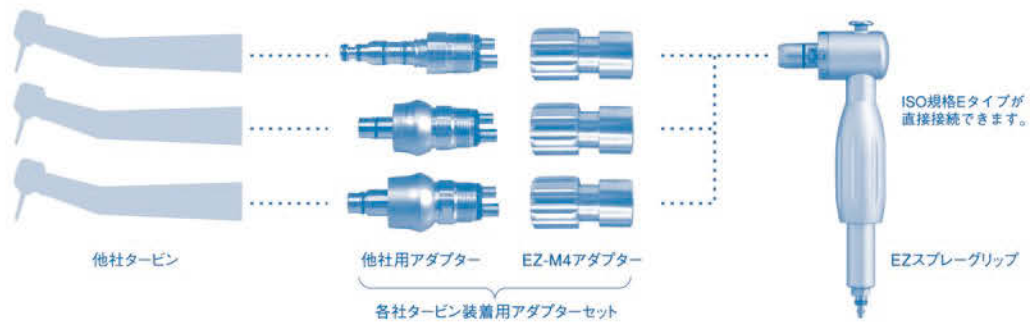

製品名	製品番号	標準価格
EZ-KVアダプターセット KaVo®用	Y150007	¥15,000
EZ-WHアダプターセット W&H®用	Y150008	¥15,000
EZ-BAアダプターセット BienAir®用	Y150009	¥15,000
EZ-SRアダプターセット Sirona®用	Y150010	¥15,000

製品名	製品番号	標準価格
EZ-MTアダプターセット モリタ用	Y150011	¥15,000
EZ-YSアダプターセット ヨシダ用	Y150012	¥15,000
EZ-YS2アダプターセット ヨシダ用ライト無し	Y150015	¥15,000

※各社タービン装着用アダプターは、タービンの種類によっては装着できないものもあります。
 ※KaVo® (カボ) とMULTIFLEX® LUX (マルチフレックス) は, Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. の登録商標です。
 ※W&H® は, W&H Dentalwerk Burmoos GmbH の登録商標です。
 ※BienAir® (ビエンエア) とUnitix® (ユニフィックス) は, BienAir Dental S.A. の登録商標です。
 ※Sirona® (シロナ) は, Sirona dental Systems GmbH の登録商標です。

製品名	製品番号	標準価格
EZ-OSアダプターセット オサダ用	Y150013	¥15,000
EZ-OS2アダプターセット オサダ用ライト無し	Y150017	¥15,000
EZ-OS3アダプターセット オサダ用ライト付	Y150018	¥15,000
EZ-OS4アダプターセット オサダ用ライト付 / 排気回収タイプ	Y150019	¥15,000

スペアパーツ

製品名	製品番号	標準価格
EZスプレーグリップ	Z229011	¥14,000
コイルチューブ	Z229135	¥1,500
グリップホルダー	Z229201	¥800
缶ホルダー	Z229020	¥3,800
切替バルブ	Z229017	¥3,800
PTL用ノズル	Z229035	¥4,700
PA用ノズル	Z229030	¥1,600

EZ SPRAY 関連製品

パナスプレープラス

アルコール含有の特殊な潤滑油が、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性を高め、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。



スプレーミスト 吸収パック

手を汚さず、飛散を防ぐ。
 ハンドピースのヘッド部を吸着シートに差し込んで使用することで、オイルミストが周囲へ飛散するのを防ぐことができます。



スプレーミスト吸収パック (10パック入)
 Y900084 ¥4,700

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
 栃木県鹿沼市下日向700
 TEL : 0289 (64) 3380
 FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
 東京都台東区東上野 4-8-1
 TIXTOWER UENO 9F
 TEL : 03 (5828) 7716
 FAX : 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
 大阪市淀川区宮原4-1-45
 新大阪八千代ビル6F
 TEL : 06 (6350) 7217
 FAX : 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシニ コール
 受付時間 (土日祝日を除く)
 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**
 NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。