

コントラアングルハンドピース ラインナップ(別売)

販売名: ティーマックス XC 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
 認証番号: 219ALBZX00013000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

一般切削用[5倍増速]

ライト付 製品名 X95L 製品番号 C600 標準価格 ¥136,000

- チタン製ボディー& DURACOAT ・4点注水スプレー
- ガラスロッドライト ・FG パー用(1.6) ・Max. 200,000min⁻¹

ライト付 製品名 X85L 製品番号 C604 標準価格 ¥141,000

- チタン製ボディー& DURACOAT ・ミニヘッド
- シングルスプレー ・ガラスロッドライト ・FG パー用(1.6)
- Max. 200,000min⁻¹

一般切削用[等速]

ライト付 製品名 X25L 製品番号 C601 標準価格 ¥105,000

- チタン製ボディー& DURACOAT ・シングルスプレー
- ガラスロッドライト ・コントラ パー用(2.35) ・Max. 40,000min⁻¹

一般切削用[減速]

ライト付 製品名 X15L 製品番号 C602 標準価格 ¥118,000

- チタン製ボディー& DURACOAT ・シングルスプレー
- ガラスロッドライト ・コントラ パー用(2.35) ・減速4 : 1
- Max. 10,000min⁻¹

PMTC用

ライト付 製品名 X57L 製品番号 C609 標準価格 ¥101,000

- チタン製ボディー& DURACOAT ・プロフィー用
- スクリュー式 ・360 回転 ・減速 16:1 ・Max. 2,500min⁻¹

ライト無し 製品名 FX57 製品番号 C1054002 標準価格 ¥52,000

- スクリュー式 ・360 回転 ・減速 4:1 ・Max. 5,000min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース FXシリーズ
 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
 認証番号: 222ALBZX00008000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ストレート

ライト付 製品名 X65L 製品番号 H273 標準価格 ¥105,000

- チタン製ボディー& DURACOAT ・シングルスプレー
- ガラスロッドライト ・Max. 40,000min⁻¹
- ハンドピース パー用(2.35) ・コントラ パー用(2.35)

販売名: ティーマックス XS 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
 認証番号: 219ALBZX00014000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ビバメイトG5 スペーパーパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
VMG30EM ビバメイトG5 モーター&コード		E1069	¥76,000
FC-76M フットコントロール 標準セットには含まれておりません	 (オプション)	Z1082002	¥8,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
ACアダプター ビバメイトG5用		U1115	¥13,000
バッテリーパック ビバメイトG5用		U1068051	¥13,500

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
 栃木県鹿沼市下日向700
 TEL : 0289 (64) 3380
 FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
 東京都台東区東上野 4-8-1
 TIXTOWER UENO 9F
 TEL : 03 (5828) 7716
 FAX : 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
 大阪市淀川区宮原4-1-45
 新大阪八千代ビル6F
 TEL : 06 (6350) 7217
 FAX : 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
 受付時間(土日祝日除く)
 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**
 NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも
 お気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D714 Ver.2 13.02.05.HG

NSK



ビバメイトG5 VIVA MATE G5 往診治療を次のステージへ



往診用携帯型マイクロモーターユニット - ビバメイトG5

VIVA MATE G5 LED

デンチャー調整から本格治療へ 携帯型LEDマイクロモーター

ビバメイトG5は往診用携帯型マイクロモーターのパイオニア「ビバメイト」シリーズの最新版として、往診治療に対するドクターのニーズに応える様々な機能を搭載。

内部注水式LEDマイクロモーターにより、往診先でも注水・排唾システムの「ビバサポート」と併用することで、歯牙の切削・う蝕の除去が確実、簡単に行うことが可能です。

また、新たに設計された斬新なデザインのコントロールユニットは、AC&バッテリーの2-way電源方式を採用することで高い携帯性と操作性を提供します。

内部注水式LEDマイクロモーター

往診専用開発された小型マイクロモーターは148g(コード含む)の軽量ボディに内部注水機能とLEDライトを内蔵。携帯性を維持しながら機能を充実させることで幅広い治療に対応します。また、普段お使用のライト付コントラングルやストレートハンドピースがそのまま接続*できることから、往診治療のために別途用意する必要がありません。 *ISO3964準拠品




バッテリー駆動と通常電源駆動が可能なコンパクトなコントロールユニット

電源の全く無い場所でも、バッテリー駆動でどこでも使用できます。充電不足の時は、電源が近くで取れば、バッテリーに関係せず、そのまま通常電源により使用できるので、安心して往診先へ持って行けます。サイズは、手のひらサイズ(W72 x D180 x H36mm)のコントロールユニットで、しかも重量はわずか370g。簡単に持ち運べます。

フットコントロール(オプション)

踏み込む深さに応じて回転数のコントロールが可能なフットコントロールは、本体のコントロールパネルの操作に気を取られず、治療に集中できる環境を提供します。

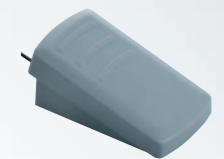

往診に便利なキャリングケース

「ビバメイトG5」本体とその付属品がきれいに収まる専用キャリングケースが付属。



シンプルで直感的な操作を可能にしたコントロールパネル

回転数設定、電源状況やバッテリー残量等の必要な情報をわかりやすく表示し、直感的な操作が可能なコントロールパネルは機器操作に関わるストレスを大きく軽減します。



ビバメイトG5 標準セット LED

製品名 VIVA MATE G5 製品番号 Y1001344 標準価格 ¥145,000

- ・コントロールユニット ・AC アダプター ・ハンドピーススタンド
- ・モーター(モーターコード付) ・キャリングケース フットコントロール(別売品)

仕様

[コントロールユニット]

寸法: W72 x D180 x H36 mm
重量: 370 g

バッテリー充電時間: 約2時間*

バッテリー連続駆動時間: 約1時間*(定格負荷)

*バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。

[マイクロモーター]

寸法: 22 x L68.6 mm

重量: 148 g(モーターコード含む)

回転速度: 3,000 ~ 30,000 min⁻¹

トルク: 3 Ncm(30,000 min⁻¹回転時)



販売名: ビバメイト G5 一般名称: 歯科用電気回転駆動装置
認証番号: 223ALBZX00022000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器