

関連製品

往診用携帯型マイクロモーターユニット

## VIVA MATE G5

内部注水式LEDマイクロモーターを搭載した「ビバメイトG5」は、往診先でも歯牙の切削・う蝕除去等の本格的な治療が可能です。



### ビバメイトG5 標準セット

製品名 VIVA MATE G5  
製品番号 Y1001344  
標準価格 ¥145,000

販売名: ビバメイト G5 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置  
認証番号: 223ALBZX00022000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

超音波スケーラー

## Varios 370



### バリオス 370 標準セット

製品名 VA370 Lux 製品番号 Y1001429 標準価格 ¥188,000

販売名: バリオス 370 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器  
認証番号: 223ALBZX00037000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

## ハンドピース ラインナップ

販売名: ティーマックス XC 認証番号: 219ALBZX00013000号  
販売名: ティーマックス XS 認証番号: 219ALBZX00014000号

販売名: コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号: 222ALBZX0008000号  
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

切削用  
[増速1:5]

ライト付

製品名 X95L  
製品番号 C600  
標準価格 ¥136,000



切削用  
[等速1:1]

ライト付

製品名 X25L  
製品番号 C601  
標準価格 ¥105,000



PMTC用

ライト付

製品名 X57L  
製品番号 C609  
標準価格 ¥101,000



PMTC用

ライト無し

製品名 FX57  
製品番号 C1054002  
標準価格 ¥52,000



ストレート

ライト付

製品名 X65L  
製品番号 H273  
標準価格 ¥105,000



## スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
FC-76M フットコントロール	 (オプション)	Z1082002	¥8,500
VS分岐チューブセット バリオス 370用	 (オプション)	Z1125090	¥1,000
バッテリーパック		U1068052	¥13,500
中継コード		U1089600	¥2,000
ディスプレイ排唾管 10本セット		Z1137053	¥1,000
VS排唾チューブ 排唾ジョイント付		Z1137050	¥2,500
排唾チューブ 半透明チューブのみ(標準セット品)		Z1137560	¥1,000
排唾ドレインチューブ		Z1137401	¥300
VS排唾ボトル 接続チューブ		Z1137051	¥3,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
VS排唾ボトル400セット		Z1137001	¥8,000
VS注水ボトル400セット		Z1125001	¥5,500
VS注水ポンプ 注水ジョイント付		U1089010	¥5,500
VS注水チューブ		Z1125050	¥1,500
チューブクランプセット 6個セット		U1089058	¥500
ACアダプタ 防水シートゴム付		U1115002	¥13,000
ACコード		40012020	¥1,500
VSキャリングケース		U1089054	¥5,000
VSTレイ		U1089111	¥3,000

上記以外にパーツ単品も販売いたします。詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666  
栃木県鹿沼市下日向700  
TEL: 0289(64)3380  
FAX: 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015  
東京都台東区東上野 4-8-1  
TIXTOWER UENO 9F  
TEL: 03(5828)7716  
FAX: 03(5828)0064

大阪事務所 〒532-0003  
大阪市淀川区宮原4-1-45  
新大阪八千代ビル6F  
TEL: 06(6350)7217  
FAX: 06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール  
受付時間(土日祝日を除く)  
9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**  
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D752 Ver.2 15.02.03.HG



CREATE IT.




歯科往診用注水・排唾システム — ビバサポート2  
**VIVA support 2**

# VIVAsupport2

## 往診に求められる機能をコンパクトにパッケージ

ビバサポート2は往診治療に求められる「携帯性」と「フレキシビリティ」を追求した新しいコンセプトの注水・排唾システム。往診治療に必要な機能を軽量コンパクトなコントロールユニットに集約し、軽量で耐久性の高い専用キャリングケースに収納。更にAC&バッテリーの2-way電源方式を採用することで、携帯性に優れたパッケージと使用環境を選ばないフレキシビリティで効率的な治療を実現します。往診用携帯型マイクロモーター「ビバメイトG5」と組み合わせれば、歯牙の切削やう蝕除去などの本格的な治療が可能。また、超小型超音波スケーラー「パリオス370」との組み合わせにより、往診治療をメンテナンス領域まで拡大。デンチャー調整から本格治療まで。まさに次世代の往診治療システムがここに完成しました。

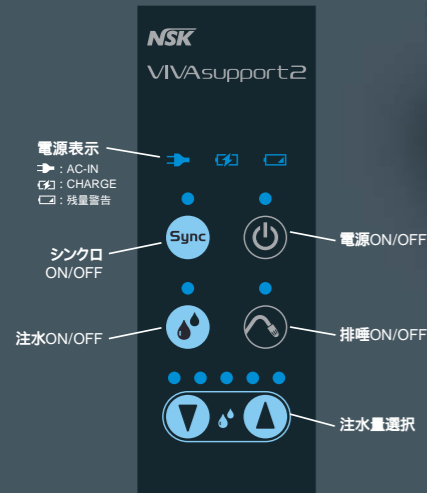

### 使用環境を選ばない 2-way( AC & バッテリー )電源方式を採用


ビバサポート2はAC電源とコントロールユニット内蔵バッテリー(充電式)の2-way電源方式を採用。高性能リチウムイオンバッテリーを搭載することで、バッテリーのみで約2時間の連続使用\*が可能です。同じ電源方式を採用した往診用携帯型マイクロモーターユニット「ビバメイトG5」と組み合わせれば、電源の取れない環境でも治療できます。

\*フル充電時。動作時間は使用状況や環境によって変化します。

ビバメイトG5との連結  
(ビバメイトG5は別売)

## 注水連動機能(シンクロモード)

内部注水式LEDマイクロモーターを搭載した『ビバメイトG5』や超小型超音波スケーラー『パリオス370』と接続し、フットコントロール(オプション)を使用することで、モーターやスケーラーの動作に合わせて注水機能が連動(On/Off)します。注水量はパネルの注水量選択キーを操作することで5段階に調整できます。

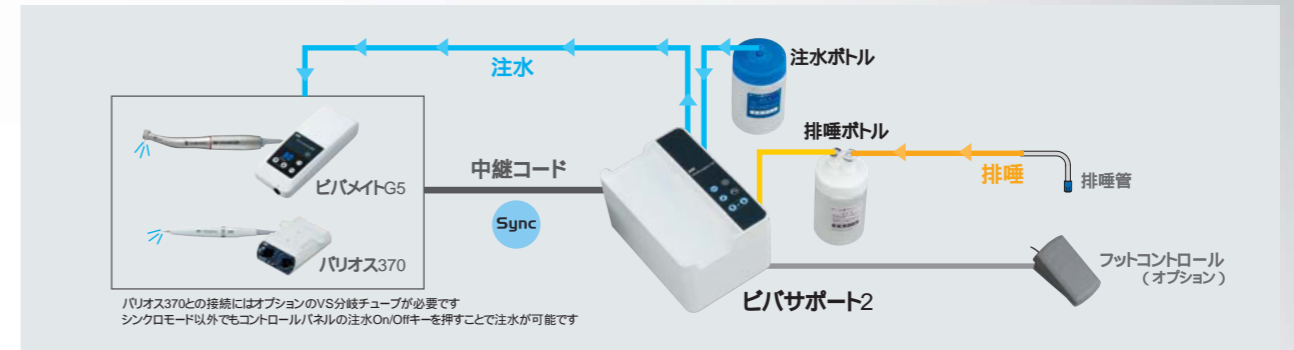

## 携帯性に優れた機動力の高いパッケージ

軽量かつ高い耐久性を誇る専用キャリングケースは、コントロールユニットや注水・排唾ボトル等のアクセサリだけでなく、各種周辺機器(ビバメイトG5等)を接続したままコンパクトに収納することが可能です。僅か3.5kg\*の軽量かつコンパクトなパッケージで、往診の移動にかかわる様々なストレスから開放します。



\*ビバサポート2標準セット重量

## 設置時間の大幅な短縮

往診治療の準備時間は最小限に。そんなドクターの要望に応えるため、ビバサポート2は専用キャリングケースを開ければ直ぐ診療に入れる環境を提供します。治療機器の設置準備やその接続のわずらわしさから解放され、より効率的な治療を実現します。



## 使い勝手を追求した専用トレイ

滅菌済みのハンドピースや切削用バー、ミラー等を安全に収納できる専用トレイは、治療時にキャリングケースから取り出すことで、ハンドピースや排唾チューブを衛生的かつ機能的に配置することが可能。往診先の環境にあわせてフレキシブルで安全な治療環境を実現します。



## 大容量の注水・排唾ボトル

各々350mLの注水・排唾ボトルは、1回の補給で長時間の診療が可能です。各チューブもワンタッチで着脱可能。メンテナンス性も考えた専用ボトルは往診現場のニーズに応えます。



販売名: ビバサポート2 一般名: 可搬式歯科用ユニット  
認証番号: 224ALBZX00017000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

## ビバサポート2 標準セット

製品名: ビバサポート2 製品番号: Y1001826 標準価格: ¥125,000

### セット内容

●ビバサポート2ユニット ●ACアダプタ ●ACコード

### 付属品

●VS注水ボトル400セット ●VS排唾ボトル400セット ●中継コード ●VS注水チューブ ●VS排唾チューブ  
●排唾チューブ ●VS注水ポンプ ●ディスプレイ排唾管(10本セット) ●チューブクランプ(6個)  
●VS排唾ボトル接続チューブ ●排唾ドレンチューブ ●VSキャリングケース ●VSTレイ

### 仕様

- 電源: AC100V 50/60Hz
- バッテリー充電時間: 約2時間\*
- バッテリー連続駆動時間: 約2時間\*
- タンク容量: 350mL(注水用・排唾用とも)
- ポンプ吸引力: 300mL/min
- 寸法: W147 × D188 × H98mm (ビバサポート2ユニット)  
W460 × D265 × H233mm (VSキャリングケース)
- 重量: 3.5kg(ビバサポート2標準セット)

\*バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。