

NSK

CREATE IT.

歯科衛生士さんのストレスには、コードレスを。



iProphy

CORDLESS POLISHING CONTRA

iProphy SET

iProphy 標準セット

製品名 : iProphy 標準セット
製品番号 : Y1002819
標準価格 : ¥93,000

- iProphyモータハンドピース ● iFX57ヘッド
- iProphyスタンド ● ACアダプタ

iProphy サブセット(ヘッドなし)

製品名 : iProphy サブセット
製品番号 : Y1003438
標準価格 : ¥68,500

- iProphyモータハンドピース ● iProphyスタンド ● ACアダプタ



充電式リチウムイオンバッテリー

より長く使えるパワフルなりチウムイオンバッテリーを採用。
90分の充電で、約60分の連続使用が可能です。

製品名 : バッテリーパック
製品番号 : E1080052
標準価格 : ¥4,500



- ※ バッテリーは専用のもをご使用ください。
- ※ 電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

販売名: アイプロフィー 一般的名称: 歯科用電動式ハンドピース 認証番号: 226ABBZX00034000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

iProphy HEAD LINEUP



製品名 : iFX57
製品番号 : C1102
標準価格 : ¥24,500

- プロフィー用 ● スクリュー式
- 減速4:1



製品名 : EVA-F
製品番号 : Y110016
標準価格 : ¥23,000

- 上下運動ヘッド ● エバチップ用
- 等速1:1



製品名 : NAC-F4R
製品番号 : Y110020
標準価格 : ¥26,000

- プロフィー用 ● ラッチ式
- コントラバー用(φ2.35)
- 減速4:1



製品名 : PR-F
製品番号 : H209
標準価格 : ¥13,000

- ディスポーザブル プロフィーヘッド用
- 減速4:1

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289 (64) 3380
FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL : 03 (5828) 7716
FAX : 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL : 06 (6350) 7217
FAX : 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日を除く) ☎ **0120-7242-56**
9:00~17:00
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

PR-D952 Ver.2 15.07.05.TS



IT'S CORDLESS!

煩わしいコードをなくして、歯面研磨をもっと自由に、スムーズに。

歯科衛生士の方々の声を取り入れながら、歯面研磨をこれまで以上にスムーズに行えるよう開発された“iProphy”。コードレスならではの扱いやすさは、施術時の負担を大幅に軽減。治療現場に、一歩進んだ臨床を提供いたします。



軽くて持ちやすい

最新の人間工学によって設計・開発されたエルゴノミックデザイン。軽くて持ちやすく、バランスに優れたハンドピースは、比較的時間のかかる歯面研磨でも、手にかかる負担を軽減します。

超ミニヘッドで見やすい

細くて長い超ミニヘッドは、口腔内での広い視野を確保。よりスムーズで正確な治療を可能にします。

ヘッド交換がカンタン

クイックジョイント方式を採用することで、ヘッド交換がカンタンに。また、施術部位に応じて6ポジションに向きを変えられるので、操作性が大幅に向上します。


コードレスで自由に使える

コードがないので、施術時の姿勢や角度を制限されることがなく、施術のストレスを大幅に軽減。治療の場所も選びません。



操作パネルがシンプルで見やすい

直感的に扱える操作パネルで、快適な施術をサポート。ON/OFFキーも大きく、押しやすくなりました。

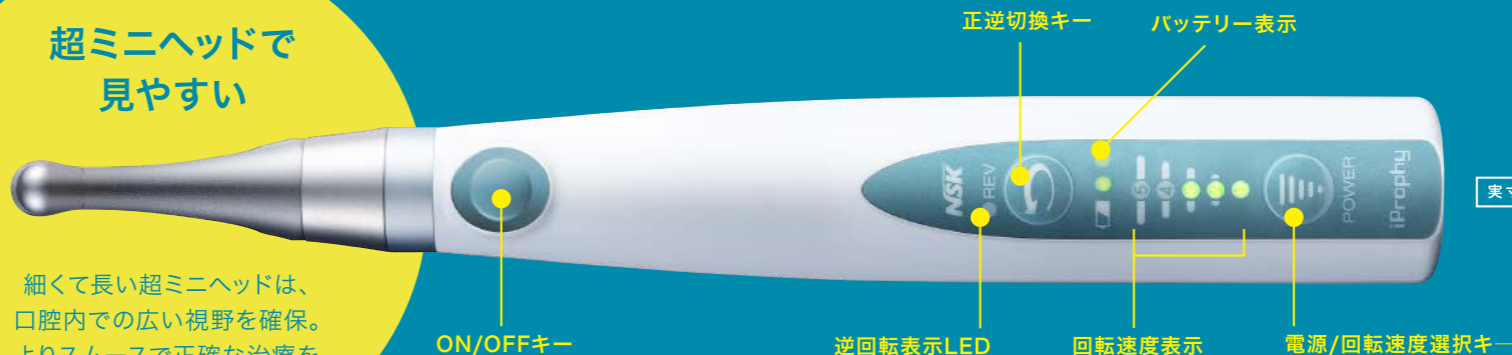

速度設定も幅広く

ヘッドを交換することで、500～10,000min⁻¹と広範囲の速度設定が可能。歯面研磨からトリートメントまで、施術の幅が広がります。

パワーコントロールがラクラク

パワー調整が手元ででき、フットでの微妙なパワーコントロールが不要。通常のコントラングルでは難しい低速回転の維持もラクに行えます。

