


インプラント用ハンドピース  
**Implant Handpieces** ISOタイプ

**SGM シリーズ** ラッチ式 超ミニヘッド

販売名: コントラングルハンドピース SGM-ER 一般的名称: 手術用ドリルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X00016000015号 一般医療機器

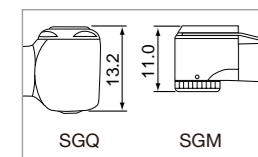

超ミニヘッド  
 (自社製SGQ型との比較)



- 減速 **16:1** 製品名 SGM-ER16i 製品番号 Y110126 標準価格 ¥99,000
- 減速 **20:1** 製品名 SGM-ER20i 製品番号 Y110127 標準価格 ¥101,000
- 減速 **32:1** 製品名 SGM-ER32i 製品番号 Y110128 標準価格 ¥102,000
- 減速 **64:1** 製品名 SGM-ER64i 製品番号 Y110129 標準価格 ¥105,000
- 減速 **256:1** 製品名 SGM-ER256i 製品番号 Y110130 標準価格 ¥115,000

• Max.: 2,500 min<sup>-1</sup> (16:1) 2,000 min<sup>-1</sup> (20:1) 1,250 min<sup>-1</sup> (32:1)  
 625 min<sup>-1</sup> (64:1) 156 min<sup>-1</sup> (256:1)

**SGMS-ER20i** ラッチ式 超ミニヘッド(ストッパー付)

販売名: サージカルハンドピース SGMS-ER 一般的名称: 手術用ドリルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X00016000018号 一般医療機器



着脱が簡単な調整幅8mmと12mmの  
 2種類のストッパー付。



- 減速 **20:1** 製品名 SGMS-ER20i 製品番号 Y110147 標準価格 ¥111,000
- Max. 2,000 min<sup>-1</sup>

**SGQ-ER20h** プッシュボタン式

販売名: サージカルハンドピース SGQ-ER20h 一般的名称: 手術用ドリルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X00016000017号 一般医療機器



- 減速 **20:1** 製品名 SGQ-ER20h 製品番号 Y110132 標準価格 ¥101,000
- Max. 2,000 min<sup>-1</sup>

センター注水ノズル・二分岐注水チューブ・ノズルクランプ付

上記はヘッド(バー)が示す速度を表わしています。



スパーパーツ / インプラント用ハンドピース SGM / SGMS / SQQシリーズ

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
SGM-I ラッチ式 超ミニヘッド		C293	¥35,000	ER256i 256:1 減速 ハンドピース		C632	¥80,000	レンチ SGM / SGMS用		Z103101	¥1,000
SGMS-I ラッチ式 超ミニヘッド (ストッパー付)		C594	¥45,000	ER20h 20:1 減速 ハンドピース SGQ-H用		C596	¥66,000	レンチ SGQ用		Z103118	¥1,000
SGQ-H プッシュボタン式 ER20h用		C638	¥35,000	センター 注水ノズル SGM / SGMS 用		C293025	¥4,000	ルーラー SGMS用		Z217399-01	¥1,000
ER16i 16:1 減速 ハンドピース		C628	¥64,000	センター 注水ノズル SGQ用		C823026	¥2,200	ストッパー(L) SGMS用 12mm		C594031	¥5,000
ER20i 20:1 減速 ハンドピース		C629	¥66,000	センター注水 ノズルクランプ SGQ用		C823751	¥2,200	ストッパー(S) SGMS用 8mm		C594021	¥5,000
ER32i 32:1 減速 ハンドピース		C630	¥67,000	チューブ クランプ		C202750	¥1,100				
ER64i 64:1 減速 ハンドピース		C631	¥70,000	二分岐注水 チューブ		C823752	¥2,600				

マイクロソーハンドピース

注水ノズル SGR, SGT SGO用		SH162035	¥3,200
---------------------------	--	----------	--------

8x5スパナ		K040751	¥500
--------	--	---------	------

マイクロサージェリーハンドピース

注水ノズル SGS, SGA用		H263018	¥3,200
--------------------	--	---------	--------

マイクロソーハンドピース用 ブレード

**SGR-E レシプロ用 ブレード**

販売名: SGR-E用ソーブレード 一般的名称: のこギリ  
 届出番号: 09B2X00016000102号 一般医療機器

	製品名 SGR-1 製品番号 Y900072 標準価格 ¥16,000
	• 刃厚 0.35 mm • 1ケース10枚入

	製品名 SGR-2 製品番号 Y900073 標準価格 ¥17,000
	• 刃厚 0.35 mm • 1ケース10枚入

	製品名 SGR-3 製品番号 Y900074 標準価格 ¥18,000
	• 刃厚 0.35 mm • 1ケース10枚入

**SGT-E サジタル用 ブレード**

販売名: SGT-E用ソーブレード 一般的名称: のこギリ  
 届出番号: 09B2X00016000100号 一般医療機器

	製品名 SGT-1 製品番号 Y900075 標準価格 ¥16,000
	• 刃厚 0.35 mm • 1ケース10枚入

	製品名 SGT-2 製品番号 Y900076 標準価格 ¥17,000
	• 刃厚 0.35 mm • 1ケース10枚入

**SGO-E オシレート用 ブレード**

販売名: SGO-E用ソーブレード 一般的名称: のこギリ  
 届出番号: 09B2X00016000098号 一般医療機器

	製品名 SGO-1 製品番号 H174034 標準価格 ¥2,600
	• 刃厚 0.3 mm • 1枚入

	製品名 SGO-2 製品番号 H174044 標準価格 ¥2,600
	• 刃厚 0.3 mm • 1枚入

	製品名 SGO-3 製品番号 H174031 標準価格 ¥2,600
	• 刃厚 0.3 mm • 1枚入

	製品名 SGO-4 製品番号 H174041 標準価格 ¥2,600
	• 刃厚 0.3 mm • 1枚入

	製品名 SGO-5 製品番号 H174032 標準価格 ¥2,800
	• 刃厚 0.35 mm • 1枚入

	製品名 SGO-6 製品番号 H174042 標準価格 ¥2,800
	• 刃厚 0.35 mm • 1枚入

熱水洗浄可能 135°C 135°Cまでの温度でオートクレーブ可能

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666  
 栃木県鹿沼市下日向700  
 TEL: 0289(64)3380  
 FAX: 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015  
 東京都台東区東上野 4-8-1  
 TIXTOWER UENO 9F  
 TEL: 03(5828)7716  
 FAX: 03(5828)0064

大阪事務所 〒532-0003  
 大阪府淀川区宮原4-1-45  
 新大阪八千代ビル6F  
 TEL: 06(6350)7217  
 FAX: 06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール  
 受付時間(土日祝日を除く)  
 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**  
 NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも  
 お気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D389 Ver.3 11.04.02.A



口腔外科用ハンドピース 総合カタログ  
**SURGICAL HANDPIECES**



Powerful Partners®

# インプラント用ハンドピース Implant Handpieces ISOタイプ



## ダブル注水方式

バー内部と外部の2方向からの注水により、切削部を確実に冷却します。



口腔外科(インプラント)手術に要求される精度と安全性、操作性を追求して開発された超ミニサイズのヘッドにより、口腔内の視野の確保がよりスムーズになります。



SGM-ER20i  
ラッチ式  
超ミニヘッド

SGMS-ER20i  
ラッチ式  
超ミニヘッド  
(ストッパー付)

SGQ-ER20h  
プッシュボタン式

# マイクロソーハンドピース Micro Saw Handpieces ISOタイプ

## レシプロ



製品名 SGR2-E 製品番号 SH162 標準価格 ¥175,000  
 • 1.8 mm 前後動 • 外部注水ノズル付 • 減速 3:1  
 • Max( 往復回数 )12,600回 / 分  
 販売名: レシプロハンドピース SGR2-E 一般的名称: 手術用のご器  
 届出番号: 09B2X0016000020号 一般医療機器

## オシレート



製品名 SGO2-E 製品番号 SH164 標準価格 ¥225,000  
 • 17 左右動 • 外部注水ノズル付 • 減速 3:1  
 • Max( 左右動 )12,800回 / 分  
 販売名: オシレートハンドピース SGO2-E 一般的名称: 手術用のご器  
 届出番号: 09B2X0016000022号 一般医療機器

## サジタル



製品名 SGT2-E 製品番号 SH163 標準価格 ¥208,000  
 • 3 左右動 • 外部注水ノズル付 • 減速 3:1  
 • Max( 左右動 )12,600回 / 分  
 販売名: サジタルハンドピース SGT2-E 一般的名称: 手術用のご器  
 届出番号: 09B2X0016000021号 一般医療機器



135°C  
5分

各種ブレードは別売りです。

上記はヘッド(ブレード)が示す往復・左右動の回数を表わしています。

# マイクロサージェリーハンドピース Micro Surgery Handpieces ISOタイプ

## ストレートハンドピース



製品名 SGS-ES 製品番号 H264 標準価格 ¥91,000  
 • 等速 1:1 • サージカルバー用( 2.35 )  
 • リング式チャック • Max. 40,000 min<sup>-1</sup>  
 販売名: ストレートハンドピース SGS-E 一般的名称: 手術用ハンドピルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X0016000013号 一般医療機器



製品名 SGS-E2S 製品番号 H266 標準価格 ¥111,000  
 • 増速 1:2 • サージカルバー用( 2.35 )  
 • リング式チャック • Max. 80,000 min<sup>-1</sup>  
 販売名: ストレートハンドピース SGS-E2 一般的名称: 手術用ハンドピルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X0016000014号 一般医療機器

## 20 アングルハンドピース



製品名 SGA-ES 製品番号 H263 標準価格 ¥125,000  
 • 等速 1:1 • サージカルバー用( 2.35 )  
 • リング式チャック • Max. 40,000 min<sup>-1</sup>  
 販売名: アングルハンドピース SGA-E 一般的名称: 手術用ハンドピルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X0016000011号 一般医療機器



製品名 SGA-E2S 製品番号 H265 標準価格 ¥145,000  
 • 増速 1:2 • サージカルバー用( 2.35 )  
 • リング式チャック • Max. 80,000 min<sup>-1</sup>  
 販売名: アングルハンドピース SGA-E2 一般的名称: 手術用ハンドピルアタッチメント  
 届出番号: 09B2X0016000012号 一般医療機器



135°C  
5分

上記はヘッド(バー)が示す速度を表わしています。

## 下顎枝からの自家骨採取

Step 1 マイクロサージェリーハンドピース(20 アングル/ SGA-ES)を使用した骨採取部位の明示。




ボンサージェリー用バー\*を装着し、採取骨の外形を点で形成。この時、骨に熱傷を与えないように注意が必要。  
 \*ナカニシでは取り扱っておりません。

Step 2 マイクロソー レシプロ( SGR2-E )を使用した下顎枝前縁部の骨切り。



前後動を利用し骨溝を形成していく。ブレードが薄いので骨損失が非常に少ない。(刃厚 0.35mm)

Step 3 マイクロソー レシプロ( SGR2-E )を使用した下顎枝外側部の骨切り。

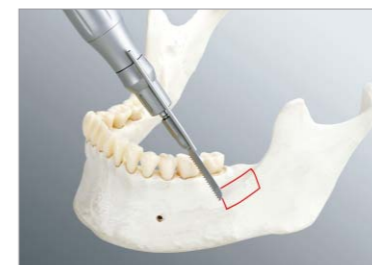

頬側部の深い位置まで容易に骨切りが可能。

Step 4 マイクロソー オシレート( SGO2-E )を使用した下顎枝外側下縁部の骨切り。



ブロックの底部を注意深く分離する。90 アングルなので頬粘膜を損傷することなく容易に分離することができる。

資料提供: 横浜口腔インプラントセンター・木津歯科 センター長  
 東京歯科大学 オラルメディスン・口腔外科学講座 臨床講師 木津康博 先生