

AIR TURBINES



Ti-Max Z800/Z900   S-Max M micro   S-Max M800/M900   S-Max pico   Ti-Max X450



クラス	Premium	Advanced	Advanced	Special	Special
ヘッド角度	94°	100°	90°	90°	45°
素材	チタン	ステンレス	ステンレス	ステンレス	チタン
DURAGRIP	●				
DURACOAT					●
セラミックボールベアリング	●	●	●	●	●
ガラスロッドライト	●	●	●	●	●
クリーンヘッドシステム	●	●	●	●	●
クイックストップ		●	●		
プッシュボタン式チャック	●	●	●	●	●
カートリッジ交換	●	●	●	●	
3X-Power System		●	●		
水フィルター	●				
注水	4点	4点	4点	1点	3点
製品保証	2年	1年	1年	1年	1年

# Ti-Max Z

Premium



## POWERFUL

エアタービンに、パワフルな進化を。

エアタービンTi-Max Zは、ハンドピースに必要なあらゆる要素をより高いレベルまで追求。つねに“期待を上回る製品を提供する”という哲学のもと、一切の妥協を許さないナカニシの製品設計と超精密加工技術によって次のステージへ。もっと使いやすく、もっとスピーディーに。そして、もっとスムーズな治療を。そんなすべてのドクターのニーズに応えるために、高性能エアタービンのベストバランスを求めて。ハイパワーを活かす新たな進化が、歯科医療の現場を変えていきます。



大きなパワーのための小さなパーツ、ナカニシはまずローターの形状にこだわりました。


## 3D形状ローター

専用のコンピューター解析ソフトを導入し、より高出力を得るためのローターを開発。既成概念にとらわれず、シミュレーションと試作を重ね、3次元曲線の新形状を生み出しました。従来製品エアタービンTi-Max Xに比べ、羽根の面積を約50%アップ。このローターによって、26 Wの高出力を実現しました。 ※Z900Lのみ



## 高出力による滑らかな切削感を実現

新形状ローターによる高出力で、従来のエアタービンに比べ滑らかな切削感を実現。術者にとっても、患者さまにとっても、より快適な治療を行うための新たな進化です。

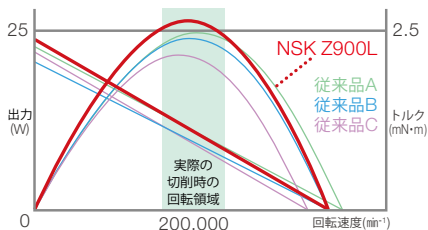

## DURABLE

ハイパワーならではの快適さを長時間キープする、優れた耐久性と安定性。


安定した高いパフォーマンスを維持するために、ナカニシ独自の先進技術投入。緻密な設計と精密な加工、パーツの材質や表面処理の工夫。さらに、当社従来品の約2倍の耐久性を誇る新開発ベアリングを採用しました。「安心の2年保証」は、その耐久性に対する自信の証です。

## エアタービンのベアリング耐久性が従来約2倍

過酷な使用状況の中でボールを保持する部品であるリテーナーの摩擦抵抗を減らすため、素材や形状を全面的に見直し、当社従来品の約2倍の耐久性を誇るベアリングを開発。熱水洗浄やオートクレーブの繰り返しにも対応できる耐久性を実現しました。


## 滑りにくく傷つきにくい表面処理技術“DURAGRIP”

純チタン製ボディの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するプラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により滑りにくく快適なグリップ感を確保します。

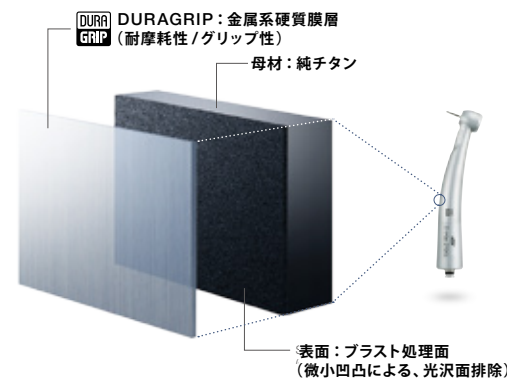

# Ti-Max Z Premium

## Z800/Z900

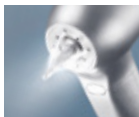

94°アングルヘッド  
チタン製ボディ & DURAGRIP  
セラミックボールベアリング  
グラスロッドライト  
クリーンヘッドシステム  
プッシュボタン式チャック  
カートリッジ交換可能  
水フィルター内蔵  
4点注水スプレー  
安心の2年保証



**ミニヘッド**  
パワー：23 W (Z800L)  
21 W (Z800L以外)  
回転速度：360,000-440,000 min<sup>-1</sup>  
ヘッドサイズ：φ10.8 × H 12.1 mm

**スタンダードヘッド**  
パワー：26 W (Z900L)  
24 W (Z900L以外)  
回転速度：320,000-400,000 min<sup>-1</sup>  
ヘッドサイズ：φ12.5 × H 13.1 mm

### NSK バテラスカップリング

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800L	P1110	¥131,500
スタンダード	●	Z900L	P1111	¥131,500

### モリタαメインチューブ

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800ML	P1122	¥131,500
スタンダード	●	Z900ML	P1123	¥131,500

### ヨシダクイックジョイント

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800YL	P1126	¥131,500
スタンダード	●	Z900YL	P1127	¥131,500

### オサダファインジョイント

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800FL	P1128	¥131,500
スタンダード	●	Z900FL	P1129	¥131,500

### KaVo® Multiflex®

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800KL	P1112	¥131,500
スタンダード	●	Z900KL	P1113	¥131,500

### Sirona® Quick coupling

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800SL	P1114	¥131,500
スタンダード	●	Z900SL	P1115	¥131,500

Ti-Max Z  
カートリッジ交換  
動画



エアータービン  
メンテナンス動画



# S-Max M

## M micro/M800/M900

Advanced



### MORE POWERFUL


最新の流体シミュレーションソフトウェアを駆使し、給排気をつかさどる「3X-Power System」を新開発。

これにより空気を効率よく出力に変換でき、20 Wから26 W<sup>\*</sup>への大幅なパワーアップを実現させました。

ハンドピースが術者のカラダの一部になったような操作感と、より繊細な施術を可能にする切削感。

洗練されたスリムなボディシェイプには、ハンドピースのエキスパートであるナカニシが長年培ってきたノウハウとテクノロジーが詰まっています。

<sup>\*</sup>M900L

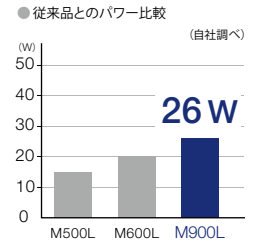

### 3X-Power System (トリプルエクスパワーシステム)



**Extended Cylindrical Nozzle**

突出円筒型ノズル

ノズル構造を最適化。整った空気の流れを生み出し、空気ロス低減。空気力を高効率で回転力に変換します。



**Expanded Rotor Bucket**

ローターバケットの拡大

空気を受ける面積が従来比100%UP (2倍)。広いバケット面で無駄なく空気を受けて高トルクを実現します。




**Expanded Exhaust Groove**

排気溝の拡大

拡大した排気溝で、バケットが受けた空気を速やかに排気。スムーズな排気により、低回転速度域のトルクが向上します。


### 選べるヘッドサイズと高トルクの切削

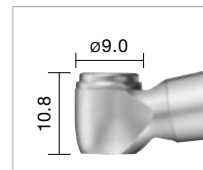

M micro  
ミニヘッド  
20 W



M800  
スタンダードヘッド  
23 W

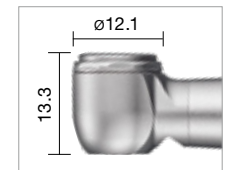

M900  
トルクヘッド  
26 W

## SAFETY &amp; INFECTION CONTROL

## クイックストップ機能

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能を搭載。口腔内での巻き込み防止などの安全性を向上。これにより、高速回転による効率的な切削と、クイックストップによる安全性の高い治療が可能です。

S-Max M900L  
クイックストップ & 切削  
動画



## ストッパー

エアの供給を停止すると、ストッパーのゴムが回転軸に接触してブレーキを掛けます。

## クリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、エアタービンへのサックバックを大幅に軽減します。



## 3ステップで簡単に交換可能なカートリッジ

交換手順はわずか3ステップ。修理に出す時間のロスを抑えます。



1 付属のヘッドキャップレンチをヘッドキャップに合わせ、反時計方向に回すと取り外せます。



2 バーを押し上げると、ヘッドからカートリッジが外れます。



3 新しいカートリッジを切り欠きに合わせ挿入。ヘッドキャップを付属のレンチで取り付ければ完成です。

M micro  
カートリッジ  
交換動画




M800/M900  
カートリッジ  
交換動画




## M micro USABILITY

## ミニヘッド+100°アングルヘッドによる高いアクセシビリティ

S-Max M microは、100°アングルヘッドで臼歯部へスムーズにアクセス。ミニヘッドのため、広い視野を確保することができます。口腔内の生理的なカーブ（スピーカーカーブやウィルソンカーブ）を考慮したデザインで、臼歯部へアクセスした際に、前歯に干渉するリスクが少なく、ストレスを低減した施術が可能です。

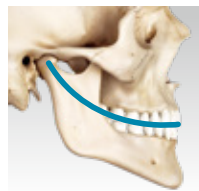


スピーカーカーブ

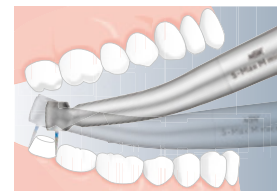

写真提供：ウエマツ歯科医院

## S-Max M800Lとの比較

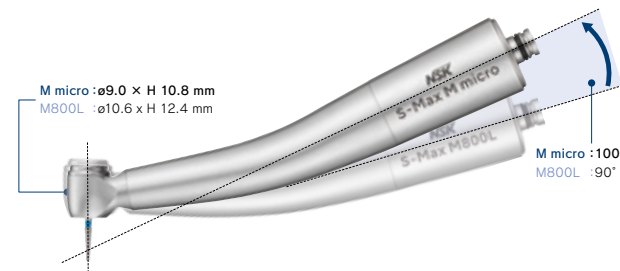


## S-Max M microの効果的な施術

## 上顎頰側部7番への使用（筋突起が近接した際のアクセス）

日常臨床での施術しにくい部位（開口時に生じる筋突起の近接）に対して、100°アングルが施術時の視界を妨げず、ミニヘッドがアクセスを容易にし、ストレスを低減した施術が可能です。



写真提供：ウエマツ歯科医院

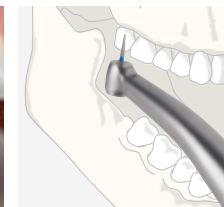

## 上顎前歯、支台歯形成時の使用

ヘッドの前面が隣に歯に干渉せずに施術が可能です。シリーズ最小ヘッドは様々な施術で効果を発揮します。



写真提供：モリカゲ歯科医院

## S-Max M Advanced

## M micro



100°アングルヘッド  
 ステンレス製ボディ  
 セラミックボールベアリング  
 グラスロッドライト  
 クリーンヘッドシステム  
 クイックストップ  
 プッシュボタン式チャック  
 カートリッジ交換可能  
 3X-Power System  
 4点注水スプレー



**ミニヘッド**  
 パワー：20 W  
 回転速度：380,000-450,000 min<sup>-1</sup>  
 350,000-450,000 min<sup>-1</sup> (M micro YL, M micro FL)  
 ヘッドサイズ：φ9.0 × H 10.8 mm  
 スタンダード / ショートシャンクバー専用

## M800/M900



90°アングルヘッド  
 ステンレス製ボディ  
 セラミックボールベアリング  
 グラスロッドライト  
 クリーンヘッドシステム  
 クイックストップ  
 プッシュボタン式チャック  
 カートリッジ交換可能  
 3X-Power System  
 4点注水スプレー



**スタンダードヘッド**  
 パワー：23 W  
 回転速度：380,000-450,000 min<sup>-1</sup>  
 350,000-450,000 min<sup>-1</sup> (M800YL, M800FL)  
 ヘッドサイズ：φ10.6 × H 12.4 mm  
 スタンダード / ショートシャンクバー専用

**トルクヘッド**  
 パワー：26 W  
 回転速度：325,000-430,000 min<sup>-1</sup>  
 300,000-410,000 min<sup>-1</sup> (M900YL, M900FL)  
 ヘッドサイズ：φ12.1 × H 13.3 mm  
 スタンダードシャンクバー専用

# S-Max M Advanced

## M micro / M800 / M900

NSK バテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro	PA2306	¥108,000
	スタンダード	●	M800L	P1253	¥108,000
	トルク	●	M900L	P1254	¥108,000
NSK マッハカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	—	M800	P1255	¥82,000
	トルク	—	M900	P1256	¥82,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro ML	PA2313	¥108,000
	スタンダード	●	M800ML	P1267	¥108,000
	トルク	●	M900ML	P1268	¥108,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro YL	PA2314	¥108,000
	スタンダード	●	M800YL	P1269	¥108,000
	トルク	●	M900YL	P1270	¥108,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro FL	PA2315	¥108,000
	スタンダード	●	M800FL	P1271	¥108,000
	トルク	●	M900FL	P1272	¥108,000

KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro KL	PA2309	¥108,000
	スタンダード	●	M800KL	P1257	¥108,000
	トルク	●	M900KL	P1258	¥108,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro SL	PA2310	¥108,000
	スタンダード	●	M800SL	P1261	¥108,000
	トルク	●	M900SL	P1262	¥108,000

S-Max M800 /  
M900  
プロモーション動画



エアータービン  
メンテナンス動画





# S-Max pico



Special



## 優しさをカタチにした ウルトラミニヘッド & スーパースリムボディのエアタービン

ウルトラミニヘッドとスーパースリムボディのエアタービンS-Max picoは、MIやマイクロスコープを用いた高い精度を求められる施術のために開発されました。通常のエアタービンと比べて十分な術野が確保できるため、小児治療や顎関節症などで口を大きく開けることの難しい患者さまに対する治療や、臼歯部の舌側遠心の切削、咬合面でのチャンバーオープンやミラーテクニックを用いる際など、繊細さの求められる施術で大きな力を発揮します。

### 広い術野の確保

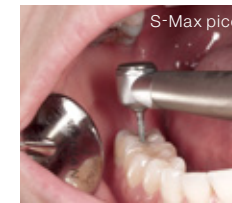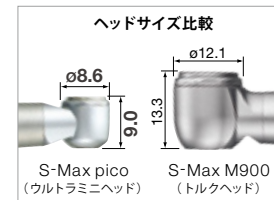

### マイクロスコープを用いた施術例



広い術野を確保できるので、マイクロスコープを使用した窩洞形成の際にも、ミラーテクニックを併用して、窩洞内部を確認しながらの形成も可能です。

#### ミラーテクニックの併用




写真提供：ウエマツ歯科医院

### pico専用バー

ナカニシは、S-Max picoの性能を最大限に発揮するために専用のバーを開発しました。この専用バーは、高い真円度と高い芯ブレ精度(3 μm以下)を誇り、MIなどのより精度を求められる施術に最適です。

高い真円度と高い芯ブレ精度を実現  
(回転速度：400,000 min<sup>-1</sup>)

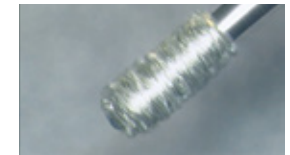

picoバー(PC1)

# S-Max pico Special



90°アングルヘッド  
ステンレス製ボディ  
セラミックボールベアリング  
ガラスロッドライト  
クリーンヘッドシステム  
プッシュボタン式チャック  
シングルスプレー












パワー：9 W  
回転速度：380,000-450,000 min<sup>-1</sup>  
360,000-430,000 min<sup>-1</sup> (S-Max pico YL, pico FL)  
ヘッドサイズ：φ8.6 × H 9.0 mm  
ショートシャンクバー / スーパーショートシャンクバー専用

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico	P1140	¥121,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico ML	P1146	¥121,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico YL	P1148	¥121,000
オサダファインジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico FL	P1165	¥121,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico KL	P1142	¥121,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico SL	P1143	¥121,000

エアータービン  
メンテナンス動画 ▶



## pico専用バー

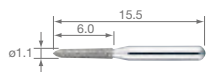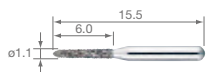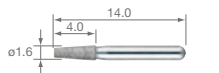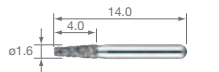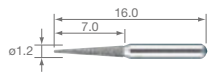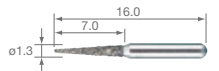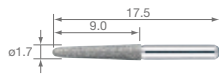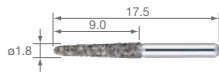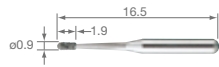

製品名	製品番号	標準価格
PC1	Y1001817	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC2	Y1001818	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC3	Y1001819	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC3ff	Y1002019	¥3,000
●エクストラファイバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC4	Y1001820	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC4ff	Y1002020	¥3,000
●エクストラファイバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC5	Y1001821	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC5ff	Y1002021	¥3,000
●エクストラファイバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC6	Y1001822	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC6ff	Y1002022	¥3,000
●エクストラファイバー ●3本入		




# Ti-Max X450

Special

## 45°ヘッドがもたらす高いアクセス性 智歯や埋伏歯の分割・抜歯をスムーズに

エアータービンTi-Max X450は、特徴的な45°ヘッドとスリムなボディーデザインにより、通常のエアータービンではアクセスの困難な智歯や埋伏歯の分割、抜歯等に大きな力を発揮します。21 Wの高トルクがもたらす力強い切削と、3点ジェット注水方式による高い冷却効果に加え、エアータービンTi-Max X450ならではの多様な術式に対応します。

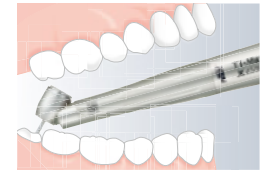

### 高いアクセス性

45°のヘッド角度により、高いアクセス性と広い視野を確保。埋伏智歯を覆っている硬組織などの削除や歯根の分割に最適です。

## 21 Wの高トルクによる力強い切削

ヘッド部に搭載されたナカニシ独自のツインノズルにより、ドライブエアーの力を余すことなくローターに伝達することで、力強く、粘りのある切削を実現しました。

## Ti-Max X450だからこそ実現する臼歯部への高いアクセス性と多様な術式



### 右下8番埋伏歯の抜歯

口唇や頬粘膜との干渉が少ないため、タービン本体に余分な外力が掛からず、安全にバーを適切な角度に保つことができます。視野の広さも特徴です。



### 左下6番分割抜歯

前方歯牙との間に十分なスペースが確保でき、無理なくレストが置けます。バーに適切な角度を与えることが容易で、根尖に至るような深さでも正確な分割が可能です。



### 右下6番遠心舌側隅角部の支台歯形成

口唇や頬粘膜、歯列の影響が少なく、形成歯が前方あるいは頬側に傾斜していても、アンダーカットを生じない適切な軸面形成が可能です。レストも歯牙上に容易に設定できます。

写真提供：青葉会西川歯科クリニック

## Ti-Max X450 Special



45°アングルヘッド  
チタン製ボディー & DURACOAT  
セラミックボールベアリング  
グラスロッドライト  
クリーンヘッドシステム  
プッシュボタン式チャック  
3点注水スプレー (チップエアなし)  
※注水は噴霧状にはなりません。



パワー: 21 W (X450L)、18 W (X450L以外)  
回転速度: 380,000-450,000 min<sup>-1</sup>  
ヘッドサイズ: ø11.2 × H 13.5 mm  
25 mm ロングバー専用

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450L	P1078	¥120,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450ML	P1083	¥120,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450YL	P1085	¥120,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450KL	P1079	¥120,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450SL	P1080	¥120,000

エアータービン  
メンテナンス動画 ▶










熱水洗浄可能

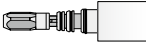

オートクレーブ可能

## カップリングジョイント タイプ別一覧

カップリング	ライト	Ti-Max Z800		Ti-Max Z900		S-Max M micro	S-Max M800	S-Max M900	S-Max pico	Ti-Max X450
		ミニヘッド	スタンダードヘッド	ミニヘッド	スタンダードヘッド	トルクヘッド	ウルトラミニヘッド	45°アングルヘッド		
<b>NSK バテラスカップリング</b> 	●	製品名	Z800L	Z900L	M micro	M800L	M900L	pico	X450L	
		製品番号	P1110	P1111	PA2306	P1253	P1254	P1140	P1078	
		標準価格	¥131,500	¥131,500	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
<b>NSK マッハカップリング</b> 	—	製品名	—	—	—	M800	M900	—	—	
		製品番号	—	—	—	P1255	P1256	—	—	
		標準価格	—	—	—	¥82,000	¥82,000	—	—	
<b>モリタαメインチューブ</b> 	●	製品名	Z800ML	Z900ML	M micro ML	M800ML	M900ML	pico ML	X450ML	
		製品番号	P1122	P1123	PA2313	P1267	P1268	P1146	P1083	
		標準価格	¥131,500	¥131,500	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
<b>ヨシダクイックジョイント</b> 	●	製品名	Z800YL	Z900YL	M micro YL	M800YL	M900YL	pico YL	X450YL	
		製品番号	P1126	P1127	PA2314	P1269	P1270	P1148	P1085	
		標準価格	¥131,500	¥131,500	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
<b>オサダファインジョイント</b> 	●	製品名	Z800FL	Z900FL	M micro FL	M800FL	M900FL	pico FL	—	
		製品番号	P1128	P1129	PA2315	P1271	P1272	P1165	—	
		標準価格	¥131,500	¥131,500	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	—	
<b>KaVo® Multiflex®</b> 	●	製品名	Z800KL	Z900KL	M micro KL	M800KL	M900KL	pico KL	X450KL	
		製品番号	P1112	P1113	PA2309	P1257	P1258	P1142	P1079	
		標準価格	¥131,500	¥131,500	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
<b>Sirona® Quick coupling</b> 	●	製品名	Z800SL	Z900SL	M micro SL	M800SL	M900SL	pico SL	X450SL	
		製品番号	P1114	P1115	PA2310	P1261	P1262	P1143	P1080	
		標準価格	¥131,500	¥131,500	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	

## 薬事情報一覧

### ■エアタービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000  
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000  
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000  
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoパー 届出番号：09B2X00016000122  
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

### ■コントラアングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000  
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000  
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000  
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000  
販売名：コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000  
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000  
販売名：コントラアングルハンドピース EXシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000  
販売名：コントラアングルハンドピース NRS2 承認番号：22200BZX000204000  
販売名：NSK プロフィー AR 認証番号：222ALBZX00027000  
販売名：歯根閉塞用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000  
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZX00726000  
販売名：ストレートハンドピース EX - 6 認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000  
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000  
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラテックス 届出番号：09B2X00016000150  
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

### ■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000  
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000  
販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000  
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

### ■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000  
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリオス 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000  
販売名：バリオス 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000  
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000  
販売名：S 5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000  
販売名：NSK エアスケーラー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000  
一般的名称：歯科用エアスケーラー 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000  
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000  
一般的名称：電動型機器接続歯面清掃器具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034  
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09B2X00016000139  
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140  
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイプロフィー 認証番号：226ABBZX00034000  
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

### ■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000  
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスII 認証番号：224ALBZX00015000  
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

### ■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000  
販売名：ビバサボート 2 認証番号：224ALBZX00017000  
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000  
販売名：ビバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000  
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000  
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000  
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

### ■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D SG2 0 L 届出番号：09B2X00016000124  
販売名：ティーマックス X-D SG2 0 届出番号：09B2X00016000123  
販売名：ティーマックス X-SG 0 L 届出番号：09B2X00016000042  
販売名：エスマックス SG2 0 届出番号：09B2X00016000041  
販売名：ティーマックス X-SG 届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-SG4 5 認証番号：226ABBZX00073000  
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000  
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-ER 届出番号：09B2X00016000015  
販売名：サージカルハンドピース SGM5-ER 届出番号：09B2X00016000018  
販売名：ストレートハンドピース SGS-E 届出番号：09B2X00016000013  
販売名：ストレートハンドピース SGS-E2 届出番号：09B2X00016000014  
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011  
販売名：アングルハンドピース SGA-E2 届出番号：09B2X00016000012  
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR2-E 届出番号：09B2X00016000020  
販売名：オシレートハンドピース SGO2-E 届出番号：09B2X00016000022  
販売名：サジタルハンドピース SGT2-E 届出番号：09B2X00016000021  
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000102  
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098  
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100  
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000  
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000  
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023  
一般的名称：洗浄キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09B2X00016000141  
一般的名称：歯科用起子及び剝離子 一般医療機器

販売名：オセオオ 100+ 届出番号：09B2X00016000153  
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

### ■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000  
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

### ■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030  
販売名：ボルバーi7 届出番号：09B2X00016000149  
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09B2X00016000038  
販売名：プレスト アクア II 届出番号：09B2X00016000010  
販売名：プレスト II 届出番号：09B2X00016000009  
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。

Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

Bien AirとUNIFLEXは、Bien Air Holding SAの登録商標です。

W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。

iPad®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。