



CONTRA-ANGLES



クラス	Premium	Special	Advanced	Basic
素材	チタン	チタン	チタン	アルミ
DURAGRIP	●	●	●	
アンチヒーティングシステム	●	●		
セラミックボールベアリング	●	●	●	
ガラスロッドライト	●	●	●	
クリーンヘッドシステム	●	●	●	●
プッシュボタン式チャック	●	●	●	●
水フィルター	●	●		
注水	4点	4点	4点	
製品保証	2年	1年	1年	1年

Ti-Max Z

Premium





高い静粛性と低振動

ミクロン単位の厳しい寸法精度の部品とギアの絶妙な組み合わせにより、今までにない高い静粛性と低振動を実現。術者と共に患者さまにも快適な環境を提供します。



アンチヒーティングシステム (Z95L, Z85L, Z84L)

ナカニシ独自の発熱防止機構“アンチヒーティングシステム”は、コントラアングルの構造上のウィークポイントであったハンドピースの発熱を低減します。術者にとっても、患者さまにとっても、より快適な治療を目指しました。

DURABLE

究極のハンドピースを目指して、高い耐久性を実現。

細部に至るまでの緻密な設計と、ナカニシが世界に誇る超精密加工技術の融合により、究極を目指すハンドピースにふさわしい高度な耐久性を実現。滅菌に対する耐久性もさらにアップしました。

COMFORT

臨床現場の声から生まれた、ナカニシハンドピースの最高峰Zシリーズ。


もっと使いやすく、もっと清潔に、もっと安全に。ストレスフリーをさらに高いレベルで実現するために、臨床現場のニーズに応える様々な機能をフルに採用。術者が最も快適に使用できるハンドピースを目指して。そして、患者さまにも安心して心地よい治療環境をご提供できるように。ポディー形状から衛生・安全対策に至るまですべてを見直し、独自の先進技術を惜しみなく注ぎ込みました。ナカニシの最高峰Zシリーズでしか得られない満足感がきっとあります。

スモールヘッド

従来の常識を覆すまでにヘッド部分を小型化。同時に、当社従来品X95Lに比べてヘッド角度を2°外側に傾けました。臼歯部など施術が困難な部位においても、確かな視認性と高いアクセス性を実現します。

スリムネック

ネック部分が細くなったことで、従来よりも視認性が大幅に向上。あらゆる施術において、広い術野を確保できるようになりました。

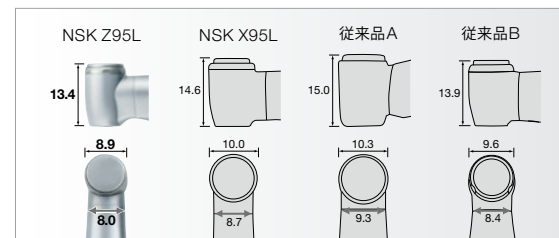

Ti-Max Z Premium



チタン製ボディー & DURAGRIP
アンチヒーティングシステム
セラミックボールベアリング
グラスロッドライト

クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
水フィルター内蔵
4点注水スプレー



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	Z95L	C1034	¥163,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ ●ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.4 mm
- FGバー用(ø1.6)



ウルトラミニヘッド



極限まで小型化したヘッドサイズ、92°に設定された独自のヘッド角度。臼歯部など施術が困難な部位においても、スムーズにアプローチできます。

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:4.5	●	Z84L	C1135	¥168,000

- 最高回転速度：180,000 min⁻¹ ●ミニヘッド
- ヘッドサイズ：ø8.9 × H 12.6 mm ●FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー専用



チタン製ボディー & DURAGRIP
グラスロッドライト
クリーンヘッドシステム

プッシュボタン式チャック
水フィルター内蔵
シングルスプレー



ウルトラミニヘッド



11.9 mmのヘッド高は、従来届きにくかった部位の治療や、小児および顎関節症患者の治療に効果を発揮します。

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	Z85L	C1062	¥168,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ ●ミニヘッド
- ヘッドサイズ：ø8.9 × H 11.9 mm ●アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング ●FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー専用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	Z25L	C1038	¥126,000

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹ ●ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.4 mm
- コントラバー用(ø2.35)

コントラングル
メンテナンス動画 ▶



安心の2年保証



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

Ti-Max Z45L

Special



ナカニシから高速回転機器の新たなイノベーション。


Ti-Max Z45Lは、従来型のハンドピースでは届きにくかった大白歯部へ、前歯部や歯列に干渉されることなく容易にアクセス可能です。コントラアングルならではの、安定した回転と高いトルクはスムーズな埋伏智歯の切断除去を実現し、術者と患者さまの負担を軽減します。また、切替可能な2way注水方式を採用し、外科領域のみならず、歯牙切削においても45°ヘッドの有効性を大いに発揮します。切削バーを歯軸に対して無理なく平行に当てられるため、臼歯部支台歯形成や前歯部カリエス除去なども、ストレスの少ない正確な施術が可能になります。高いアクセス性、安定したレスト、そして視認性の高さをもたらす、ストレスフリーの治療スタイルは、まさに新感覚です。



上顎左側2番近心



上顎左側5番遠心

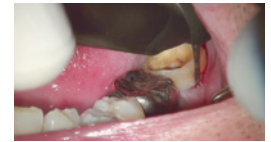


下顎左側7番根間中隔



下顎右側6番舌側



下顎左側3番歯頭部

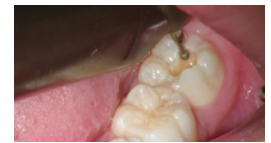

下顎左側7番咬合面

写真提供:青葉会 西川歯科クリニック



ジェット注水



ミスト注水


切替可能な2way注水方式

観血的処置では、チップエアのないジェット注水で気腫を防止。切削バーと歯牙への高い冷却効果を発揮するミスト注水により歯牙への熱損傷リスクの軽減を実現。施術状況にあわせて切替えができる2way注水方式は術者の自由度を大きく向上させます。



- 最高回転速度：168,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ：φ9.6 × H 14.5 mm
- 45°アングルヘッド ●チタン製ボディ & DURAGRIP
- アンチヒーティングシステム ●セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●水フィルター内蔵
- 4点注水(2way注水方式) ●FGバー用(φ1.6)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:4.2	●	Z45L	C1064	¥154,000

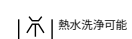

熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

Ti-Max X

Advanced



- 最高回転速度：200,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- セラミックボールベアリング
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●4点注水スプレー
- FGバー用(φ1.6)



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	X95L	C600	¥143,000
	—	X95	C610	¥110,000



- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ ●ミニヘッド
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- セラミックボールベアリング
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- FGバー用(φ1.6)ショートシャンクバー専用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	X85L	C604	¥148,500
	—	X85	C614	¥115,000



- 最高回転速度：200,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- セラミックボールベアリング
- クリーンヘッドシステム ●プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー ●外部注水 ●FGバー用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	—	X95EX	C1072	¥95,000



- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X25L	C601	¥111,000
	—	X25	C611	¥83,000



特殊防塵機構

プロフィー用ハンドピース

- 最高回転速度：2,500 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●プロフィー用 ●スクリュー式
- 360°回転 ●特殊防塵機構

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	●	X57L	C609	¥106,000
	—	X57	C619	¥72,500



- 最高回転速度：10,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	●	X15L	C602	¥124,000
	—	X15	C612	¥92,500



チップロック機構

EVA用ハンドピース

- 最高回転速度：10,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト
- プロフィン / エバチップ / オートソファイル用*
- 上下運動(ストローク幅1.4 mm) ●チップロック機構
- ※金属シャンクは不可

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	●	X55L	C608	¥136,500
	—	X55	C618	¥103,000



- 最高回転速度：4,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 10:1	●	X12L	C606	¥127,000
	—	X12	C616	¥96,000



ストレートハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- シングルスプレー ●ハンドピースバー用(ø2.35)
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X65L	H273	¥111,000
	—	X65	H274	¥60,000

コントラングル
メンテナンス動画



FX series


Basic



エコノミーハンドピースのスタンダードモデル

高いアクセス性と広い術野

細くて長いネック形状とホールド感の高いボディー形状は、従来のハンドピースでは届きにくかった臼歯部へのアクセス性を大きく高めています。

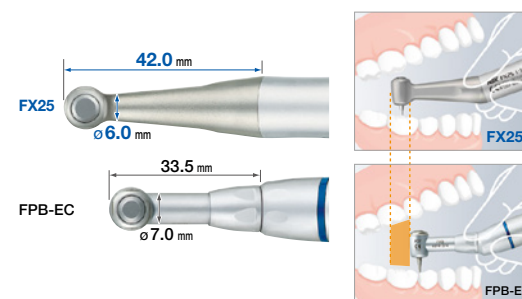

高い利便性 (FX25, FX23)

術者の手元で簡単にカートリッジを交換する事ができるので、修理に出す時間のロスを無くす事ができます。




クリーンヘッドシステム (FX25, FX15, FX65)

コントラヘッド部への異物侵入を防止。衛生的な施術を行えるとともにベアリングの耐久性をアップ。



ペーストディフェンスシステム (FX57)

ヘッドへのクリーニングペーストの侵入を防ぐダブルシールド防塵シールを採用。シール接触部には耐摩耗性を大幅に向上させるDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コーティングを施すことで、ペースト由来のトラブルを解消し、高い耐久性と安心の2年保証を実現しました。

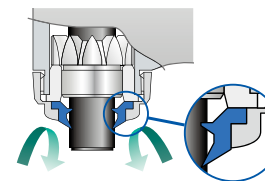


プッシュボタン式チャック

ワンタッチでスムーズなバーの着脱を可能にするプッシュボタン式チャックを採用。



高い静寂性

高精度ギアにより、振動や音の発生を最小限まで抑え、術者へのストレスを大きく軽減します。

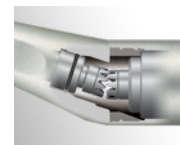

FX series Basic



- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング
- 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX25	C1052002	¥38,000




- 最高許容回転速度：30,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX23	C1056002	¥25,000



- 最高許容回転速度：10,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング
- 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX15	C1053002	¥65,000

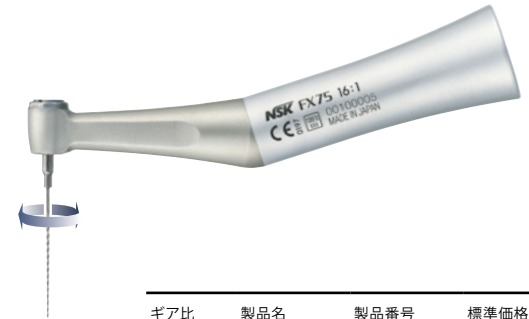

エンド用ハンドピース

- 最高許容回転速度：1,250 min⁻¹
- ミニヘッド ●プッシュボタン式チャック
- エンジンファイナル用 ●360°回転

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	FX75	C1055002	¥66,000



ペースティフェンスシステム

プロフィー用ハンドピース

- 最高許容回転速度：5,000 min⁻¹
- プロフィー用 ●スクリュー式
- 360°回転 ●ペースティフェンスシステム



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX57	C1054002	¥55,000



ストレートハンドピース

- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム ●外部注水
- ハンドピースパー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX65	H1014002	¥31,500

EX series Basic

一般切削用ヘッド 外部注水



製品名	製品番号	標準価格
FPB-Y	C875	¥27,000

- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム ●プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング ●コントラバー用(φ2.35)



製品名	製品番号	標準価格
NAC-Y	C032002	¥14,500

- 最高許容回転速度：30,000 min⁻¹
- ラッチ式コントラ
- コントラバー用(φ2.35)

プロフィー用ヘッド



製品名	製品番号	標準価格
AR-Y(S)	C187	¥13,000

- 最高許容回転速度：5,000 min⁻¹
- プロフィー用 ●スクリュー式
- 360°回転



EVA用ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
EVA-Y	C235	¥13,000

- 最高許容回転速度：10,000 min⁻¹
- エパチップ用
- 上下往復(ストローク幅1.4 mm)

エンド用ヘッド



製品名	製品番号	標準価格
MP-Y	C547	¥19,000

- 最高許容回転速度：20,000 min⁻¹
- ミニヘッド ●プッシュボタン式チャック
- 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
MPAS-Y	C882	¥30,000

- 最高許容回転速度：20,000 min⁻¹
- ミニヘッド ●プッシュボタン式チャック
- 根管長測定器接続用(シャンク長12 mm)
- 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
NRS2-Y	C549	¥20,500

- 減速 10:1 ●最高許容回転速度：3,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム ●プッシュボタン式チャック
- エンジンファイル用(φ2.35) ●360°回転



製品名	製品番号	標準価格
VM-Y	C765001	¥23,000

- 最高許容回転速度：8,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック ●ハンドファイル用
- 上下往復(ストローク幅0.4 mm)

●最高許容回転速度は、1:1の等速シャンクを装着した時のモーター回転速度を表します。

シャンク



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	EC-30	C100008	¥11,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	ER4	C634	¥38,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 10:1	ER10	C635	¥43,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	ER16	C636	¥47,000

AR-Y(S)
ヘッド交換動画



オートクレーブ可能



オートクレーブ可能

EX series Basic




ストレートハンドピース

- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム
- ハンドピースパー用(φ2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	—	EX-6D	H267	¥31,500

isoE-LUX

歯科用照明器具

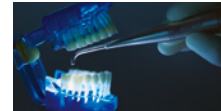

訪問診療先の環境にかかわらず、口腔内を明るく照射します。スリムボディによる高いアクセス性で、見えにくい部分にもアプローチが可能。

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	isoE-LUX	Z1265	¥36,500

薬事情報一覧

■エアタービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoパー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース EXシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース NRS2 承認番号：22200BZX000204000
販売名：NSK プロフィー AR 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯根閉塞用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZX00726000
販売名：ストレートハンドピース EX - 6 認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラテックス 届出番号：09B2X00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリオス 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリオス 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケーラー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケーラー 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：電動型機器接続歯面清掃器具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09B2X00016000139
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイプロフィー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスII 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000
販売名：ビバサボート 2 認証番号：224ALBZX00017000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ビバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D SG2 0 L 届出番号：09B2X00016000124
販売名：ティーマックス X-D SG2 0 届出番号：09B2X00016000123
販売名：ティーマックス X-SG 0 L 届出番号：09B2X00016000042
販売名：エスマックス SG2 0 届出番号：09B2X00016000041
販売名：ティーマックス X-SG 届出番号：09B2X00016000137
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-SG4 5 認証番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-ER 届出番号：09B2X00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM5-ER 届出番号：09B2X00016000018
販売名：ストレートハンドピース SGS-E 届出番号：09B2X00016000013
販売名：ストレートハンドピース SGS-E2 届出番号：09B2X00016000014
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011
販売名：アングルハンドピース SGA-E2 届出番号：09B2X00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR2-E 届出番号：09B2X00016000020
販売名：オシレートハンドピース SGO2-E 届出番号：09B2X00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT2-E 届出番号：09B2X00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09B2X00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剝離子 一般医療機器

販売名：オセオッ 100+ 届出番号：09B2X00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030
販売名：ボルバーi7 届出番号：09B2X00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09B2X00016000038
販売名：プレスト アクア II 届出番号：09B2X00016000010
販売名：プレスト II 届出番号：09B2X00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。

Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

Bien AirとUNIFLEXは、Bien Air Holding SAの登録商標です。

W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。

iPad®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。