




TIP GUIDE

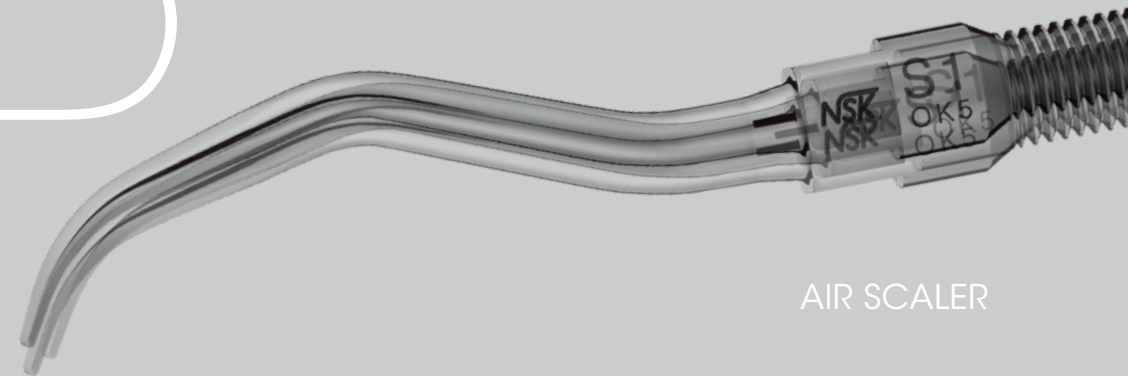

AIR SCALER

治療の幅を広げる
エアーケーラーチップ
ラインナップ

初期う蝕除去 P12



スケーリング P04



ペリオ P06



インプラント・補綴物用(Vチップ) P07-08



ソニックブラシ P10




Vチップ(初期う蝕除去) P19-20




形成用(最終仕上げ) P14-16



Vチップ(根管洗浄用) P18

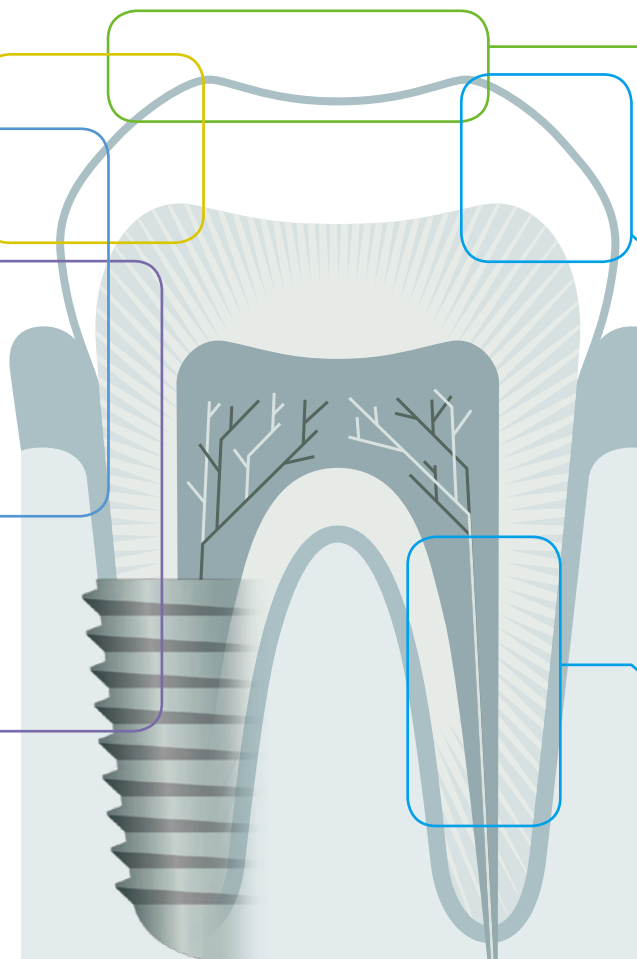


※ 熱水洗浄可能 (S50-C1,S50-C2,S50-F1,S50-F2除く) 135℃までの温度でオートクレープ可能

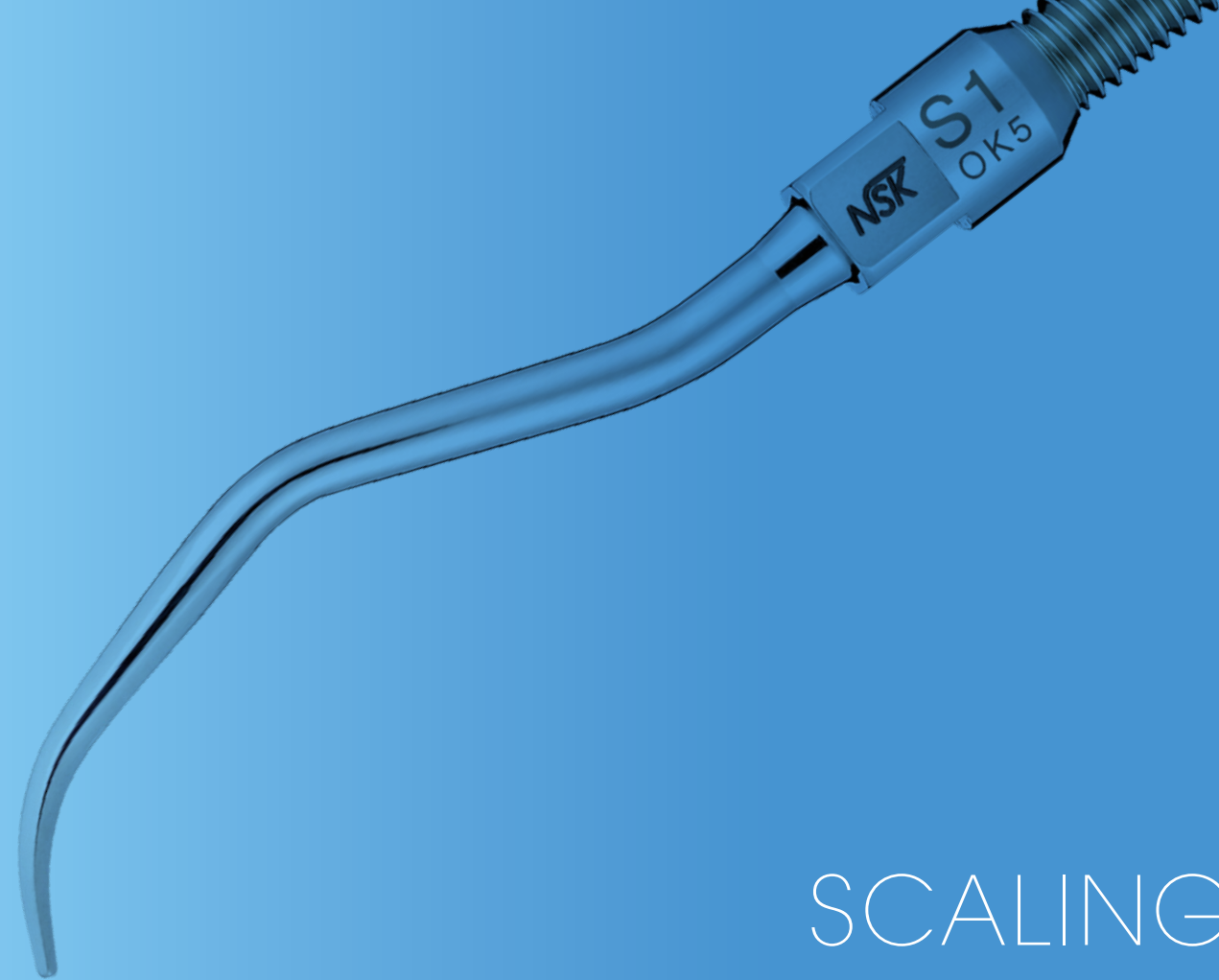



SCALING

SCALING スケーリング

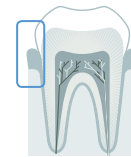

製品名 **S1**

主に歯肉縁上のスケーリングに適したユニバーサルタイプのチップです。活用範囲が広く全顎的に使用できます。

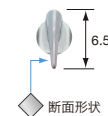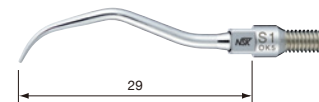



標準価格 ￥5,500

製品番号 **Z252411**

・ユニバーサルタイプ

製品名 **S2**

主に歯肉縁上のスケーリングに適したチップです。

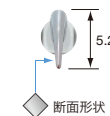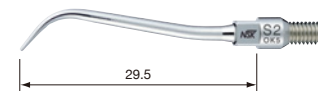



標準価格 ￥5,500

製品番号 **Z252413**

・シックルタイプ

製品名 **S3**


主に歯肉縁上のスケーリングに適したチップです。チップ先端が細く、歯間部や歯肉辺縁への操作も行いやすい形態です。

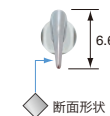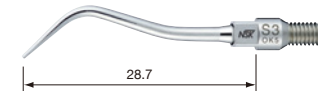

標準価格 ￥5,500

製品番号 **Z252412**


・ペリオタイプ

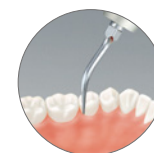

PERIO





PERIO ペリオ

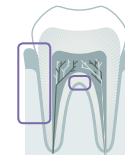

製品名 S10

主に歯肉線下のスクーリングに適したチップです。

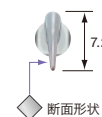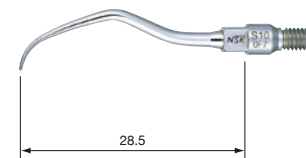

標準価格

¥8,400



製品番号

Z252420

・ユニバーサルタイプ(スリムライン)

製品名 S20

主に歯肉線下のスクーリング、メインテナンスに適しています。細長い形状でポケット内へのアクセスがスムーズに行えるので全顎的に使用できるチップです。

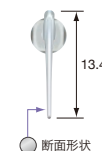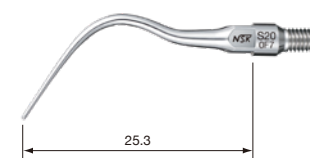

標準価格

¥8,400



製品番号

Z252441

・ストレートタイプ

製品名 S21R

主に歯肉線下のスクーリング、メインテナンスに適しています。緩やかに湾曲した形態で、臼歯部の隣接面へのアクセスが行いやすいチップです。

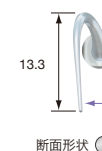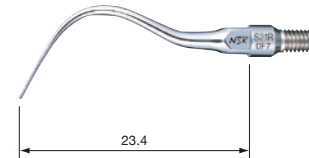

標準価格

¥8,400



製品番号

Z252442

・右湾曲タイプ

製品名 S21L

主に歯肉線下のスクーリング、メインテナンスに適しています。緩やかに湾曲した形態で、臼歯部の隣接面へのアクセスが行いやすいチップです。

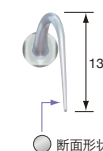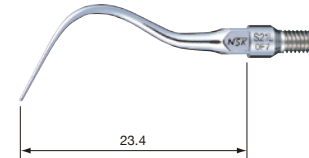

標準価格

¥8,400

製品番号

Z252443

・左湾曲タイプ




PERIO

(Maintenance Tip)

メンテナンス

インプラント・補綴物用(Vチップ)

プラスチック素材を使用しているため、補綴・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができます。
スピーディーな施術は患者さんへの負担も軽減します。

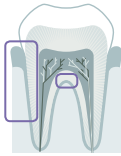

製品名

S35



標準価格

¥5,300

製品番号

Z252015


・Vチップホルダー ・Eチップ用レンチ付属 ※プラスチックチップ別売



製品名

V-P10-A

インプラント体やポーセレンなどの補綴物のメンテナンスに最適なチップです。

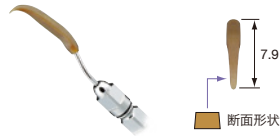

標準価格

¥2,800

製品番号

Y1002746

・3本入 ※S35ホルダー別売



製品名

V-P11R-A

複屈曲型のチップです。十分な長さがあるので隣在歯や豊隆部の影響を受けにくく、また歯牙形態にフィットしやすい形状なので、前歯部から小臼歯まで、幅広く使用できる汎用性の高いチップです。



標準価格

¥3,000

製品番号

Y1002747

・右湾曲 ・3本入 ※S35ホルダー別売



製品名

V-P11L-A

複屈曲型のチップです。十分な長さがあるので隣在歯や豊隆部の影響を受けにくく、また歯牙形態にフィットしやすい形状なので、前歯部から小臼歯まで、幅広く使用できる汎用性の高いチップです。



標準価格

¥3,000

製品番号

Y1002748


・左湾曲 ・3本入 ※S35ホルダー別売



製品名

V-P12-A

V-P10-Aのロングタイプチップです。ブリッジの基底面や、到達しにくかった床付きのインプラント上部構造など歯冠長の長い症例でも、容易にアクセスすることができます。

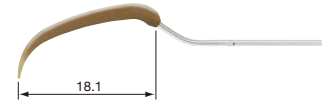

標準価格

¥3,000

製品番号

Y1002749

・3本入 ※S35ホルダー別売

製品名

ペリオコントロールチップエアスケーラーキット



標準価格

¥8,000

製品番号

Y1002754

・S35ホルダー
・V-P10-A、V-P11R-A、V-P11L-A、V-P12-A:各1本入
・Eチップ用レンチ付属

SONIC BRUSH




SONIC BRUSH ソニックブラシ

エアー圧による音波振動を利用してブラシが振動するため、歯質や補綴修復物を傷つけずバイオフィルムを除去することができます。
ソニックブラシは4種類の形態があり、目的に応じ選択することで、様々な用途にご使用いただけます。



製品名 **S50**

標準価格 **¥15,900**

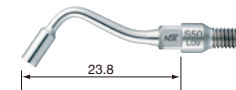


製品番号 **Z252450**

・ソニックブラシホルダー ・Eチップ用レンチ付属 ※ブラシ別売

製品名 **S50-C1**

標準価格 **¥2,700**

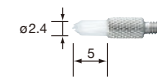


製品番号 **Y900097**

・コニカルブラシ(小) ・5個入

製品名 **S50-C2**

標準価格 **¥2,700**

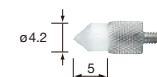

製品番号 **Y900098**

・コニカルブラシ(大) ・5個入

製品名 **S50-F1**

標準価格 **¥2,700**




製品番号 **Y900099**

・フラットブラシ(小) ・5個入

製品名 **S50-F2**

標準価格 **¥2,700**

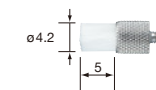

製品番号 **Y900100**

・フラットブラシ(大) ・5個入

製品名 **S50 ソニックブラシセット**

標準価格 **¥26,700**




製品番号 **Y900096**

・S50ソニックブラシホルダー ・S50-C1、S50-C2、S50-F1、S50-F2 : 各5個入 ・Eチップ用レンチ付属




補綴修復物の清掃

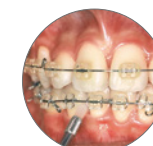


矯正ブラケット周囲の清掃
写真提供：天王洲インプラントセンター

RESTORATIVE

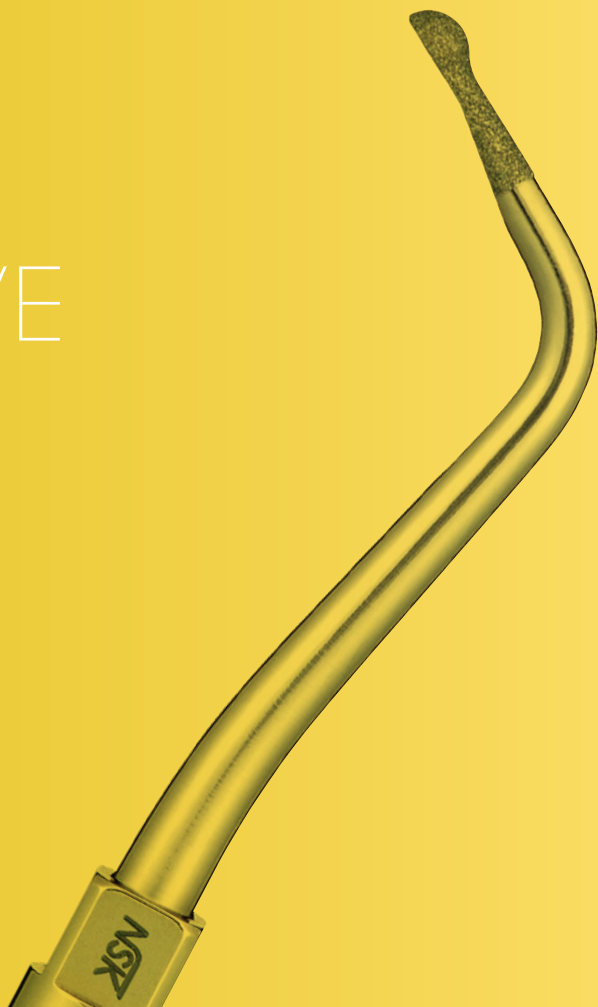

RESTORATIVE

初期う蝕除去用

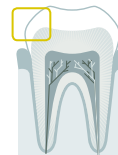






製品名 **S65D**

製品名 **S66D**

製品名 **S67D**

製品名 **S68D**

先端が半球形のチップは歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端部分の隅角部の調整に適しています。

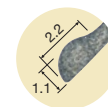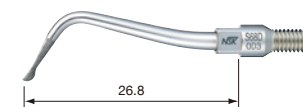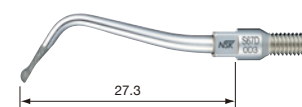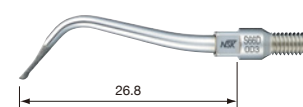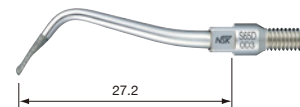

標準価格

¥13,500

製品番号

Z252465

・ダイヤモンドコーティング

標準価格

¥13,500

製品番号

Z252466

・ダイヤモンドコーティング

標準価格

¥13,500

製品番号

Z252467

・ダイヤモンドコーティング

標準価格

¥13,500

製品番号


Z252468

・ダイヤモンドコーティング




歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去

RESTORATIVE

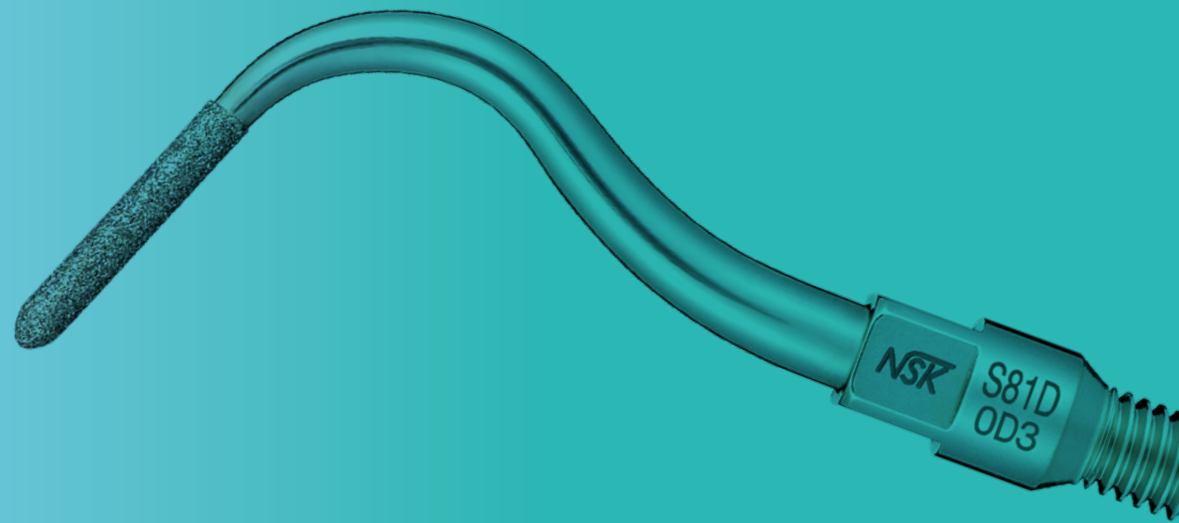

RESTORATIVE




形成用（最終仕上げ）

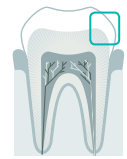

製品名 **S71D**

製品名 **S72D**

トルベードシェイプチップはラミネートベニアなど隣接面マージンの最終形成に適しています。
削りすぎや象牙質露出の危険性が少なく、隣接面の形成においてより保存的な形成が可能となります。

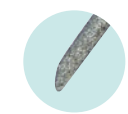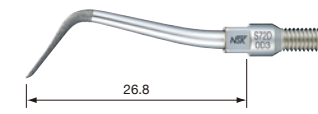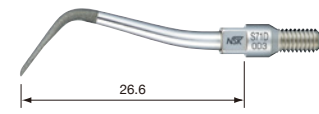

標準価格 **¥15,000**


製品番号 **Z252471**

標準価格 **¥15,000**

製品番号 **Z252472**

・ダイヤモンドコーティング


・ダイヤモンドコーティング

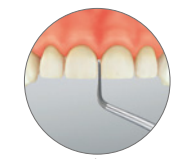

隣接面マージンの最終形成

RESTORATIVE

形成用（最終仕上げ）

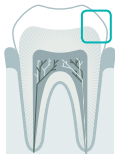

製品名

S81D








製品名

S82D

製品名

S83D

回転切削バーを使用した支台歯形成後のフィニッシュライン最終仕上げ用として使用します。
回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁や、歯肉溝部分の内縁上皮を損傷することなく仕上げることができます。

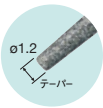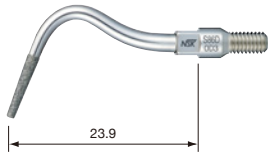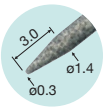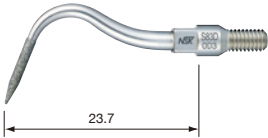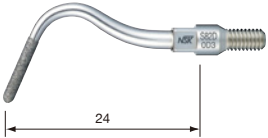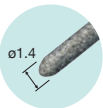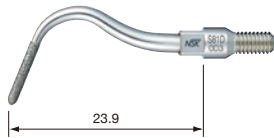

標準価格

¥15,000

製品番号

Z252469

標準価格

¥15,000

製品番号

Z252462

標準価格

¥15,000

製品番号

Z252461

・ダイヤモンドコーティング

・ダイヤモンドコーティング

・ダイヤモンドコーティング


標準価格

¥15,000


製品番号

Z252460

・ダイヤモンドコーティング

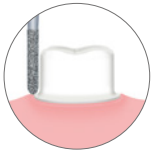

フィニッシュライン最終仕上げ用

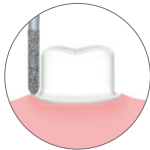

フィニッシュライン最終仕上げ用




V-TIP SYSTEM

V-TIP SYSTEM

少量形成、切削・研削

先端のチップ交換をすることで様々なチップが使用できる、ナカニシ独自のVチップシステム。
先端が半球形のチップは歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端部分の隅角部の調整に適しています。

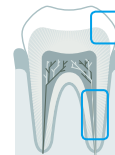

製品名 **S75**



標準価格 **¥11,500**

製品番号 **Z252035**

・Vチップホルダー ・120°アングル ・Eチップ用レンチ付属 ※先端チップ別売


V-TIP SYSTEM

(Endodontics) エンド用



根管内の洗浄を効率良く行うことができます。

製品名 **V-U15**

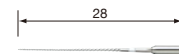


標準価格 **¥1,700**

製品番号 **Y900177**

・Vファイル23 mm #15 ISO15 ・根管洗浄用 ・6本入

製品名 **V-U20**

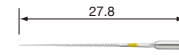

標準価格 **¥1,700**

製品番号 **Y900178**

・Vファイル23 mm #20 ISO20 ・根管洗浄用 ・6本入

製品名 **V-U25**




標準価格 **¥1,700**

製品番号 **Y900179**

・Vファイル21 mm #25 ISO25 ・根管洗浄用 ・6本入

製品名 **V-U30**

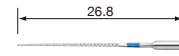

標準価格 **¥1,700**

製品番号 **Y900180**

・Vファイル22 mm #30 ISO30 ・根管洗浄用 ・6本入

製品名 **V-U35**




標準価格 **¥1,700**

製品番号 **Y900181**

・Vファイル23 mm #35 ISO35 ・根管洗浄用 ・6本入

製品名 **V-N50**

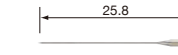


標準価格 **¥3,200**

製品番号 **Y900182**

・ニッケルチタン ・根管洗浄用 26 mm ・3本入

製品名 **V-N51**

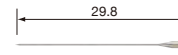

標準価格 **¥3,200**

製品番号 **Y900183**

・ニッケルチタン ・根管洗浄用 30 mm ・3本入



V-TIP SYSTEM_(Restorative) 初期う蝕除去用



う蝕象牙質除去用チップは罹患象牙質のみを選択的に研削できるので、健全歯質を最大限に残すことが可能です。

製品名 **V-G70**

標準価格 **¥3,500** 製品番号 **Y900118**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **V-G71**

標準価格 **¥3,500** 製品番号 **Y900119**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **V-G72**

標準価格 **¥3,500** 製品番号 **Y900120**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **V-G75**

標準価格 **¥3,500** 製品番号 **Y900121**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **V-G76**

標準価格 **¥3,500** 製品番号 **Y900122**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **アソートセット (初期う蝕除去用)**

標準価格 **¥5,800** 製品番号 **Y900158**

・V-G70、V-G71、V-G72、V-G75、V-G76：各1本入




歯頭部う蝕除去



根面う蝕除去

V-TIP SYSTEM_(Restorative) 形態修正・研磨用

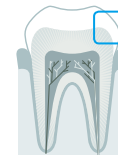

う窩の開拡や修復処置後の形態修正・研磨に適しています。

製品名 **V-G77 レギュラー**

標準価格 **¥4,100** 製品番号 **Y900165**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **V-G78 ファイン**

標準価格 **¥4,100** 製品番号 **Y900166**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **V-G79 スーパーファイン**

標準価格 **¥4,100** 製品番号 **Y900167**

・ダイヤモンドコーティング ・3本入

製品名 **アソートセット (形態修正・研磨用)**


標準価格 **¥4,100** 製品番号 **Y900168**

・V-G77、V-G78、V-G79：各1本入




う窩の開拡

ティーマックスS970
エアースケーラー

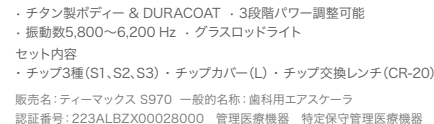

KaVo®(カボ)とMULTiflex® LUX(マルチフレックス)は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Sirona®(シロナ)は、Sirona Dental Systems GmbHの登録商標です。

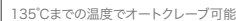

S970シリーズ独自のパワーコントロール機能は3段階で出力調整ができ、症例に応じた最適なパワー設定が可能です。

※上記パワーレベルは目安です。症例に応じて低いレベルからご使用ください。 ※スケーリング/Vチップ(初期型除却)以外は、S970/S950専用チップになります。パワー調整機能の付いていないハンドピース(S900など)ではご使用になれませんのでご注意ください。

■エアスケーラー用チップは下記の認証品に含まれています。

販売名：ティーマックス S970 認証番号：222ALBZX00028000	販売名：S50 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000	販売名：NSK エアスケーラー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般名：歯科用エアスケーラー 管理医療機器		

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル10F
TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシニ コール
受付時間(土日祝日を除く) 9:00~17:00  0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも
お気軽にお寄せください。

