

ORAL HYGIENE

Create it 

ORAL HYGIENE

NSK

快適なプロフェッショナルケアを。

歯肉縁上・縁下のバイオフィルム、歯石の除去、そして歯面清掃まで。

歯科衛生士の方々が取り組んでいるハイジニストワークは、歯周治療の結果に大きな影響を及ぼします。

ナカニシは、そのさまざまなシーンに対応したオーラルハイジーン製品を多彩にラインナップ。

患者さまの大切な口腔を、長年にわたって美しく健康な状態に保つために。

超音波スケーラーやパウダーメンテナンスをはじめ、誰もが快適かつ効率的に使用できる

プロフェッショナルケアツールで、皆さまの日々の臨床現場をサポートしていきます。

INDEX

Varios Series	P03 - 20
Varios Combi Pro2	
Varios 970	
Varios 370	
Prophy-Mate neo	P21 - 22
Perio-Mate	P23 - 24
Powder Maintenance	P25 - 28
Ti-Max S970	P29 - 32
iProphy	P33
Contra-angles	P34
Spare Parts	P35 - 37

Varios Combi Pro2

超音波スケーラー・パウダーメンテナンス

ハイジーンワークを より快適に、より使いやすく

歯肉縁上および歯肉縁下へのパウダーメンテナンスと様々な施術に対応可能な超音波スケーラーを組み合わせたVarios Combi Proがさらに多くのユーザーのニーズや使用環境に耳を傾け、歯科医師、歯科衛生士が求める新機能を追加し、Varios Combi Pro2へ進化しました。ナカニシの豊富な経験やものづくりへのこだわりと技術を結集し、ユーザーの使いやすさを重視することで、治療スタイルに合った対応ができるよう設計されています。Varios Combi Pro2は歯科医師、歯科衛生士のみならずが快適で効率的に使用できるプロフェッショナルケアツールとして、幅広い歯科医療をサポートします。

超音波スケーラー ULTRASONIC SCALER



簡単に取り出せる注水ボトル

注水ボトルは簡単に取り外しが可能な。使いやすさと利便性を考慮した設計です。



ライト付チタン製ハンドピース

チタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。



直感的に調節可能

水量調節にはダイヤル式を採用。正確かつ直感的にコントロールが可能。左右のダイヤルは、超音波スケーラーとパウダー機能に対応しています。



パウダーメンテナンス POWDER MAINTENANCE



ユニットとチャンバーが完全に独立

チャンバーからハンドピースまでを一体化。ユニットから独立構造になっているため、万一粉詰まりが発生した場合は、ユニットを分解するなどの面倒な修理のリスクが低減されます。ユニット内はエアと水回路だけのスマートな設計です。



ペリオハンドピース用ジェットノズル

ペリオハンドピース用ジェットノズルは、歯肉縁上のステインやプラーク・バイオフィルムを集中したパウダー噴射で効率的に除去することが可能です。



操作性の高いハンドピースとノズル

アクセス性に優れ、口腔内で操作しやすいスリムなハンドピース。長く小さいノズルは、臼歯部などへのアプローチを容易にします。頬側では必要以上にハンドピースで口角を広げることなく、舌側では広い術野の確保が術者と患者さまの負担を軽減します。



患者さまにやさしい注水

超音波スケーラーとパウダーデバイス両方で微温水での施術が可能。低刺激で患者さまの快適性を高めます。



スマートディスプレイパネル

スマートディスプレイパネルには、使用モードの設定をシンプルに表示。視認性が高く、簡単に直感的な操作が出来ます。

追求した使いやすさ



ULTRASONIC SCALER


耐久性に優れたライト付チタン製ハンドピース

従来の樹脂製ハンドピース本体にチタン製を採用することで、再生処理による耐久性が向上。コードとの接続部もチタン製を採用したことでハンドピースを把持した時の重心のバランスがさらに向上し、ハンドリングしやすく、より繊細な操作をサポートします。ハンドピースの表面にナカニシ独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。また、細い先端部がアクセスが困難な臼歯部などへのアプローチをスムーズにし、口腔内で自由な動きが取れるため、チップを適切な角度で当てるのが容易に行えます。



ナカニシ独自のコーティング「DURAGRIP」

チタン製ポティの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の「DURAGRIP」コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸によりグリップをした状態でも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。

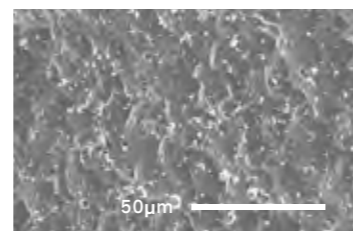

臨床の可能性を広げる多彩なチップラインナップ


豊富なチップラインナップは、幅広い臨床に対応しています。形状だけでなく、断面や材質、表面の加工などにも違いがあり、症例や付着物の状態に合ったチップの選択で、歯面や歯肉に負担をかけにくい効率的な治療を実現します。



iPiezo engine® アイピエソ エンジン

さまざまな状態の歯石に対応する「iPiezo engine®」搭載

「もっと上手にスケーリングをしたい」「もっと簡単に歯石を取りたい」。歯科衛生士の方々のそんな声を真剣に取り入れ、ナカニシが独自に開発した超音波エンジン「iPiezo engine®」をバリ奥斯シリーズに搭載しました。まるで自分の手の延長のように、チップに術者の意図が的確に伝わり、歯面の状況に合わせた思い通りの操作が可能。スピーディーな施術で、患者さまにとっても優しいスケーリングを実現します。

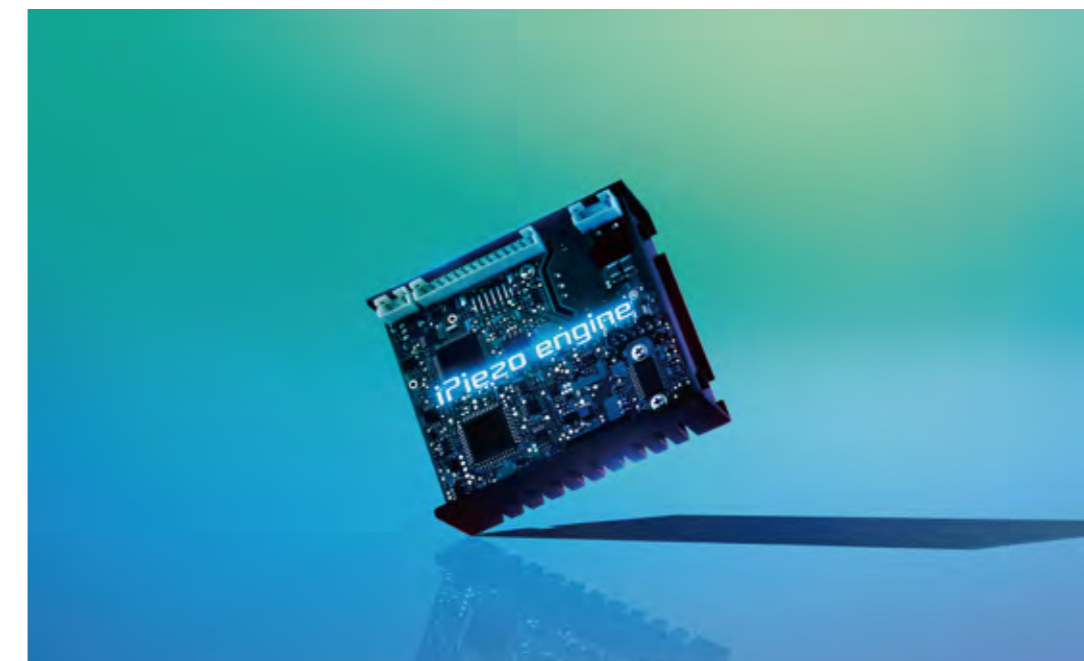

フィードバック機能


硬い歯石や柔らかい歯石などの歯面の状態に合わせて、チップ先端に適正なパワーを供給。硬く取れにくい歯石に対しても、安定したスケーリングを行えます。

オートチューニング機能

チップ先端で設定パワーが発揮される様に、発振周波数を自動的に調整。チップの暴れやバタつきを最小限に抑えるため、吸い付くようにチップが歯面を捉え、歯面状況が手指に的確に伝わります。

安定したスケーリングが可能

従来の超音波スケーラーは、柔らかい歯石から硬い歯石にぶつくとパワーが落ちてしまうことがありました。バリ奥斯シリーズは「iPiezo engine®」の働きにより、自動的にチップ先端にかかる負荷を感知し、パワーを落とすことなく安定したスケーリングが行えます。

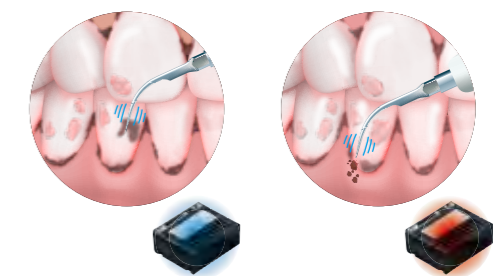

POWDER PERIO-SYSTEM




様々な症例に対応可能

バイオフィルム除去に適したペリオシステムは、矯正装置・インプラント・補綴装置など様々な症例に対応。複雑な部位にもアプローチしやすく、安定した施術を実現します。

ピンポイントに付着したステインやプラーク・バイオフィルムの除去に適したジェットノズル

噴射ポイントを正確にコントロールしやすいジェットノズルは、叢生や頬舌側転移など、限局した部位へのアプローチに適しています。小窩裂溝に付着したバイオフィルムや、歯列不正部位において噴射角度を調整しながら処置を行いたいケース、ピンポイントに付着したステインの除去などに有効です。歯間部や細部に付着したプラーク・バイオフィルムの除去にも適しており、狙った部位に的確に噴射できることが特長です。

また、噴射範囲が限定されるため、不要な部位への飛散を抑えながら処置を行うことができ、バキューム操作との連携もしやすい設計となっています。

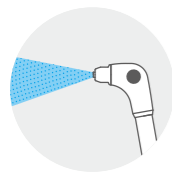

※Varios Combi Proにも使用可能

使用イメージ(歯肉縁上・ペリオジェットノズル)



ペリオ用パウダー

柔らかなパウダーなので軟組織を傷付けにくく、効率的で優しいプロケアを実現します。

▶ P25-28 Powder Maintenance




Perio Mate Powder

広範囲にアプローチ可能なペリオノズル

広範囲に均一に噴射できるペリオノズルは、噴射口が広く設計されており、目視しづらい部位や舌側傾斜の強い歯列にもアプローチしやすい構造です。マルチブラケット装着部位や、プラークコントロールが不良な症例など、広範囲に付着したプラーク・バイオフィルムの除去に適しています。

また、歯列が整っている症例においても、歯面全体にうっすら付着したステインを効率的に除去することができ、メンテナンス時の全顎的な処置にも有効です。さらに、ゴールド冠など比較的軟らかい材質の補綴装置を含む症例も適用しやすく、根尖方向への噴射により歯肉縁下約3mmまでのバイオフィルム除去にも対応可能です。

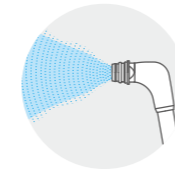


※オプション

使用イメージ(歯肉縁上・ペリオノズル)



ペリオノズルとノズルチップで縁下へのアプローチ

ペリオ用チャンバーは、プロフィール用比べて噴射力が約20%低く設定しています。歯肉縁下での使用に配慮した出力特性となっており、繊細な操作が求められる部位にも安定した噴射を維持します。細くて薄いノズルチップは、歯肉縁下3~9mmまでのポケット内へのアプローチができます。根分岐部やエナメル質形成不全に起因するポケット形成部位など、複雑な形態を有する部位にも対応可能です。使用時は、モード選択を行い、噴射部位や患者さまの状態に合わせてパウダー流量と水量を調整してください。また、口腔内の状況を確認しながら、低いパワーから徐々に設定を上げていくことを推奨します。

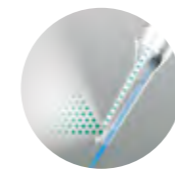

※オプション


使用イメージ(歯肉縁下・ペリオノズル+ノズルチップ)




歯肉縁下へのアクセス性を追求したプラスチックノズル

柔軟性があるノズルチップは、歯牙の豊隆に沿ってしなやかに曲がるため、挿入もしやすく、隣接する歯根部にもスムーズにアプローチできます。視認性の高い半透明の材質を採用しており、歯肉縁下への挿入位置も確認しやすい構造です。ノズルチップは、患者さまごとに交換する滅菌済みディスプレイタイプで開封直後から使用できます。

製品名 ペリオメイトノズルチップ
製品番号 Y1002741
標準価格 ¥6,500
• 40本入

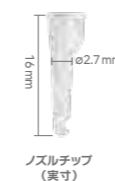

ノズルチップ (実寸)

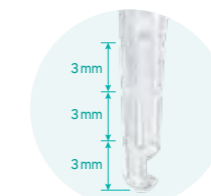

▲3mmごとに施術時の目安になる印が入っています



オプション

製品名	製品番号	標準価格
ペリオノズルセット	Y1500967	¥23,000

セット内容


- ペリオノズル・ペリオメイトノズルチップ(40本)
- ペリオメイトノズルチップリムーバー 他付属品

POWDER PROPHY-SYSTEM



安定したパウダー噴射を実現

パワフルで安定したパウダー噴射を実現するために、タービン開発において培った流体解析技術を応用し、チャンバー内での効率的なパウダーの流れを実現。パウダー・水・エアーのスムーズな噴射を可能にし、効率よく施術を行います。

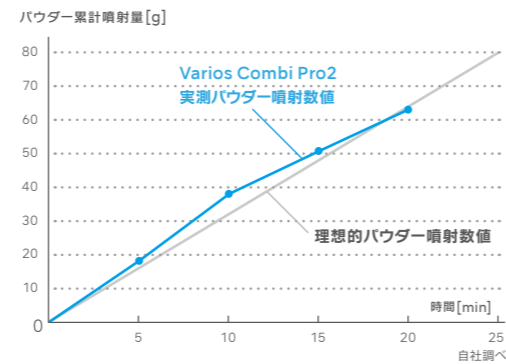

操作性が高く、歯肉縁上のステインや ブラーク・バイオフィルム除去に適したプロフィーノズル

アクセス性に優れたスリムなハンドピースと長く細いノズル形状により、歯肉縁上のステインやブラーク・バイオフィルムにアプローチできます。頬側では口角の過度な牽引を必要とせず、舌側では十分な術野を確保しながら舌の排除操作を最小限にできるため、術者の操作性と患者さまの快適性を両立します。



使用イメージ(歯肉縁上・プロフィーノズル)



画像提供：真光歯科医院(奈良県奈良市)

プロフィー用パウダー

歯面へのダメージを抑え、スピーディーにステインやバイオフィルムを落とします。

➡ P25-28 Powder Maintenance



FLASH pearl

SOFT pearl

操作性の追求

ユニットとチャンバーが完全に独立

チャンバーからハンドピースまでを一体化。ユニットから独立構造になっているため、万一粉詰まりが発生した場合は、ユニットを分解するなどの面倒な修理のリスクが低減されます*。また、個々のパーツ交換が可能なため、販売店やメーカーに送る必要はございません。*本体内部は、エアーと水の回路のみで構成されるスマートコンセプトに基づいた設計です。



スマートディスプレイパネル

スマートディスプレイパネルには、使用モードの設定をシンプルに表示。視認性が高く、簡単で直感的な操作が行えます。



直感的に10段階で調整可能な注水量

水量調節にはダイヤル式を採用。正確かつ直感的にコントロールが可能。左右のダイヤルは、超音波スケーラーとパウダー機能に対応しています。



患者さまの快適性

ヒーティングシステム

超音波スケーラーとパウダーハンドピースの両方に水回路ヒーターを搭載しています。知覚過敏の方を含め、患者さまに優しく快適な微温水での施術が提供可能です。

優れたメンテナンス性

オートクリーニング

日々のメンテナンスをもっと簡単にできるようにしたい、操作が煩わしい等のユーザーの声から、もっと身近に簡単にできるような設計されました。オートクリーニング機能には4つのモードがあり、各患者さまの施術後や1日の終わり等、状況に応じて対応できます。超音波モードとパウダーモードの各種ハンドピース、ハンドピースホース内の残留水や残留粉を除去することで、水詰まりや粉詰まりのリスクを軽減し、各回路内部を定期的にメンテナンスすることが可能です。



Pモード



- パウダーハンドピースホースからの残留水の除去
- パウダー回路(パウダーハンドピースホースとチャンバー)からの残留粉の除去
- チャンバー内からのエア抜き

W(超音波)モード



- 超音波ハンドピースコードからの残留水の除去

W(パウダー)モード



- パウダーハンドピースホースからの残留水の除去
- パウダーハンドピースホースからの残留粉の除去
- チャンバー内からのエア抜き

D(デュアル)モード



- パウダーハンドピースホースと超音波ハンドピースコードからの残留水の除去
- パウダー回路(パウダーハンドピースホースとチャンバー)からの残留粉の除去
- チャンバー内からのエア抜き

CLM機能

CLM機能(Cleaning Mode)は、ユニット内の水回路に過酸化水素水(濃度0.3 wt%)を充填させることで、微生物の付着を防止し、増殖を抑制する機能です。定期的を実施することで水回路を清潔に保つことが可能です。

※CLMキット、CLMモジュールセットはオプション品です。



注水ボトルセットを取り外し、CLMボトルセットを装着



Varios Combi Pro2 + CLM モジュール

ワイヤレス多機能フットコントロール

ワイヤレス接続によりコードの長さを気にせず、フットコントロールを最適な位置に配置できます。Varios Combi Pro2のフットコントロールはBluetooth®で接続し、様々な機能が簡単に操作可能となることで、施術に集中できます。





パワーダウン



操作モード / リンス
(スリープモードが有効な場合、ボタンを踏んでスリープモードを解除)




ON / OFF



パワーアップ

超音波モード


歯周治療だけでなく、根管治療、修復処置に対応する力強いパワーから微細なパワーの調整が可能なP,E,Gの3つのモード切替と10段階の細かいパワー調整が行えます。

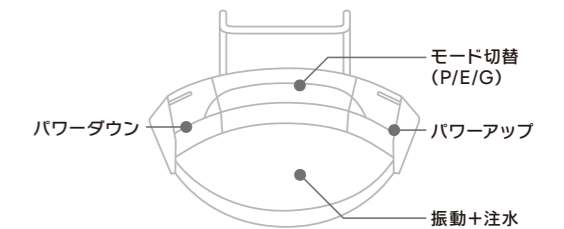


モード切替 (P/E/G)
パワーダウン
パワーアップ
振動+注水

パウダーモード

口腔内の状況に応じて、10段階のパウダー流量調整が行えます。リンス機能はエアと水が噴射され、口腔内の洗浄が可能。3wayシリンジに持ち替えなくても、スイッチ一つで口腔内の残留パウダーの洗い流しが行えます。

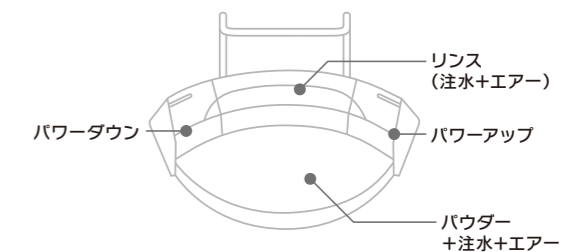

リンス (注水+エア)
パワーダウン
パワーアップ
パウダー+注水+エア

Varios Combi Pro2 オートクリーニング Pモード(パウダー)		Varios Combi Pro2 オートクリーニング Wモード(超音波)		Varios Combi Pro2 オートクリーニング Wモード(パウダー)	
Varios Combi Pro2 オートクリーニング Dモード(超音波とパウダー)		Varios Combi Pro2 CLMモジュールセット 動画 CLMモード		Varios Combi Pro2 水回路のメンテナンス 動画 CLMモード	

iCart Prophy2 注水ボトルセット付

大容量の注水ボトルセット付の専用カートは、使いやすさと利便性を考えて開発しました。独立した給水システムにより外部からの水の供給が難しい場所や水質が懸念される環境でも使用可能です。



<背面イメージ>
カートの支柱裏面に電源コード・各ホースの配線を収納。背面カバーで見た目もスッキリとまとめることが可能



製品名	製品番号	標準価格
iCart Prophy2	Y1500697	¥150,000

セット内容
 • iCart Prophy2 • 注水ボトルセット • 水ホース
 • ホース(0.7 m) • ホース(3.6 m) • 圧抜きキャップ

仕様
 • 寸法:W 432 × D 452 × H 814 mm (キャスターを含む)
 • 重量:16.0 kg (注水ボトルを除く)
 • ボトル最大容量:950 mL
 • 供給空気圧:0.45 - 0.75 MPa (4.5-7.5 kgf/cm²)
 • 供給水圧:0.1 - 0.2 MPa

Varios Combi Pro2 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
Varios Combi Pro2 プロファイセット	Y1500737	¥750,000

セット内容
 • コントロールユニット • プロファイチャンバー2 • プロファイホース2
 • パウダーハンドピース(プロファイ用)
 • パリオス2ハンドピース(ライト付) • 超音波ハンドピースコード
 • 注水ボトルセット(400 mL) • ワイヤレスフットコントロール(ハンガー付)
 • スケーリング用チップ2本 / ペリオ用チップ1本
 • フラッシュバルブ(300 g × 1本) 他付属品

製品名	製品番号	標準価格
Varios Combi Pro2 ペリオセット	Y1500738	¥750,000

セット内容
 • コントロールユニット • ペリオチャンバー2 • ペリオホース2
 • パウダーハンドピース(ペリオ用:ジェットノズル)
 • パリオス2ハンドピース(ライト付) • 超音波ハンドピースコード
 • 注水ボトルセット(400 mL) • ワイヤレスフットコントロール(ハンガー付)
 • スケーリング用チップ2本 / ペリオ用チップ1本
 • ペリオメイトパウダー(160 g × 1本) 他付属品



仕様
 • ユニット寸法:W 249 × D 290 × H 115 mm (注水ボトル・各チャンバー除く)
 • ユニット重量:3.5 kg (注水ボトル・各チャンバー除く)
 • 電源:AC100 - 120V 50/60Hz
 • 駆動周波数(超音波):28-32 kHz
 • 最大出力(超音波):11 W

オプション



製品名	製品番号	標準価格
プロファイキット2	Y1500469	¥175,000

キット内容
 • プロファイチャンバー2 • プロファイホース2
 • パウダーハンドピース(プロファイ用)
 • フラッシュバルブ(300 g × 1本) 他付属品



製品名	製品番号	標準価格
ペリオキット2	Y1500989	¥175,000

キット内容
 • ペリオチャンバー2 • ペリオホース2
 • パウダーハンドピース(ペリオ用:ジェットノズル)
 • ペリオメイトパウダー(160 g × 1本) 他付属品



製品名	製品番号	標準価格
ペリオノズルセット	Y1500967	¥23,000

セット内容
 • ペリオノズル • ペリオメイトノズルチップ(40本)
 • ペリオメイトノズルチップリムーバー 他付属品



製品名	製品番号	標準価格
CLM キット	Y1500879	¥11,000

セット内容
 • CLMボトルセット • CLMホルダー



製品名	製品番号	標準価格
CLM モジュールセット	Y1500740	¥35,000

セット内容
 • CLM スタンド
 • CLM プロファイアタッチメント
 • CLM ペリオアタッチメント

Varios 970 超音波スケーラー

スマートなデザインに、使える高機能を凝縮

超音波スケーラーに必要な機能をコンパクトに凝縮した、バリオス970。
大容量2ボトルシステムの採用で、注水への不安を感じず、安心して施術に専念できるようになりました。
また、シームレスなポティーデザインは日常のメンテナンスも容易に行えます。



視認性の高い大型LEDディスプレイ

パワー表示が10段階の数字とバーグラフで確認できる大型LEDディスプレイ。ボトル水量も10段階のバーグラフで確認することができます。また、直感的に操作できるアイコンキーで押し間違いなどを防止。



大容量ボトル

片手で簡単に着脱できる2つのボトルで、治療目的に合わせて消毒液や温水が使用できます。ボトルの容量は400 mLで、十分に注水時間を確保できチエアタイムの短縮にも繋がります。



オートクリーニング機能

注水回路を自動洗浄するオートクリーニング機能を搭載。消毒液使用后、ボトルに水を入れオートクリーニングキーを押すだけで、注水回路を自動的に洗浄します。



耐久性に優れたライト付チタン製ハンドピース

従来の樹脂製ハンドピース本体にチタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。



ライト付チタン製ハンドピース



バリオス 970 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA970 LUX Ti	Y1500248	¥310,000
—	VA970	Y1500793	¥260,000

セット内容

- コントロールユニット・バリオス2ハンドピース(ライト付/ライト無し)
- ハンドピースコード・フットコントロール(FC-70)・スケーリング用チップ3本
- 水フィルターセット・水供給用コネクター・チップ交換レンチ(3個・CR-10)
- VAボトル(2本・400 mL)・滅菌ケース 他付属品

仕様

- ユニット寸法：W160 × D270 × H190 mm(ボトル含む)
- ユニット重量：2.1 kg・ボトル容量：400 mL(×2本)
- 電源：AC 100 V 50/60 Hz・発振周波数：28-32 kHz
- 最大出力：11 W(Gモード時)



▲ ライト付セット(ライト付チタン製ハンドピース)

チタン製ハンドピース対象製品

ライト付セットのバリオス2ハンドピースが、チタン製になりました。

Varios 370 超音波スケーラー


高性能を、よりシンプルに、コンパクトに

コンパクトボディに、iPiezo engine®搭載。
 設置場所を選ばない超音波スケーラーです。
 使い勝手や好みに合わせて取り付ける位置を自由に選ぶことができ、
 スタイリッシュなデザインはどんな診療室にも違和感なくしっくりと調和します。
 見やすく感覚的に使える操作パネルをはじめ、
 術者にとって使いやすさを考慮した工夫を盛り込みました。




コンパクトボディ

軽量でコンパクトなボディは、場所を選ばずチェアユニットに設置できることが魅力です。コンパクトボディの中に「iPiezo engine®」を搭載し、パワフルかつ繊細なスケーリングが行えます。

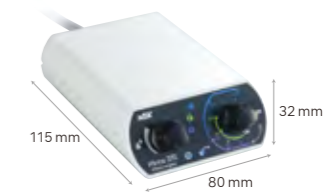

取付けバリエーションが広がるコントロールユニットホルダー

使用時には、前後にスライドさせることで、見やすい位置に調整することができます。また、ホルダーにはハンドピースコードを固定することができ、使用中もコードが邪魔になりません。

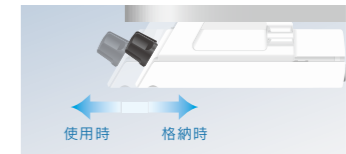

設置例

取付け位置のバリエーションが広がる各種取付けホルダーを用意しています(一部オプション)。



耐久性に優れたライト付チタン製ハンドピース

従来の樹脂製ハンドピース本体にチタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。



ライト付チタン製ハンドピース



バリオス 370 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA370 LUX Ti	Y1500792	¥204,000
—	VA370	Y1500794	¥153,000

セット内容

- コントロールユニット(ハンドピースコード付)
- バリオス370/370LUX ACアダプター・コントロールユニットホルダー
- バリオス2ハンドピース(ライト付/ライト無し)・スケーリング用チップ2本
- ハンドピースホルダー・フットコントロール(FC-71)・水フィルターセット
- 水供給用コネクター・チップ交換レンチ(CR-10) 他付属品

仕様

- ユニット寸法: W 80 × D 115 × H 32 mm(つまみとコード除く)
- ユニット重量: 430 g(ハンドピース除く)
- 電源: AC 100 V 50/60 Hz・発振周波数: 28-32 kHz
- 最大出力: 11 W(Gモード時)




▲ ライト付セット(ライト付チタン製ハンドピース)

チタン製ハンドピース対象製品

ライト付セットのバリオス2ハンドピースが、チタン製になりました。

TIP VARIATION

チップの数だけ超音波スケーラーの臨床の幅が広がります
口腔内の状況に合わせて選べる、豊富なチップラインナップ。

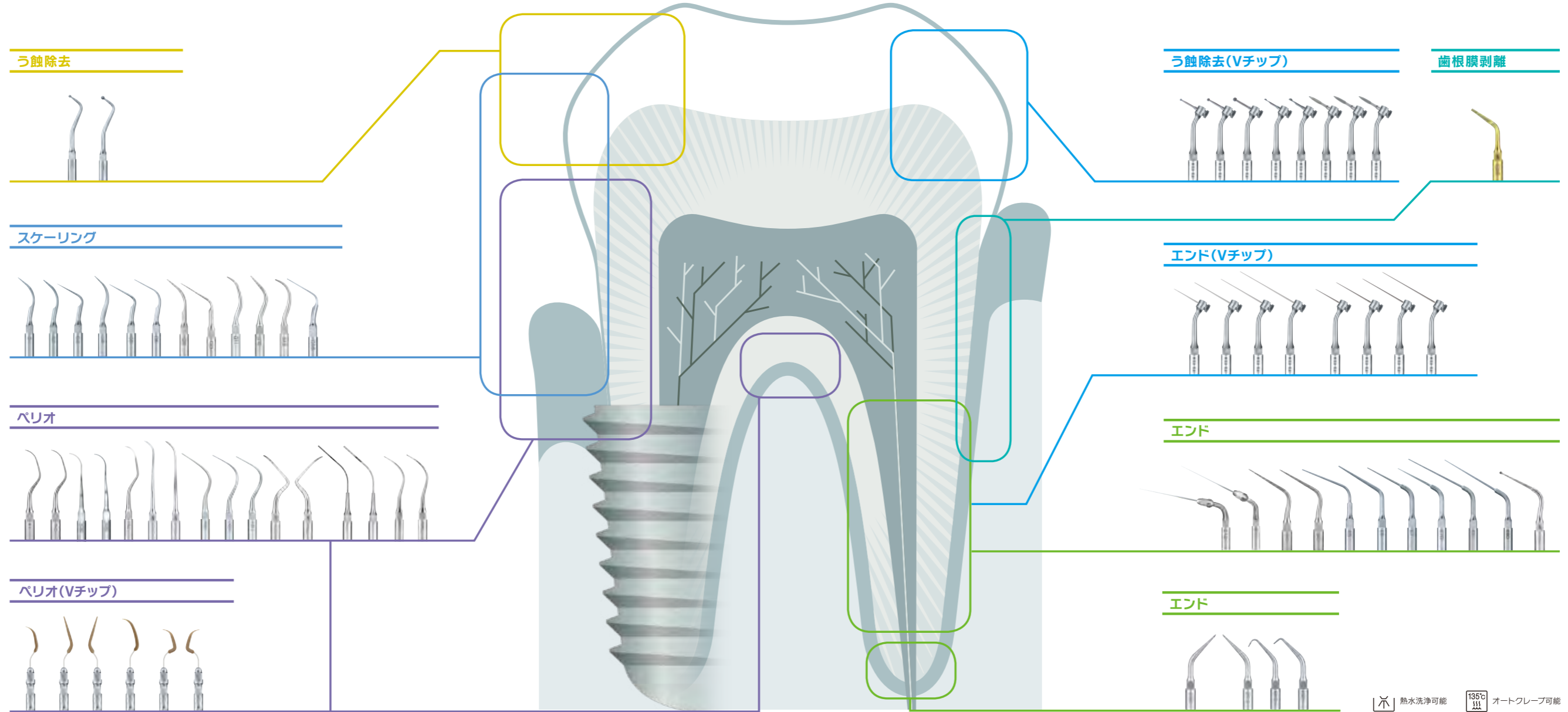

熱水洗浄可能 135℃ オートクレーブ可能

スケーリング/ペリオチップの断面・先端の種類と特長

パリオスチップは外観の違い以外にも断面形状や材質、表面の加工などに違いがあります。症例や付着物の状態に合ったチップを選択することで、歯面や軟組織に負担をかけずに効果的にご使用いただけます。

断面形状・チップ	チップ先端の材質	除石効果	歯質への優しさ	用途・内容	断面形状・チップ	チップ先端の材質	除石効果	歯質への優しさ	用途・内容
G1, G5, G6 G8, G9, G16	金属 鏡面加工	◎	△	歯肉縁上・縁下の除石	P10 P11R/L, P26R/L	金属 シャープエッジ	◎	△	歯肉縁下の除石
P1, P20 P21R/L, P25R/L	金属 鏡面加工	△	◎	歯肉縁上・縁下の ステイン除去 バイオフィーム除去	P40, P41	金属 先端側方2孔注水	×	◎	イリゲーション
P1D, P2D, P3D	金属 ダイヤモンド加工	○	○	歯肉縁下 (隣接面・分岐部)の 除石	V-P10, V-P11R/L V-P12, V-P26R/L	プラスチック	△	◎	補綴装置

チップの詳細は、
ウェブサイトをご覧ください。



■パリオス用のチップは下記の認証品目に含まれています。
販売名:パリオスコンビ Pro2 認証番号:307ALBZX00024000 販売名:パリオス 970 認証番号:223ALBZX00032000 販売名:パリオス 370 認証番号:223ALBZX00037000
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器 ※チップは特定保守管理医療機器非該当

Prophy-Mate neo 歯面清掃用ハンドピース

恋スル白い歯を創る、プロフィーメイト neo

歯肉縁上用の専用パウダーとの組合せで高い効果を発揮する、ハンディータイプの歯面清掃用ハンドピース。
ナカニシ独自のツインノズルにより、
パワフルなパウダー噴射を実現しました。
アクセス性に優れ口腔内で操作しやすい
スリムなハンドピース。
歯間部など、細かい部分も
効率的でスピーディーなクリーニングが可能に。
人間工学に基づいて作られたグリップ感の高いフォルムが、
しなやかな操作を実現します。



ツインノズルでパワフルな噴射力を持続

ナカニシ独自のツインノズルにより、パワフルかつなめらかでパウダーロスの少ない安定した噴射を実現。高い噴射持続力とポリッシング能力で、チエアタイムを短縮しながら効率的な成果が得られます。



※結果を保証するものではありません。

操作性に優れた2種類のノズル

長くて小さいノズルは、患者さま・術者の負担を軽減。頬側では必要以上にハンドピースで口唇を広げることなく、舌側では広い術野の確保が可能です。また、ノズルの角度は前歯部に適した60°と臼歯部に適した80°があり、施術箇所に応じて使い分けることで、クリーニング効果を最大限に発揮します。



指先で簡単に回せるハンドピース

スリムでくるくる回せるハンドピースは、使用角度の調整が行いやすく、無理な挿入角度や姿勢をとらずに施術が行えます。



ワンタッチ着脱

カップリングへの接続、ハンドピース接続のいずれもワンタッチで簡単に着脱できます。









プロフィー用パウダー

歯面へのダメージを抑え、スピーディーにステインやバイオフィルムを落とします。➡ P25-28 Powder Maintenance

ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。

	NSK	モリタ	ヨシダ	オサダ	KaVo®	Dentsply Sirona®
製品名	PMNG-PTL-P	PMNG-MR-P	PMNG-YS-P	PMNG-FJ-P	PMNG-KV-P	PMNG-SR-P
製品番号	Y135029	Y1001297	Y1001968	Y1001954	Y135030	Y135031
標準価格	¥159,000	¥159,000	¥159,000	¥159,000	¥159,000	¥159,000
対応 カップリング	 NSKカップリング	 モリタ αメインチューブ	 ヨシダクイックジョイント (ライト付ヨシダタイプジョイントのみご使用いただけます)	 オサダ ファインジョイント	 KaVo® Multiflex®	 Sirona® Quick coupling

セット内容

- プロフィーメイト neo ハンドピース(ノズル60°、ノズル80°付)・パウダーケース
- パウダーケースカバー 予備1個・フラッシュバル(15g入)×5袋・フロアーノズル
- リングレンチ・掃除用ワイヤー(大・小)、掃除用ファイル、掃除用ブラシ・タービン用オイル

使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

Perio-Mate 歯面清掃用ハンドピース

美しく健康な歯を創る、ペリオメイト

スケーラーなどの接触機器ではチップが届かず付着物を除去できなかった箇所も、非接触での清掃を可能にする歯肉辺縁・線下用ハンティタイプ歯面清掃用ハンドピース。広範囲のパウダー噴射でバイオフィルムの取り残しをできる限りなくし、チェアタイムを短縮しながら、通常より効率的に成果を得られます。術者にとっても、患者さまにとっても快適な、パウダーメンテナンス体験がここから始まります。




効率的で、歯にも優しいプロケア

使用中のチェアユニットにワンタッチで接続が可能なハンティタイプ、パウダーメンテナンスを既存設備のまま手軽に導入できます。粉詰まりのリスクが少ない、パウダー経路が短くシンプルな構造。スピーディーで効果的なバイオフィルムの除去ができます。



パウダー流量調整が可能

口腔内の状況に応じてパウダー流量の調整が手元で簡単に行えます。調整リングを指先で回すだけでパウダー流量を調整可能。リングを絞ることによりパウダーを止めることができ、患部の洗浄も行えます。

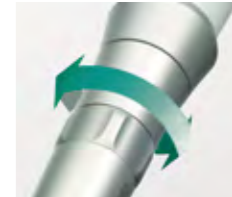

360°回せるハンドピースとノズルチップ

ハンドピースとノズルチップは指先で容易に回すことが可能。隣在歯や豊隆部などの影響を受けにくく、ノズルチップを歯面に沿わせることができます。ノズルチップを回すことで、効果的な噴射位置を保つことができ、無理な使用角度での挿入・操作が減少します。▶ P08 Perio Mate Nozzle Tip



狭い口腔内でも操作が容易なスリムノズル

スリムノズルは狭い口腔内でも広い作業域と、高い視認性を実現。細長いノズル形状は、頬粘膜や口唇の干渉を受けにくくなっています。アクセスが困難な部位へのアプローチもスムーズに行え、ノズルチップの挿入向きを妨げません。また、臼歯部の歯間などハンドピースの挿入が難しい部位でも広い視野を確保することができます。









ペリオ用パウダー

柔らかなパウダーなので組織を傷付けにくく、効率的で優しいプロケアを実現します。

▶ P25-28 Powder Maintenance

ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。

	NSK	モリタ	ヨシダ	オサダ	KaVo®	Dentsply Sirona®
製品名	PER-PTL-P	PER-MR-P	PER-YS-P	PER-FJ-P	PER-KV-P	PER-SR-P
製品番号	Y1003009	Y1002661	Y1002663	Y1002664	Y1003010	Y1003011
標準価格	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000
対応 カップリング	 NSKカップリング	 モリタ αメインチューブ	 ヨシダクイックジョイント (ライト付ヨシダタイプジョイントのみご使用いただけます)	 オサダ ファインジョイント	 KaVo® Multiflex®	 Sirona® Quick coupling

セット内容

- ペリオメイトハンドピース・パウダーケース・パウダーケースカバー予備
- ペリオメイトパウダー(160g入×1本)・ペリオメイトノズルチップ(40本)・ペリオメイトノズルチップリムーバー
- フロアーノズル・リングレンチ・掃除用ワイヤー(大・小)、掃除用ファイブ、掃除用ブラシ・タービン用オイル

使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

Powder Maintenance

パウダーメンテナンス

歯を美しく健康な状態に保つために

大切な患者さまの歯を美しく健康な状態を保つためには、患者さま自身による日常のケアはもちろんですが、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアも欠かすことができません。その方法として、歯肉縁上から歯肉縁下のステイン、バイオフィルムを除去することができる「パウダーメンテナンス」があります。

「パウダーメンテナンス」を安心して行うために、その効果や使い方、注意点をしっかりと理解して、あなたにとっても患者さまにとっても快適なプロフェッショナルケアをぜひ体験してください。

※ナカニシ製の歯面清掃用器具でパウダーを使用したメンテナンスを、ナカニシでは「パウダーメンテナンス」と位置付けています。



パウダーメンテナンスの使い分け

歯肉縁上のパウダーメンテナンス (プロフィードシステム)	歯肉縁上・縁下のパウダーメンテナンス (ヘリオシステム)				
<p>歯面清掃用器具</p> <p>Prophy-Mate neo</p> <p>緑上 プロフィーノズル</p> <p>Varios Combi Pro2</p> <p>緑上 ジェットノズル*</p> <p>緑上 ペリオノズル</p> <p>緑下 ペリオノズル+ノズルチップ</p> <p>Perio-Mate</p>	<p>部位</p> <p>緑上</p> <p>緑上</p> <p>緑下 (歯周ポケット)</p>	<p>対象</p> <p>天然歯</p> <p>補綴装置*1 (SOFT pearlのみ)</p>	<p>対象</p> <p>天然歯</p> <p>補綴装置</p>	<p>使用パウダー・粒子</p> <p>FLASH pearl (炭酸カルシウム)</p> <p>平均粒子径 54μm SEM画像(x150)</p> <p>SOFT pearl (グリシン)</p> <p>平均粒子径 65μm SEM画像(x150)</p>	<p>使用パウダー・粒子</p> <p>Perio Mate Powder (グリシン)</p> <p>平均粒子径 25μm SEM画像(x150)</p>
<p>対象</p> <p>天然歯</p> <p>補綴装置*1 (SOFT pearlのみ)</p>	<p>対象</p> <p>天然歯</p> <p>補綴装置</p>	<p>使用パウダー・粒子</p> <p>FLASH pearl (炭酸カルシウム)</p> <p>平均粒子径 54μm SEM画像(x150)</p> <p>SOFT pearl (グリシン)</p> <p>平均粒子径 65μm SEM画像(x150)</p>	<p>使用パウダー・粒子</p> <p>Perio Mate Powder (グリシン)</p> <p>平均粒子径 25μm SEM画像(x150)</p>		
<p>使用パウダー・粒子</p> <p>FLASH pearl (炭酸カルシウム)</p> <p>平均粒子径 54μm SEM画像(x150)</p> <p>SOFT pearl (グリシン)</p> <p>平均粒子径 65μm SEM画像(x150)</p>	<p>使用パウダー・粒子</p> <p>Perio Mate Powder (グリシン)</p> <p>平均粒子径 25μm SEM画像(x150)</p>				


*1: 露出した象牙質、エナメル質のう蝕、コンポジットレジン及び金の詰め物には直接噴射しないこと。[それらの表面に傷をつける恐れ]

*2: Varios Combi Pro2使用時

FLASH pearl

- 主成分:炭酸カルシウム
- 平均粒子径 54 μ m
- 使用用途:強固なステインの除去

【施術対象】 歯肉縁上の天然歯

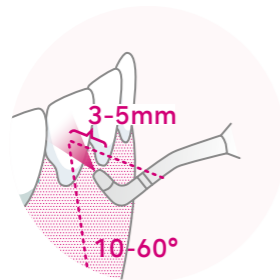

【使用ポイント】

- ノズルは歯面に対して3~5mm離し、10~60°の角度で使用してください。噴射時は球体状粒子のパウダーを歯面に転がすイメージで行います。
- 術後は再沈着の抑制および歯面の平滑化を目的として、粒度の細かいペーストとラバーカップを使用し、低速回転で仕上げ研磨することを推奨します。



製品名	製品番号	標準価格
フラッシュパール	Y900698	¥19,500

• 300g × 4本



製品名	製品番号	標準価格
フラッシュパール (100袋入)	Y900693	¥24,500

• 15g × 100袋


SOFT pearl

- 主成分:グリシン
- 平均粒子径 65 μ m
- 仕上げ研磨不要
- 使用用途:軽度から中等度のステインやバイオフィルムの除去

【施術対象】 歯肉縁上の天然歯、補綴装置*



画像提供: 真光歯科医院(奈良県奈良市)

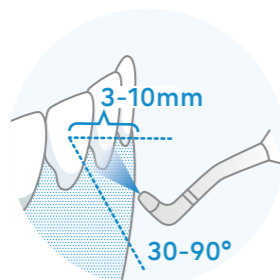

【使用ポイント】

- ノズルは歯面に対して3~10mm離し、30~90°の角度で使用してください。軽度から中等度のステインやバイオフィルムの除去に効果を発揮します。



製品名	製品番号	標準価格
ソフトパール	Y1500721	¥21,800

• 250g × 4本

Perio Mate Powder

- 主成分:グリシン
- 平均粒子径 25 μ m
- 仕上げ研磨不要
- 使用用途:バイオフィルム・軽微なステインの除去

【施術対象】 歯肉縁上、歯肉縁下、補綴装置




製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトパウダー	Y900938	¥9,000

• 160g × 2本


【使用ポイント】 歯肉縁上 <ジェットノズル使用時>

- [歯肉縁上の軽微なステインの除去]ノズルを歯面に対して3~10mm離し、30~90°の角度で使用してください。

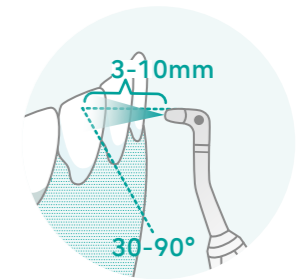


【使用ポイント】 歯肉縁上・歯肉辺縁 <ペリオノズル使用時>

- [歯肉縁上の軽微なステインの除去]ノズルを歯面に対して3~10mm離し、30~90°の角度で使用してください。小さく円を描くように動かします。
- [歯肉辺縁(歯周ポケット内3mm未満程度まで)のバイオフィルムの除去]ノズルを歯肉辺縁に向け、歯面に対して5~10mm離し、30~60°の角度で使用してください。歯面全体に噴射するようゆっくり動かします。

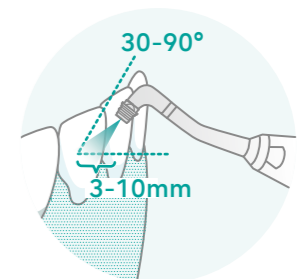

【使用ポイント】 歯肉縁下(歯周ポケット) ペリオノズル+ノズルチップ使用時

- [歯周基本治療を行った9mm以下の歯周ポケット内バイオフィルムの除去]ノズルチップを3mm以上の歯周ポケット内までゆっくり挿入してください。ポケット数値に応じて挿入する深さを調節してください。ノズルチップはパウダーの噴射方向に沿って使用します。歯周ポケット内で上下運動させながら、噴射するのがポイントです。(同一の歯周ポケット内での噴射は最大5秒)

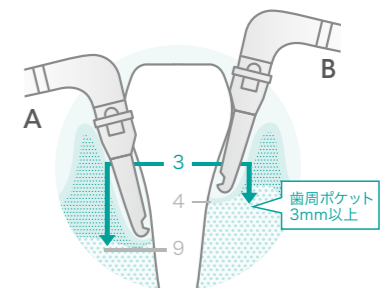

A: 歯周ポケット9mm以下の場合
B: 歯周ポケット4mmの場合

Ti-Max S970 エアースケーラー

幅広いケアに対応するエアースケーラーの進化形


スケーリング / ペリオ / ソニックブラシ / う蝕除去 / 形成 / エンド

安定した振動をチップやブラシに供給することで、
 強固な歯石の除去からメンテナンス・
 歯面清掃・支台歯形成の最終仕上げまで、
 幅広い術式に対応可能。
 LEDライトとガラスロッドの
 相乗効果で術野を鮮明に照らし出すとともに、
 コンパクトかつスリムなチタン製ポティーにより、
 口腔内での高いアクセス性と広い術野を確保します。
 軽量なチタン製ポティーの採用により手首への負荷を軽減。
 術者にとっても、患者さまにとっても優しい、
 治療の幅を広げるエアースケーラーです。




安定した振動をチップに供給

S970シリーズはチップに対する負荷が大きくなって
 もパワーが落ちにくく、この安定性が効率的で効果的な
 施術を可能にします。また、エアースケーラーは電磁波
 を発しないことから、ペースメーカーなど、使用する機
 器に制限のある患者さまにも安心して使用できます。

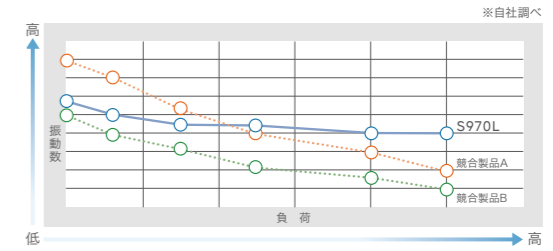

口腔内における操作性と視野の確保を追求

S970シリーズのスリムなポティーは、届きにくい最後
 臼歯遠心部等へのアクセスを容易にし、施術のストレ
 スを軽減。さらに効率的な施術を実現することでチェ
 アータイムを短縮し、術者に優しく、患者さまにも優し
 い治療を実現します。

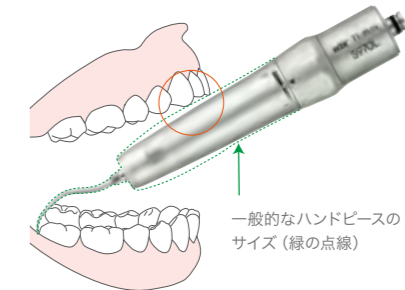

パワーコントロール機能

S970シリーズ独自のパワーコン
 トロール機能は3段階で出力調
 節ができ、症例に応じた最適な
 パワー設定が可能です。



用途	使用チップ	パワーレベル		
		1	2	3
スケーリング	S1, S2, S3	←	←	←
ペリオ	S10, S20, S21R, S21L	←	←	←
ペリオ(Vチップ)	S35+Vチップ (V-P10-A, V-P11R-A, V-P11L-A, V-P12-A)	←	←	←
ソニックブラシ	S50+各種ブラシ (S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2)	←	←	←
う蝕除去	S65D, S66D, S67D, S68D	←	←	←
形成	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←	←	←
う蝕除去(Vチップ)	S75+Vチップ (V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76)	←	←	←
エンド(Vチップ)	S75+Vチップ (V-U15, V-U20, V-U25, V-U30, V-U35)	←	←	←

上記パワーレベルは目安です。症例に応じて低いレベルからご使用ください。

ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。

	NSK		モリタ	ヨシダ	オサダ	KaVo®	Dentsply Sirona®
製品名	S970L	S970	S970ML	S970YL	S970FL	S970KL	S970SL
製品番号	T1005	T1020	T1017	T1035	T1036	T1013	T1015
標準価格	¥186,000	¥146,000	¥186,000	¥186,000	¥186,000	¥186,000	¥186,000
ライト	●	—	●	●	●	●	●
対応 カップリング	NSKカップリング		モリタ αメインチューブ	ヨシダ クイックジョイント	オサダ ファインジョイント	KaVo® Multiflex®	Sirona® Quick coupling








・チタン製ポティー&DURACOAT ・ガラスロッドライト ・3段階パワー調整可能

標準付属

・チップ3種(S1, S2, S3) ・チップカバーL ・チップ交換レンチ(CR-20)


TIP VARIATION

チップの数だけエアースケーラーの臨床の幅が広がります
口腔内の状況に合わせて選べる、豊富なチップラインナップ。

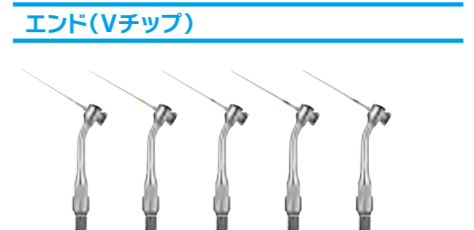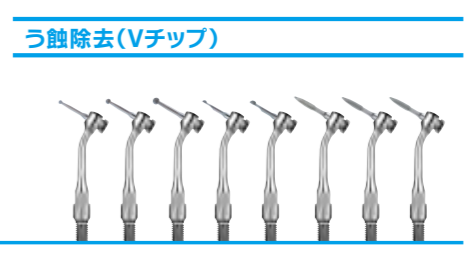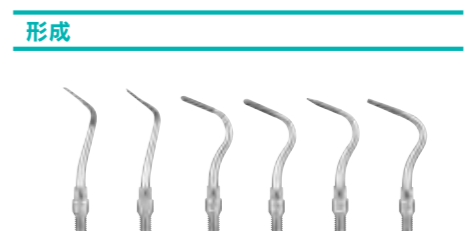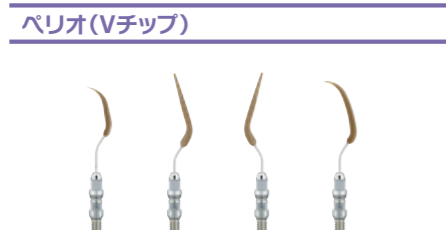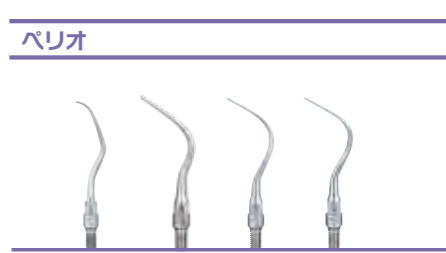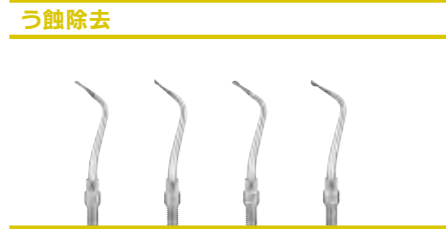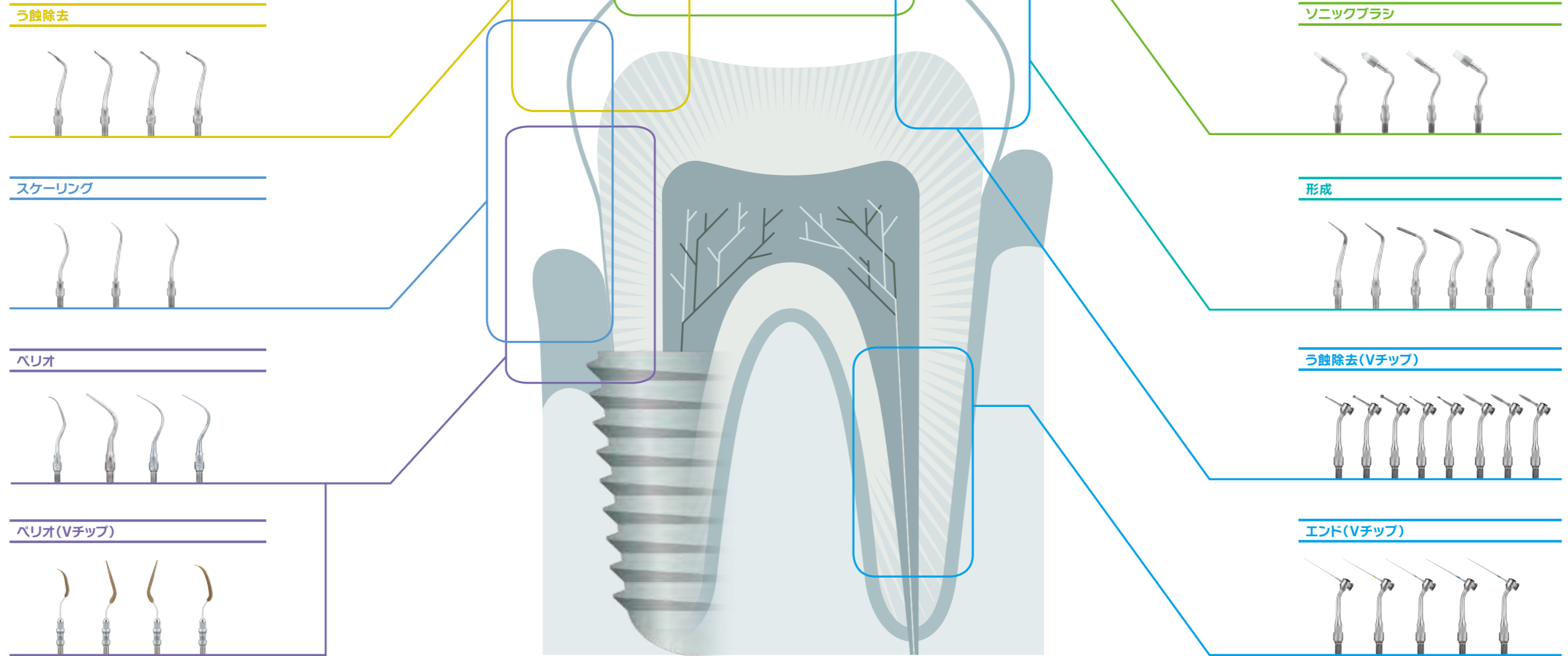

熱水洗浄可能 (S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2除く) 135°C オートクレープ可能

ソニックブラシ

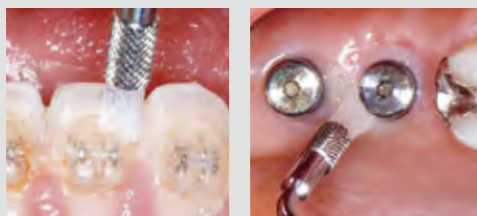

矯正装置周囲 アパットメント

写真提供： 貞光歯科医院 (奈良県奈良市)、モリカグ歯科医院 (埼玉県さいたま市)

エアー圧による音波振動を利用してブラシが振動させ、歯質や補綴装置を傷つけにくく、バイオフィルムなどの除去を行うことができます。また、振動により付着物を除去するため、粘膜の巻き込みリスクを軽減し、ソフトで効率的な清掃が行えます。

形成



J Shapeの除去 ラミネートベニア形成隣接面フィニッシングライン仕上げ

支台歯形成における概形成、軸面形成を回転切削器具で行った後の、フィニッシュラインの形成用に適しています。回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁など、フィニッシュラインを明確に上げることが可能です。トルバードシェイプチップは、ラミネートベニアなど隣接面マーヅンの最終形成に適しています。削りすぎや象牙質露出の危険性が少なく、隣接面においてより保存的な形成が可能となります。

チップの詳細は、[ウェブサイト](#)をご覧ください。



販売名：S50 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアースケーラー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアースケーラー 管理医療機器 特定保守管理医療機器 ※チップは特定保守管理医療機器非該当

iProphy コードレスポリッシングコントラ


軽くて持ちやすい

人間工学に基づいて設計・開発されたエルゴノミックデザイン。軽くて持ちやすく、バランスに優れたハンドピースは、比較的時間のかかる歯面研磨でも、手にかかる負担を軽減します。



超ミニヘッドで見やすい

細くて長い超ミニヘッドは、口腔内での広い視野を確保。よりスムーズで正確な治療を可能にします。

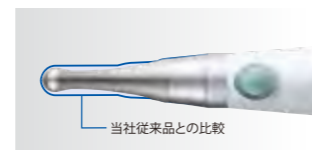

ヘッドラインナップ

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	iFX57	C1102	¥25,800

- プロフィー用
- スクリュー式



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	NAC-F4R	Y110020	¥28,000

- プロフィー用・ラッチ式
- コントラバー用(φ2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	EVA-F	Y110016	¥24,500

- 上下運動ヘッド
- エバチップ用



iProphy 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
iProphy 標準セット	Y1002819	¥100,500

セット内容

- iProphy モーターハンドピース・iFX57ヘッド
- iProphy スタンド・ACアダプター

iProphy サブセット(ヘッド無し)

製品名	製品番号	標準価格
iProphy サブセット	Y1003438	¥74,000

セット内容

- iProphy モーターハンドピース・iProphy スタンド・ACアダプター



Contra-angles ハンドピース

プロフィー用 ハンドピース

Ti-Max X



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X57L	C609	¥106,000
—	X57	C619	¥72,500



特殊防塵機構

- 減速 16:1 • 最高回転速度: 2,500 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURAGRIP • グラスロッドライト
- プロフィー用 • スクリュー式 • 360°回転 • 特殊防塵機構

FX series



安心の2年保証 **2 years**

ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	FX57	C1054002	¥55,000



ペーストディフェンスシステム

- 減速 4:1 • 最高許容回転速度: 5,000 min⁻¹
- プロフィー用 • スクリュー式 • 360°回転
- ペーストディフェンスシステム

EVA用 ハンドピース

Ti-Max X



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X55L	C608	¥136,500
—	X55	C618	¥103,000



チップロック機構付

- 減速 4:1 • 最高回転速度: 10,000 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURAGRIP • グラスロッドライト
- シングルスプレー • プロフィン/エバチップ/オーソファイル用*
- 上下運動(ストローク幅 1.4 mm) • チップロック機構

*金属シャングは不可

EX series


※ヘッドとシャングは別売りとなります



ヘッド			シャング		
製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
EVA-Y	C235	¥13,000	ER4	C634	¥38,000

- 最高許容回転速度: 10,000 min⁻¹
- エバチップ用
- 上下往復(ストローク幅 1.4 mm)

- 減速 4:1

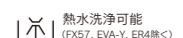

Spare Parts

Varios Combi Pro2

製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-LUX-HP Ti パリオス2ハンドピース (ライト付)		EA1203X 050	¥104,000
パウダーハンドピース プロファイア用		T1074001	¥64,000
パウダーハンドピース ペリオ用		T1077001	¥64,000
パウダーハンドピース ペリオ用 (ジェットノズル)		TA10770 021	¥64,000
プロファイアノズル		T1074012	¥16,500
ペリオノズル		T1077012	¥16,500
ペリオジェット ノズル		TA10770 106	¥16,500
オリングセット ノズル用		Y1003501	¥640
FC-83 ワイヤレス フットコントロール		ZF16020 001	¥91,000
電源コード		U271013	¥3,250
注水ボトルセット 400 mL		UA14240 001	¥8,500
注水ボトル 400 mL		UA14240 100	¥3,500
CLMボトルセット 400 mL		UA14300 001	¥8,500
CLMボトル 400 mL		UA14300 100	¥3,500
ボトル用蓋 注水ボトル/ CLMボトル(400 mL)用		UA14240 101	¥5,000
パッキン 注水ボトル/ CLMボトル(400 mL)蓋用		Y1500962	¥1,600
オリング 注水ボトル/ CLMボトル(400 mL)蓋用		Y1500961	¥320
CLM キット 400 mL		Y1500879	¥11,000
CLMホルダー		ZA00950 103	¥4,500

iCart Prophy2

製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ボトルセット 950 mL		ZA16360 001	¥23,000
注水ボトル 950 mL		ZA16160 112	¥6,000
CLMボトルセット 950 mL		ZA16370 001	¥23,000
CLMボトル 950 mL		ZA16240 100	¥6,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
CLM モジュールセット		Y1500740	¥35,000
CLM プロファイア アダッチメント		ZA16130 114	¥5,500
CLM ペリオ アダッチメント		ZA16130 116	¥5,500
オリングセット CLMモジュール用		Y1500750	¥1,280
プロファイア チャンバー2		UA14220 001	¥73,000
ペリオ チャンバー2		UA14230 001	¥73,000
チャンバー用蓋		UA14220 117	¥23,000
オリングセット チャンバージョイント用		Y1500398	¥1,600
VA2-LUX-SC Ti 超音波ハンドピースコード		EA1414X 061	¥33,000
オリング VA2-LUX-SC Ti用		Y1003546	¥210
プロファイアホース2		TA23120 001	¥40,000
ペリオホース2		TA23160 001	¥40,000
オリングセット パウダーハンドピースホース チャムバー用/チャンパー用 (3個入り)		Y1500741	¥960
オリングセット パウダーハンドピースホース ハンドピース側用		Y1003500	¥640
ホース エアホース 3.6m		UA14210 250	¥3,800
水ホース 3.6m		UA14210 227	¥3,800
注水ポンプ		U1135079	¥5,400
水供給用 コネクタ		U387030	¥7,500
CR-10 チップ交換レンチ		Z221076	¥7,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
ボトル用蓋 注水ボトル/ CLMボトル(950 mL)用		ZA16360 100	¥17,000
パッキン ボトル(950 mL)蓋用		ZA16160 108	¥1,600
オリング ボトル(950 mL)蓋用/ 圧抜きキャップ用		D031210 100	¥210
圧抜きキャップ		ZA16300 001	¥2,800

製品名	製品	製品番号	標準価格
水フィルター ケース		UA14210 259	¥5,000
水フィルター		U387042	¥2,000
Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
チップホルダー パリオス用		Z221A080	¥3,700
チップカパーL		Z217850	¥850
チップカパーS		Z217851	¥540
滅菌ケース		Z1035001	¥5,400
CLA-10 クリーニングアダプター パリオス2ハンドピース用		ZA11900 102	¥10,500
オリング CLA-10用		D0310020 080	¥210
ペリオメイト ノズルチップ リムーバー		T1043751	¥540
タービン用オイル		Z016112	¥800
掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥800
掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥800
掃除用ファイル		T798092	¥1,000
掃除用ブラシ		T798093	¥1,000
リングレンチ		T1074601	¥540
スパナ (12X14)		K133751	¥1,100
配線カパー		ZA16140 124	¥2,200

製品名	製品	製品番号	標準価格
水ホース 0.7 m		ZA16140 121	¥1,200
ホース エアホース 0.7 m		ZA16140 122	¥1,200
ホース エアホース 3.6 m		UA14210 250	¥3,800

Varios 970 / Varios 370

製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-LUX-HP Ti パリオス2ハンドピース (ライト付)		EA1203X 050	¥104,000
VA2-HP パリオス2ハンドピース (ライト無し)		E350050	¥58,000
VA970LUX-SC パリオス2ハンドピース Varios 970 LUX用		E351055	¥25,000
VA970-SC パリオス2ハンドピース Varios 970用		E350055	¥19,500
オリング パリオス2ハンドピース用		D0310020 080	¥210
FC-70 フットコントロール (2.5 m)		Z1008001	¥7,000
FC-71 フットコントロール (5 m)		Z1008002	¥7,000
電源コード Varios 970用		U271013	¥3,250
パリオス370/370LUX ACアダプター プラグ付(5 m)		Y1001788	¥19,000
水フィルターセット(2 m) 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、 水フィルターケース		U387040	¥6,800

iCart Prophy2 / iCart

製品名	製品	製品番号	標準価格
iCart Prophy2		Y1500697	¥150,000
iCart-S		Z298	¥68,000
iCart-L		Z299	¥68,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
水フィルターセット(4 m) Varios 370用 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、水フィルターケース		U1007080	¥9,000
水供給用 チューブ(2 m)		U387580	¥2,200
水供給用 チューブ(4 m) Varios 370用		D0914406 040	¥4,400
チューブ抑え リング (2個セット)		Y900077	¥540
ハンドピース ホルダー Varios 370用		10001505	¥2,100
VA ボトル400セット Varios 970用 (400 mL)		Z1047002	¥6,000
VA ボトル400用蓋 Varios 970用		10000652	¥3,500
VA ボトル400 Varios 970用 (400 mL)		20000947	¥2,500
オリング(細) VAボトル400用		D0312090 100	¥320
オリング(太) VAボトル400用		D0310075 165	¥320

- 仕様
- 寸法: W 432 × D 452 × H 814 mm (キャスターを含む)
 - 重量: 16.0 kg (注水ボトルを除く)
 - ボトル最大容量: 950 mL
 - 供給空気圧: 0.45 - 0.75 MPa (4.5-7.5 kgf/cm²)
 - 供給水圧: 0.1 - 0.2 MPa

- 仕様
- 外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
 - 重量: 10 kg

- 仕様
- 外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
 - 重量: 10 kg

Spare Parts

Prophy-Mate neo

製品名	製品	製品番号	標準価格
PMN-HP ハンドピース (60°ノズル付)		T797010	¥53,000
60°ノズル		T797012	¥16,500
80°ノズル		T797013	¥16,500
パウダーケース カバー		T798133	¥2,000
ゴムパッキン		T798135	¥1,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング ノズルフロント側		D0312039 070	¥320
Oリング ノズルリア側		D0312029 070	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600
PM Oリングセット (3個入)		Y900054	¥960
リングレンチ		T797601	¥540

製品名	製品	製品番号	標準価格
タービン用オイル		Z016112	¥800
掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥800
掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥800
掃除用ファイル		T798092	¥1,000
掃除用ブラシ		T798093	¥1,000

Perio-Mate

製品名	製品	製品番号	標準価格
PER-HP ペリオメイトノズル付		T1043010	¥75,000
ペリオメイト ノズル		T1043012	¥16,500
パウダーケース カバー		T798133	¥2,000
ゴムパッキン		T798135	¥1,000
Oリング ノズルフロント側		D0312039 070	¥320

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング ノズルリア側		D0312023 060	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600
PM Oリングセット (3個入)		Y900054	¥960
リングレンチ		T797601	¥540
ペリオメイト ノズルチップ リムーバー		T1043751	¥540

製品名	製品	製品番号	標準価格
タービン用オイル		Z016112	¥800
掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥800
掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥800
掃除用ファイル		T798092	¥1,000
掃除用ブラシ		T798093	¥1,000

バリオスチップ / エアースケーラーチップ

製品名	製品	製品番号	標準価格
ナット E11, E12, V10用		Z217241	¥2,100
ナット S35用		Z305241	¥2,100

製品名	製品	製品番号	標準価格
チャック S35 Vチップホルダー用		Z252242	¥1,400
チャック V30, S75 Vチップホルダー用		Z217311	¥740

製品名	製品	製品番号	標準価格
固定ネジ V30, S75 Vチップホルダー用		Z217310	¥840
Oリング E11, E12, V10, S35用		D0312017 100	¥320

S970 エアースケーラー

製品名	製品	製品番号	標準価格
CR-20 チップ交換レンチ		Z1090001	¥7,500
Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
チップホルダー エアースケーラー用		Z252A080	¥3,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
チップカバー-L		Z217850	¥850
チップカバー-S		Z217851	¥540

製品名	製品	製品番号	標準価格
S970 Oリングセット (4個入)		Y1001953	¥1,280
パテラスプレーノズル パテラスカップリング式 エアータンク/モーター用		P183090	¥1,100

iProphy

製品名	製品	製品番号	標準価格
iProphy モーターハンドピース		E1117	¥46,000
iProphyスタンド		U1091002	¥15,000
ACアダプタ		Y1002870	¥13,000
Fタイプ スプレーノズル		Z256090	¥1,100

製品名	製品	製品番号	標準価格
NAC-02		C032012	¥2,700
NAC-03 NAC用カートリッジ		C030011	¥3,400
iProphy バッテリーパック		E1080052	¥4,900
NAC-Y フロアー用、ラッチ式 コントローラー用(φ2.35)		C032002	¥14,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
EVA-Y 上下運動ヘッド エバチップ用		C235	¥13,000
FC 等速 1:1		C873	¥11,000
F4R 減速 4:1		C872	¥13,500

ナカニシ製品に関する各種セミナー (NSKアカデミー会員)

より効果的・効率的に製品をご使用いただけるよう、ナカニシ製品(超音波スケーラーやパウダーメインテナンス)に関するセミナーを実施しております。WEBサイトにて、各セミナーの詳細をご確認いただけます。

WEBサイトは
こちらから



オンサイトセミナー

少人数で実施するハンズオン実習セミナーや、多人数参加の講演会を開催



オンラインプライベートセミナー

医院単位で参加できるWEBセミナー



ビデオセミナー

いつでも視聴可能な場所を選ばないオンデマンドセミナー



NSKアカデミー会員について

NSKアカデミーは あなたの成長を支える学びのパートナーです

NSKアカデミーは、歯科医療従事者の皆さまに向けて、臨床に活かせる知識と技術を学ぶ機会を提供するサービスです。業界をリードする講師陣によるプログラムを通して、日々の診療に役立つ実践的な学びをサポートします。*セミナーを受講される際は、NSKアカデミー会員登録が必要となります

新規会員登録は
こちらから



KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F
TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日を除く)
9:00~17:00 ☎ 0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問など、お気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

