

パワフルでスムーズな切削を可能にした3X-Power System

最新の流体シミュレーションソフトウェアを駆使し、給排気をつかさどる「3X-Power System」を搭載。これによりエアを効率よく出力に変換でき、26Wの大幅なパワーアップを実現させました*。*M900L



Extended Cylindrical Nozzle

突出円筒型ノズル



Expanded Rotor Bucket


ローターバケットの拡大



Expanded Exhaust Groove


排気溝の拡大

● 同社従来品とのパワー比較 (自社調べ)

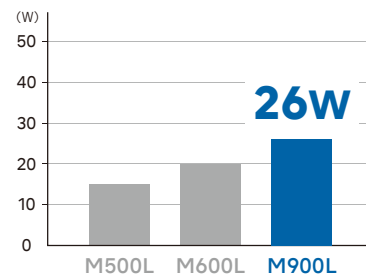


グリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、口腔内の血液、異物などの浸入を防ぐサックバック防止機構です。

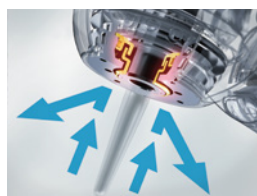


クイックストップ

高速回転を急停止するクイックストップ機能を搭載。口腔内での巻き込み防止等の安全性を向上。これにより、高速回転による効率的な切削と、クイックストップによる安全性の高い治療が可能です。

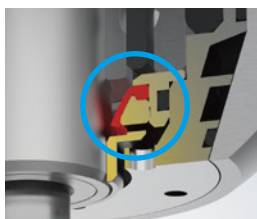

ミニヘッド+100°アングルヘッドによる高いアクセス性 (M micro)

100°アングルヘッドが臼歯部へスムーズにアクセス。ミニヘッドの為、広い視野を確保することが出来ます。口腔内の生理的なカーブ(スピーカーブやウィルソンカーブ)を考慮したデザインで、臼歯部へアクセスした際に、前歯に干渉するリスクが少なく、ストレスを低減した施術が可能です。

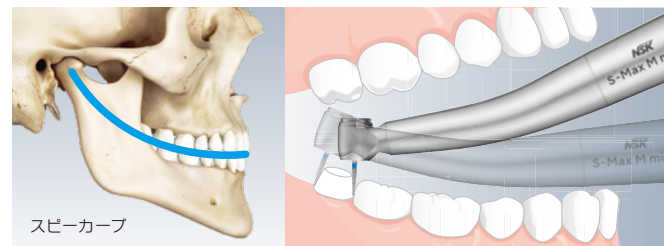

- 100°アングルヘッド* (M micro)
- 90°アングルヘッド (M900 / M800)
- ステンレス製ボディー
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト
- グリーンヘッドシステム
- クイックストップ
- プッシュボタン式チャック
- カートリッジ交換可能
- 3X-Power System
- 4点注水スプレー



トルクヘッド

パワー：26 W
回転速度：325,000-430,000 min⁻¹
300,000-410,000 min⁻¹(YL / FL)
ヘッドサイズ：ø12.1 × H 13.3 mm
スタンダードシャンクバー用



スタンダードヘッド

パワー：23 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹(YL / FL)
ヘッドサイズ：ø10.6 × H 12.4 mm
スタンダード / ショートシャンクバー用




ミニヘッド

パワー：20 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹(YL / FL)
ヘッドサイズ：ø9.0 × H 10.8 mm
スタンダード / ショートシャンクバー用

Air Turbine S-Max pico

- ・90°アングルヘッド
- ・ステンレス製ボディー
- ・セラミックボールベアリング
- ・グラスロッドライト
- ・クリーンヘッドシステム
- ・プッシュボタン式チャック
- ・シングルスプレー

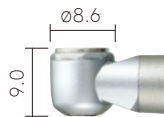


ウルトラミニヘッド
 パワー：9W
 回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
 360,000-430,000 min⁻¹ (YL / FL)
 ヘッドサイズ：φ8.6 × H 9.0 mm
 ショートシャックバー /
 スーパーショートシャックバー用




pico専用バー (標準価格:各¥3,000)

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 製品名 PC1
・3本入 | 製品番号 Y1001817 |
| 製品名 PC2
・3本入 | 製品番号 Y1001818 |
| 製品名 PC3
・3本入 | 製品番号 Y1001819 |
| 製品名 PC3ff
・エクストラファインバー ・3本入 | 製品番号 Y1002019 |
| 製品名 PC4
・3本入 | 製品番号 Y1001820 |

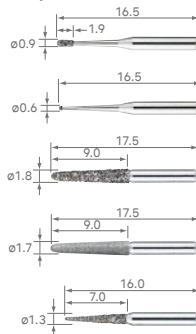

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 製品名 PC4ff
・エクストラファインバー ・3本入 | 製品番号 Y1002020 |
| 製品名 PC5
・3本入 | 製品番号 Y1001821 |
| 製品名 PC5ff
・エクストラファインバー ・3本入 | 製品番号 Y1002021 |
| 製品名 PC6
・3本入 | 製品番号 Y1001822 |
| 製品名 PC6ff
・エクストラファインバー ・3本入 | 製品番号 Y1002022 |

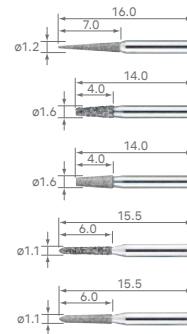

S-Max M900, M800, M micro, pico 各社仕様カップリング

		NSK (ライト付)	NSK (ライト無し)	モリタ	ヨシダ	オサダ	KaVo®	Dentsply Sirona®
M900 トルクヘッド	製 品 名	M900L	M900	M900ML	M900YL	M900FL	M900KL	M900SL
	製品番号	P1254	P1256	P1268	P1270	P1272	P1258	P1262
	標準価格	¥108,000	¥82,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000
M800 スタンダードヘッド	製 品 名	M800L	M800	M800ML	M800YL	M800FL	M800KL	M800SL
	製品番号	P1253	P1255	P1267	P1269	P1271	P1257	P1261
	標準価格	¥108,000	¥82,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000
M micro ミニヘッド	製 品 名	M micro	—	M micro ML	M micro YL	M micro FL	M micro KL	M micro SL
	製品番号	PA2306	—	PA2313	PA2314	PA2315	PA2309	PA2310
	標準価格	¥108,000	—	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000
pico ウルトラミニヘッド	製 品 名	S-Max pico	—	S-Max pico ML	S-Max pico YL	S-Max pico FL	S-Max pico KL	S-Max pico SL
	製品番号	P1140	—	P1146	P1148	P1165	P1142	P1143
	標準価格	¥121,000	—	¥121,000	¥121,000	¥121,000	¥121,000	¥121,000

■回転速度・パワーは、接続するジョイント形状やユニットの排気の状態等によって、差が出る場合もあります。■交換用カートリッジは別売です。

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

販売名:エスマックス MT 認証番号:221ALBZX00001000 販売名:エスマックス pico 認証番号:222ALBZX00024000
 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器
 販売名:picoバー 一般的名称:歯科用ダイヤモンドバー 届出番号:09B2X00016000122 一般医療機器



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本 社 ・ 工 場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
 東京 事 務 所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
 TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
 大阪 事 務 所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
 TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56

受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
 仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



ナカニシ製品取扱店

担当者:

PR-D7085v1 2026-09-07.15.SP