

ハンドピースのメンテナンスを より簡単、確実、効果的に。

EZスプレーは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着することによりオイルでの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく簡単にオイルメンテナンスが行えます。また、各社仕様のエアータービンハンドピースをご使用いただく場合には、各社仕様エアータービン装着用アダプターをご使用ください。



製品名	製品番号	標準価格
EZスプレー標準セット	Y900070	¥25,500

セット内容

- EZスプレーグリップ・コイルチューブ
- グリップホルダー・缶ホルダー
- 切換バルブ・PA用ノズル
- スプレーミスト吸収パック(1パック)

注 意

EZスプレー標準セットは、ナカニシ社製パナスプレープラス専用品です。
なお、パナスプレープラス本体は本セットに含まれておりません。



■コントラアングルハンドピース (E-タイプ仕様)

ライト付 /
ライト無し



■エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド (F-タイプ仕様)



F-タイプアダプター

■エアータービンハンドピース

NSK/パテラス
カップリングタイプ



PTL用ノズル

■各社仕様エアータービン ハンドピース



■各社仕様エアータービン装着用アダプターとEZ-M4アダプターを
組み合わせてご使用ください。

ISO規格Eタイプが
直接接続できます。



製品名	製品番号	標準価格
F-タイプ アダプター エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド用	Z257042	¥10,500
PTL用ノズル	Z229035	¥5,000
EZ-M4 アダプター	Z229040	¥5,250


■各社仕様エアータービン装着用アダプター

各社仕様エアータービンに使用する際は、各社仕様エアータービン装着用アダプターとEZ-M4アダプターを組み合わせでご使用ください。

	KV アダプター ・カボ用	Z257020	¥10,500		YS アダプター ・ヨシダ用	Z257031	¥10,500
	SR アダプター ・シロナ用	Z257023	¥10,500		YS-2 アダプター ・ヨシダ用(ライト無し)	Z257044	¥10,500
	WH アダプター ・W&H用	Z257021	¥10,500		OS アダプター ・オサダ用	Z257032	¥10,500
	BA アダプター ・ビエン・エア用	Z280022	¥10,500		OS-2 アダプター ・オサダ用(ライト無し)	Z257034	¥10,500
	MT アダプター ・モリタ用	Z257030	¥10,500		OS-4 アダプター ・オサダ用(ライト付) ・排気回収タイプ	Z257038	¥10,500
	MH アダプター ・モリタ4H用	Z257048	¥10,500				

EZグリップセット

注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。EZグリップを使用する場所には、エアチューブ(外径φ6mm)のエア配管が必要です。

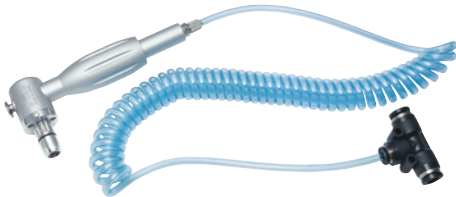

製品名	製品番号	標準価格
EZグリップセット	ZA02290100	¥17,000

- ・EZスプレーグリップ
- ・コイルチューブ
- ・エア配管用継手PEG6-4

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
EZスプレーグリップ		Z229011	¥15,000	缶ホルダー		Z229020	¥4,000	Oリング グリップ用		D0312060100	¥320
コイルチューブ		Z229135	¥1,600	切換バルブ		Z229017	¥4,000	Oリング 切換バルブ用		D0312032120	¥320
グリップホルダー		Z229201	¥840	PA用ノズル		Z229030	¥1,700	エア配管用継手 PEG6-4		D2A100307	¥600

関連製品

パナスプレープラス

アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、ハンドピースに内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、ハンドピースの寿命を延ばします。

製品名：パナスプレープラス	製品名：パナスプレープラス6本セット
製品番号：Z182100	製品番号：Y900630
標準価格：¥5,000	標準価格：¥26,000
・ハンドピース用・480 mL・アルコール含	



スプレースト吸収パック

手を汚さず、飛散を防ぐ。

ハンドピースのヘッド部を吸着シートに差し込んで使用することで、オイルミストが周囲へ飛散するのを防ぐことができます。

製品名：スプレースト吸収パック
製品番号：Y900084 標準価格：¥5,000
・10/パック入



株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL: 0289-64-3380 FAX: 0289-62-5636	東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL: 03-5828-4180 FAX: 03-5828-0064	大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F TEL: 06-6315-7217 FAX: 06-6315-7218	ナカニシお客様相談窓口 受付時間 (土日祝日を除く) 9:00~17:00 ☎ 0120-7242-56 NSK製品に関するご意見・ご質問など、お気軽にお寄せください。
---	---	---	---