

NEW


アクセス性に優れた オールラウンド骨切り専用チップ

骨切りチップの代表チップであるH-SG1と比較し、SG12チップは刃厚が半分程度に薄くなっていることで、ボーンロスを少なく抑えることが可能に。

また、刃先がラウンド形状のため、押し切りと引き切りを上下両方で施術が行えます。


刃先の形状・刃厚の違い

SG12

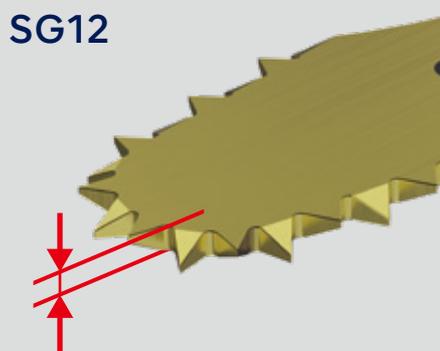

刃厚: 0.35 mm


H-SG1

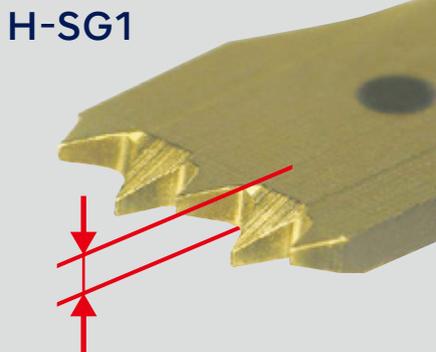

刃厚: 0.6 mm

SG12とH-SG1との比較

H-SG1と比較するとチップの長さが11mm長い為、下顎枝へのアクセスも容易になり、開口時の患者様の負担を軽減します。

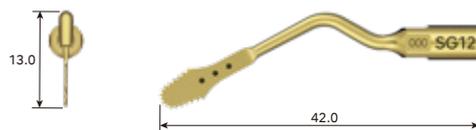

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 100%	SG12	ZT02010001	¥26,000

- チップ先端から6 mm、8 mm、10 mmにマーク入り
- 刃数: 18、厚さ: 0.35 mm • チタンコーティング

チップラインナップはこちら →

多様な術式に対応する豊富なラインナップを取り揃えております。



VarioSurg 4 Ultrasonic Bone Surgery System

より使いやすく スマートなコントロールユニット

多様な術式に対応する機能が充実

術者の好みや使用状況に合わせてパーソナライズできるプログラムメモリー機能やオートチューニング機能等、さまざまな機能を搭載。さらに、カラーLCDパネル・高感度タッチパネルの直感的なアイコンボタンで優れた視認性とスムーズな操作性を実現。

3段階の使い分けが可能なバーストモード

バーストモードは、一定の振動に対して周期的に小さな振動を与えることで、振動に変化を加え硬い皮質骨を切削する際に適した「ハンマー効果」を生み出します。3段階のバーストモード設定により、術式や骨の状況に応じたモード選択が可能です。

スーパースリムなデザインと パワフルなハンドピース

LEDライトが正確な施術をサポート

自然光に近いLEDライトは、術野を的確に照射し、正確な施術をサポート。また、独自のツインLEDライトは術野に影をつくりにくく、クリアな視野でさまざまな施術をバックアップします。



ツインLEDライト

切れ味を追求した骨切削用TiNコーティングチップ (骨切り用 / 骨切除・骨整形用 / 抜歯用)

チップの刃先を目立て処理することで切削力を高め鋭い切れ味を実現。先端の目詰まりも軽減します。

ふたつの機器を、ひとつのフットコントロールで

口腔外科用マイクロモーターシステム「サージック Pro2」とのリンク

口腔外科用マイクロモーターシステム「サージック Pro2」とのBluetooth®接続により、1台のフットコントロールで操作可能です。簡単な操作で2つのシステムを切り替えることができ、スムーズに作業を行えます。

※Bluetooth®接続時はサージック Pro2のフットコントロールを使用して操作が可能



バリオサージ 4 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VarioSurg 4 w/o FC (100V)	Y1500708	¥930,000

セット内容

- コントロールユニット・LEDハンドピース(ハンドピースコード 2m付属)
 - 滅菌ケース・ハンドピーススタンド
 - チップ(H-SG1, SG5, SG6D, SG7D, SG15C, SG17)
 - イリゲーションチューブ・チップホルダー・チップ交換レンチ 他付属品
- ※フットコントロールは別売品(オプション)です

仕様

[コントロールユニット]

- 電源: AC100 - 240V 50/60 Hz
- 注水ポンプ最大出力量: 76 mL / min
- プログラム数: SURG × 5, ENDO × 2, PERIO × 2
- 寸法: W 245 x D 235 x H 90 mm (突起部を含まず)
- 重量: 2.2 kg
- 発振周波数: 28-32 kHz



フットコントロール(オプション)

標準セットにフットコントロールは付属されておりません。オプションとして有線タイプ、無線タイプのフットコントロールを選択可能です。

製品名	製品番号	標準価格
FC-86	ZF16040001	¥91,000

- 無線タイプ・電源: 単四電池3本
- 寸法: W 260 x D 185 x H 65 mm
- 重量: 1.1 kg (ハンガー含む)



製品名	製品番号	標準価格
FC-78	Z1102003	¥96,000

- 有線タイプ・2mコード付
- 寸法: W 250 x D 170 x H 50 mm
- 重量: 1.5 kg (ハンガー・コード含む)



販売名: バリオサージ 3 認証番号: 225ABBZX00144000 販売名: バリオサージ 4 認証番号: 307ABBZX00004000
一般的名称: 電動式骨手術器械 クラス分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器 ※チップは特定保守管理医療機器非該当